



Magnification

Compact 10 HD **Compact 10 HD Speech**

Advanced Features and Functions

Geavanceerde eigenschappen en functies

Fonctionnalités et fonctions avancées

Funzioni Avanzate

Características y funciones avanzadas

Erweiterte Ausstattungsmerkmale und Funktionen

Optelec

Contents

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS	17
1. INTRODUCTION	17
1.1. ABOUT THIS MANUAL	18
1.2. WHAT'S IN THE BOX?	19
1.3. WHAT'S ON THE SCREEN?	20
2. GETTING STARTED	25
2.1. CHARGING THE BATTERY	25
<i>Battery warning</i>	26
2.2. POWER ON AND POWER OFF	26
<i>Standby</i>	27
2.3. FOLDING AND UNFOLDING THE COMPACT 10 HD	27
2.4. CLEANING THE CAMERAS	29
2.5. BUTTONS AND CONNECTIONS	30
3. CAMERAS	31
3.1. MAGNIFIER CAMERA	31
3.2. FULL PAGE CAMERA	32
<i>Focus lock</i>	32
3.3. OVERVIEW CAMERA	32
4. USING TEXT-TO-SPEECH & OCR	33
4.1. ACTIVATING THE SPEECH	33
4.2. ADJUSTING THE VOLUME AND READING SPEED	34

4.3. ADJUSTING LANGUAGE AND VOICE.....	34
4.4 TABLE MODE.....	35
5. EASY AND ADVANCED MODES	36
5.1 FEATURES IN EASY MODE	38
<i>Adjusting the magnification</i>	38
<i>Selecting a viewing mode</i>	38
<i>Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD only)</i>	39
<i>Taking a snapshot and use Text-to-Speech (Compact 10 HD Speech)</i>	39
<i>Contrast Adjustment</i>	39
5.2. FEATURES IN ADVANCED MODE	40
<i>Time and date</i>	40
<i>Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD Speech)</i>	40
5.3 MENU	41
<i>Opening and closing the menu</i>	41
<i>Voice (Compact 10 HD Speech only)</i>	43
<i>Line On/Off</i>	44
<i>Battery status</i>	44
<i>Save</i>	44
<i>Open</i>	45
<i>Delete</i>	45
<i>Adjusting the brightness</i>	45
5.4. SETTINGS.....	46
<i>Color</i>	47
<i>View (Compact 10 HD Speech only)</i>	48
<i>Miracast: connecting wirelessly to a monitor or TV</i>	48
<i>Bluetooth (Compact 10 HD Speech only)</i>	49
<i>Line</i>	50

<i>Buttons</i>	50
<i>Theme</i>	50
<i>Columns (Compact 10 HD Speech only)</i>	51
<i>Lights</i>	51
<i>Sound</i>	51
<i>Standby</i>	52
<i>Language (Compact 10 HD only)</i>	52
<i>Restore</i>	52
6. TRANSFERRING DOCUMENTS TO PC	53
GEAVANCEERDE KENMERKEN EN FUNCTIES	55
1. INLEIDING	56
1.1. OVER DEZE HANDLEIDING	56
1.2. WAT ZIT ER IN DE DOOS?	57
1.3. WAT STAAT ER OP HET SCHERM?	58
2. AAN DE SLAG	64
2.1. DE BATTERIJ OPLADEN	64
<i>Batterijwaarschuwing</i>	65
2.2. IN- EN UITSCHAKELLEN	65
<i>Stand-by</i>	66
2.3. HET OPVOUWEN EN ONTVOUWEN VAN DE COMPACT 10 HD	66
2.4. HET SCHOONHOUDEN VAN DE CAMERALENS EN DE SPIEGEL.....	67
2.5. KNOPPEN EN AANSLUITINGEN.....	69
3. CAMERA'S	70
3.1. CAMERA VOOR VERGROTING	70

3.2. CAMERA VOOR VOLLEDIGE PAGINA	70
3.3. OVERZICHTSCAMERA	71
4. TEKST-NAAR-SPRAAK EN OCR.....	72
4.1 SPRAAK ACTIVEREN.....	72
4.2 AANPASSEN VAN HET VOLUME EN DE LEESSELNHEID	73
4.3 AANPASSEN VAN TAAL EN STEM	73
4.4 TABEL MODUS.....	74
5. EENVOUDIGE EN GEAVANCEERDE WEERGAVE.....	75
5.1. EENVOUDIGE WEERGAVE.....	77
<i>Vergroting aanpassen.....</i>	77
<i>Een leesmodus selecteren.....</i>	77
<i>Een snapshot maken van een afbeelding (Compact 10 HD).....</i>	78
<i>Een tekst-naar-spraak snapshot maken (Compact 10 HD Speech)</i>	78
<i>Contrast aanpassen</i>	78
5.2. GEAVANCEERDE WEERGAVE	79
<i>Tijd en datum.....</i>	79
<i>Een snapshot maken van een afbeelding (Compact 10 HD Speech)</i>	79
5.3 HET MENU.....	80
<i>Het menu activeren en verlaten.....</i>	80
<i>Stem (Compact 10 HD Speech)</i>	82
<i>Lijn aan/uit</i>	83
<i>Batterijstatus</i>	83
<i>Opslaan</i>	84
<i>Openen</i>	84
<i>Aanpassen van helderheid.....</i>	85
5.4 INSTELLINGEN.....	85

<i>Kleuren</i>	86
<i>Beeld (enkel Compact 10 HD Speech)</i>	87
<i>Miracast: draadloos verbinden met een monitor of tv</i>	87
<i>Bluetooth (enkel Compact 10 HD Speech)</i>	88
<i>Lijn</i>	89
<i>Knoppen</i>	89
<i>Thema</i>	90
<i>Kolommen (enkel Compact 10 HD Speech)</i>	90
<i>Verlichting</i>	90
<i>Geluid</i>	91
<i>Standby</i>	91
<i>Taal (enkel Compact 10 HD)</i>	91
<i>Fabrieksinstellingen herstellen</i>	91
6. DOCUMENTEN OVERZETTEN NAAR DE PC	92
FONCTIONNALITES ET FONCTIONS AVANCEES	93
1. INTRODUCTION	94
1.1 À PROPOS DE CE MANUEL	94
1.2. CONTENU DU PAQUET	95
1.3. QUE TROUVE - T-ON SUR L'ECRAN?	96
2. POUR DEBUTER	103
2.1. CHARGER LA BATTERIE	103
<i>Alerte de charge de batterie</i>	104
2.2. ALLUMER ET ETEINDRE	105
<i>Mise en veille</i>	105
2.3. PLIER ET DEPLIER LE COMPACT 10 HD	106

2.4. NETTOYER LA FENETRE DE LA CAMERA	107
2.5. LES BOUTONS	108
3. CAMERAS.....	109
3.1. CAMÉRA DE GROSSISSEMENT.....	109
3.2. CAMÉRA PLEINE PAGE	109
<i>Verrouillage de la mise au point</i>	110
3.3. CAMÉRA VUE D'ENSEMBLE	110
4. UTILISER LES FONCTIONS TEXTE-A-PAROLE ET OCR.....	111
4.1 ACTIVER LE SPEECH.....	111
4.2 RÉGLAGE DU VOLUME ET DE LA VITESSE DE LECTURE	112
4.3 AJUSTER LA LANGUE ET LA VOIX	112
4.4 MODE TABLEAU	112
5. MODE STANDARD ET MODE AVANCE.....	113
5.1. MODE STANDARD.....	116
<i>Ajuster le grossissement</i>	116
<i>Choisir un mode de visualisation</i>	116
<i>Prendre une photo (Compact 10 HD)</i>	117
<i>Prendre une photo et utiliser la synthèse vocale (Compact 10 HD Speech)</i>	117
<i>Réglage du contraste</i>	117
5.2. MODE AVANCE.....	118
<i>Heure et date</i>	118
<i>Prendre une photo (Compact 10 HD Speech)</i>	118
5.3 MENU	119
<i>Ouvrir et fermer</i>	119
<i>Voix (Compact 10 HD Speech uniquement)</i>	121

	<i>Ligne On / Off</i>	122
	<i>État de la batterie</i>	122
	<i>Sauvegarder</i>	123
	<i>Ouvrir</i>	123
	<i>Ajuster la luminosité</i>	124
5.4	REGLAGES	125
	<i>Couleurs</i>	126
	<i>Affichage (Compact 10 HD Speech uniquement)</i>	127
	<i>Miracast: Connection sans-fil à un moniteur ou à un téléviseur</i>	127
	<i>Bluetooth (Compact 10 HD Speech uniquement)</i>	128
	<i>Ligne</i>	129
	<i>Boutons</i>	129
	<i>Thème</i>	129
	<i>Colonnes (Compact 10 HD Speech uniquement)</i>	130
	<i>Lumières</i>	130
	<i>Son</i>	130
	<i>Mode veille</i>	130
	<i>Langue (Compact 10 HD uniquement)</i>	131
	<i>Restaurer</i>	131
6.	TRANSFÉRER DES DOCUMENTS VERS UN PC	132
	CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ AVANZATE	133
1.	INTRODUZIONE	134
1.1.	INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE	134
1.2.	COSA C'È NELLA CONFEZIONE	135
1.3.	COSA SI VEDE SULLO SCHERMO	136

2. INIZIAMO.....	142
2.1. RICARICA DELLA BATTERIA	142
<i>Avvertenze sulla batteria</i>	<i>143</i>
2.2. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.....	144
<i>Standby.....</i>	<i>144</i>
2.3. APRIRE E CHIUDERE COMPACT 10 HD.....	145
2.4. PULIRE LA TELECAMERA.....	146
2.5. PULSANTI.....	147
3. TELECAMERE.....	148
3.1. TELECAMERA PER L'INGRANDIMENTO	148
3.2. TELECAMERA PER TUTTA LA PAGINA.....	148
<i>Blocco della messa a fuoco</i>	<i>149</i>
3.3. TELECAMERA PANORAMICA	149
4. USO DELLE FUNZIONI SINTESI VOCALE E OCR.....	150
4.1 ATTIVAZIONE DELLA SINTESI.....	150
4.2 REGOLAZIONE DEL VOLUME E DELLA VELOCITÀ DI LETTURA	151
4.3 REGOLAZIONI PER LINGUA E VOCE.....	151
4.4 MODALITÀ TABELLA.....	152
5. MODALITÀ SEMPLICE E AVANZATA.....	153
5.1. FUNZIONI IN MODALITÀ SEMPLICE	155
<i>Regolare l'ingrandimento.....</i>	<i>155</i>
<i>Selezionare una modalità di visualizzazione</i>	<i>155</i>
<i>Acquisire un'immagine (Compact 10 HD).....</i>	<i>156</i>
<i>Acquisire un'immagine e fare l'OCR (Compact 10 HD Speech)</i>	<i>156</i>

	<i>Regolazione del contrasto</i>	156
5.2.	FUNZIONI IN MODALITÀ AVANZATA	157
	<i>Data e ora</i>	157
	<i>Acquisire un'immagine (Compact 10 HD Speech)</i>	157
5.3	MENU	158
	<i>Aprire e chiudere il menu</i>	158
	<i>Voce (Solo Compact 10 HD Speech)</i>	160
	<i>Riga Attivata/Disattivata</i>	161
	<i>Stato della batteria</i>	161
	<i>Salva</i>	162
	<i>Apri</i>	162
	<i>Regolare la luminosità</i>	163
5.4	IMPOSTAZIONI.....	164
	<i>Colore</i>	165
	<i>Visualizza (Solo Compact 10 HD Speech)</i>	165
	<i>Miracast: connessione wireless a un monitor o a una TV</i>	166
	<i>Bluetooth (Solo Compact 10 HD Speech)</i>	167
	<i>Riga</i>	167
	<i>Pulsanti</i>	168
	<i>Tema</i>	168
	<i>Colonne (Solo Compact 10 HD Speech)</i>	168
	<i>Luci</i>	168
	<i>Suoni</i>	169
	<i>Standby</i>	169
	<i>Lingua (Solo Compact 10 HD)</i>	169
	<i>Ripristina</i>	169
6.	TRASFERIRE DOCUMENTI SUL PC	170

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS	171
1. INTRODUCCIÓN.....	172
1.1 À PROPOS DE CE MANUEL.....	172
1.2 CONTENIDO DE LA CAJA?.....	173
1.3 LA PANTALLA	174
2. CÓMO EMPEZAR A TRABAJAR.....	179
2,1. CARGAR LA BATERÍA	179
<i>Aviso de batería.....</i>	<i>180</i>
2.2. ENCENDER Y APAGAR EL QUIPO	180
<i>Suspensión.....</i>	<i>181</i>
2.3. PLEGAR Y DESPLEGAR COMPACT 10 HD	181
2.4. LIMPIAR LA VENTANA DE LA CÁMARA.....	183
2.5. BOTONES Y CONECTORES	184
3. CÁMARAS.....	185
3.1. CÁMARA DE AMPLIACIÓN	185
3.2. CÁMARA DE PÁGINA COMPLETA	186
<i>Enfoque fijo</i>	<i>186</i>
3.3. CÁMARA DE VISTA GENERAL	187
4. UTILIZAR LAS FUNCIONES DE TEXTO A VOZ Y OCR.....	188
4.1 ACTIVAR LA RESPUESTA DE VOZ	188
4.2 AJUSTAR EL VOLUMEN Y LA VELOCIDAD DE LECTURA	189
4.3 CAMBIAR EL IDIOMA Y LA VOZ	189
4.4 MODO TABLA.....	190

5. LOS MODOS BÁSICO Y AVANZADO.....	191
5.1 FUNCIONES DEL MODO BÁSICO.....	193
<i>Ajustar la ampliación</i>	193
<i>Seleccionar un modo de vista</i>	194
<i>Hacer una captura de una imagen (Compact 10 HD)</i>	194
<i>Hacer una captura para reconocimiento y lectura del texto (Compact 10 HD Speech)</i>	194
<i>Ajustar contraste</i>	195
5.2. FUNCIONES DEL MODO AVANZADO.....	195
<i>Fecha y hora</i>	195
<i>Hacer una captura de una imagen (Compact 10 HD Speech)</i>	196
5.3 MENÚ	196
<i>Abrir y cerrar el menú</i>	196
<i>Voz (sólo Compact 10 HD Speech)</i>	199
<i>Línea activada/desactivada</i>	200
<i>Estado de la batería</i>	200
<i>Guardar</i>	200
<i>Abrir</i>	201
<i>Ajustar el brillo</i>	202
5.4 CONFIGURACIÓN.....	202
<i>Color</i>	203
<i>Vista (sólo Compact 10 HD Speech)</i>	204
<i>Miracast: conexión inalámbrica con un monitor o televisor</i>	204
<i>Bluetooth (sólo Compact 10 HD Speech)</i>	205
<i>Línea</i>	206
<i>Botones</i>	206
<i>Tema</i>	206
<i>Columnas (sólo Compact 10 HD Speech)</i>	207

<i>Luces</i>	207
<i>Sonido</i>	207
<i>Standby</i>	208
<i>Idioma (solo Compact 10 HD)</i>	208
<i>Restaurar</i>	208
6. TRANSFERIR DOCUMENTOS AL PC	209
ERWEITERTE AUSSTATTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN	211
1. EINFÜHRUNG	212
1.1. ÜBER DIESES HANDBUCH	212
1.2. WAS GEHÖRT ZUM LIEFERUMFANG?	213
1.3. WAS WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT?	214
2. ERSTE SCHRITTE	220
2.1. AUFLADEN DES AKKUS.....	220
<i>Akkuwarnung</i>	221
2.2. EIN- UND AUSSCHALTEN	222
<i>Bereitschaft (Standby)</i>	222
2.3. ÖFFNEN UND SCHLIEßEN DES COMPACT 10 HD LESESTÄNDERS	223
2.4. REINIGUNG DER KAMERALINSEN.....	224
2.5. TASTENBELEGUNG.....	225
3. KAMERAS	226
3.1. LESEKAMERA	226
3.2. GANZSEITENKAMERA	226
<i>Autofokus ausschalten</i>	227
3.3. OBJEKTKAMERA	227

4. TEXTE ERKENNEN UND VORLESEN LASSEN	228
4.1 DIE SPRACHE AKTIVIEREN	228
4.2 EINSTELLEN VON LAUTSTÄRKE UND VORLESEGESCHWINDIGKEIT	229
4.3 EINSTELLEN VON LANDESSPRACHE UND VORLESESTIMME	230
4.4 TABELLENMODUS	230
5. EINFACHER UND ERWEITERTER MODUS	231
5.1. EINFACHER MODUS	233
<i>Einstellen der Vergrößerung</i>	<i>233</i>
<i>Auswahl des Darstellungsmodus</i>	<i>234</i>
<i>Einen Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD)</i>	<i>234</i>
<i>Einen Schnappschuss machen und Text anhören (Compact 10 HD Speech)</i>	<i>234</i>
<i>Kontrasteinstellung</i>	<i>235</i>
5.2. ERWEITERTER MODUS	235
<i>Zeit und Datum</i>	<i>235</i>
<i>Einen Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD Speech)</i>	<i>236</i>
5.3 MENÜ	236
<i>Stimmen und Landessprachen (nur Compact 10 HD Speech)</i>	<i>238</i>
<i>Linie Ein/Aus</i>	<i>240</i>
<i>Akku-Status</i>	<i>240</i>
<i>Sichern</i>	<i>241</i>
<i>Öffnen</i>	<i>241</i>
<i>Die Helligkeit anpassen</i>	<i>242</i>
5.4 EINSTELLUNGEN	243
<i>Farben</i>	<i>244</i>
<i>Darstellung (nur bei Compact 10 HD Speech)</i>	<i>245</i>
<i>Miracast: Drahtlos mit einem Monitor oder Fernseher verbinden</i>	<i>245</i>

<i>Bluetooth (nur bei Compact 10 HD Speech)</i>	247
<i>Position der Leselinie</i>	248
<i>Tasten</i>	248
<i>Design</i>	248
<i>Spalten (nur bei Compact 10 HD Speech)</i>	249
<i>Beleuchtung</i>	249
<i>Sound</i>	249
<i>Bereitschaft (Standby)</i>	250
<i>Landessprache (nur bei Compact 10 HD Speech)</i>	250
<i>Wiederherstellen</i>	250
6. DOKUMENTE AUF DEN PC ÜBERTRAGEN	251
CONTACT	275

Compact 10 HD

Compact 10 HD Speech

Advanced Features and Functions



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introduction

Congratulations on choosing the Compact 10 HD or the Compact 10 HD Speech!

With its large 10" screen, customizable features and intuitive operation, the Compact 10 HD offers all benefits of a desktop video magnifier, but in a much smaller, foldable, and portable design. With the arm unfolded, you can easily look at photos, write your signature, view medicine packaging, and even read round cans without being restricted in your movements. With the Compact 10 HD Speech, the swing-out arm allows you to scan and read full pages of text.

If you have questions or suggestions concerning the use of this product, contact your distributor or Optelec's headquarters, using the contact information on the last page of this manual. Your feedback is greatly appreciated. We hope you enjoy working with your Compact 10 HD!

1.1. About this manual

At Optelec, we are constantly improving our products and their functionality. Therefore, it is possible that this manual is not the latest version. Download the most up-to-date manual on www.optelec.com at the Support section.

This manual will familiarize you with the features and basic operation of the Compact 10 HD and the Compact 10 HD Speech. Read this manual carefully before using your device.



Unless otherwise indicated, all references to the Compact 10 HD will also apply for the Compact 10 HD Speech. Functionality specifically applicable for the Compact 10 HD Speech are marked with the Speech logo.

1.2. What's in the box?

The Compact 10 HD packaging contains the following:

- The Compact 10 HD or the Compact 10 HD Speech video magnifier
- A protective pouch
- A USB power supply with USB-C cable
- 4 country-specific power plugs (EU, US, UK, and AU)
- A screen cleaning cloth
- Setup and Use
- Safety and Care

If any of these items are missing from your package, contact your distributor.

1.3. What's on the screen?

Icons are used on the Compact 10 touch screen to represent product functionality. Use this section as a reference tool for understanding the graphics on the screen.

Some graphics only appear if you own a Compact 10 Speech. The table below specifies which functions are available in Speech only. In addition, a blue icon in the documentation indicates Speech only.



Icon	Description	Both or Speech only	Occurrence
	Decrease the magnification of the image on the screen.	Both	Easy and Advanced modes
	Take a snapshot of an image without using text to speech.	Both	Easy and Advanced modes
	Take a snapshot, scan for text, and read the text.	Speech only	Advanced mode
	Change the combination of colors used to display the live view.	Both	Easy and Advanced modes

Icon	Description	Both or Speech only	Occurrence
	Increase the magnification of the image on the screen.	Both	Easy and Advanced modes
	Open the main menu, where you can change system settings.	Both	Advanced mode
	Displays the current time and date.	Both	Advanced mode
	Set focus lock so you can maintain the focus on one item while another is moved in the camera frame.	Both	Full Page camera in Easy and Advanced modes
	Tap to open the volume and reading speed menu. Long press to select a voice.	Speech only	After taking a Text-to-Speech snapshot in Easy and Advanced modes

Icon	Description	Both or Speech only	Occurrence
	Close the snapshot.	Both	After taking a snapshot in Easy and Advanced modes
	Adjust the volume.	Speech only	After opening the volume and reading speech menu in Easy and Advanced modes
	Adjust reading speed.	Speech only	After opening the volume and reading speech menu in Easy and Advanced modes
	Play or pause reading.	Speech only	After text to speech

Icon	Description	Both or Speech only	Occurrence
	Tap to change the viewing mode. Long press to switch between Basic and Advanced modes.	Both	Easy and Advanced modes
	Add, remove, and select your reading voice and language and your menu voice and language.	Speech only	When changing menu settings in Advanced mode
	Determine whether highlighting, underlining, or boxes are used to show the current place in captured text.	Speech only	When changing menu settings in Advanced mode
	Use Miracast to connect to a television or monitor via Wi-Fi.	Both	When changing menu settings in Advanced mode
	Use Bluetooth to pair with a speaker or headphones via Wi-Fi.	Speech only	When changing menu settings in Advanced mode

Icon	Description	Both or Speech only	Occurrence
	Choose whether to display a reading line across the screen.	Both	When changing menu settings in Advanced mode
	Change the position of the button bar.	Both	When changing menu settings in Advanced mode
	Shows the status of the battery. A lightning symbol means the battery is charging.	Both	From main menu in Advanced mode
	Brightness slider.	Both	From main menu in Advanced mode
	Display a menu where you change settings, including the way images look on the screen and how sound is handled.	Both	From main menu in Advanced mode

2. Getting Started

The Compact 10 HD is placed correctly in front of you when the screen is facing up and towards you, with the Optelec logo below the screen.



2.1. Charging the battery

The Compact 10 HD is delivered with a power supply and four country-specific power plugs in EU, US, UK, and AU types. Slide the appropriate plug for your region onto the power supply until it clicks.

The battery should be charged before initial use. To charge the Compact 10 HD, connect the supplied USB cable to the power supply and the blue USB connector located on the left side of the unit. Plug the other end of the power supply into a power outlet.



Battery full



Battery charging



Battery almost empty

Charging the Compact 10 HD takes about 3.5 hours. A fully charged Compact 10 HD has up to 3.5 hours of battery life, depending on product settings and use. For safety reasons, only use the power supply and USB cable that was delivered with the Compact 10 HD to charge the unit's battery.

Battery warning

The Compact 10 HD will briefly show an empty battery warning icon to indicate that the battery needs to be charged. When this occurs, make sure to charge your unit. When the battery is empty, the unit will automatically switch off.

If the Compact 10 HD does not switch on, make sure it is charged.

2.2. Power on and power off



To switch on the Compact 10 HD for the first time, the unit needs to be charged. Once charged, hold down the orange On / Off switch for three seconds. To switch off the Compact 10 HD, press the orange button for three seconds again. When switching on the Compact 10 HD, it will take approximately 20 seconds before an image displays on screen.

Standby



Press the orange On / Off button briefly to put Compact 10 HD in standby mode. Compact 10 automatically goes into standby mode if no button is pressed and no movement is detected for a user-defined amount of time. Briefly pressing the On / Off button powers it back on. You can change or disable the standby time in the Compact 10 HD menu. See chapter 5.4 for more information.

2.3. Folding and Unfolding the Compact 10 HD

When unfolding the Compact 10 HD, the screen will be set at an ergonomic angle for reading, and the magnifier camera will be activated.

To **open** the Compact 10 HD, follow these steps:

1. Place the Compact 10 HD in front of you so that the screen is facing up, and the Optelec logo is below the screen.
2. Grab and hold the Compact 10 HD in an upright position. Your fingers hold the feet of the stand while your thumbs hold the side of the Compact 10 HD.

3. While supporting the unit by squeezing it with the palms of your hands, curl your fingers underneath the legs and pull them away from the back of the unit. You will feel the legs start to unfold, pull until they are completely straight.

To **close** the Compact 10 HD, follow these steps:

1. Place the Compact 10 HD in front of you so that the screen is facing towards you.
2. Hold the Compact 10 HD at the sides and place your fingers on the supports between the feet and the unit.
3. Gently press against the hinges of the stand until it starts to fold, then continue folding until the feet are flush with the unit. Tilt the screen down until it clicks in position.

2.4. Cleaning the cameras


For an optimal quality image, it is recommended to ensure that the camera lens and object light window are kept clean. A dirty camera window will result in a fuzzy image and may cause the auto-focus camera to focus incorrectly. To clean the cameras, use the provided cleaning cloth or another soft lens cleaning cloth.

Note: Do not use water or cleaning agents to clean the camera window.



2.5. Buttons and Connections

The Compact 10 HD has the following buttons and connections at the left side of the product:

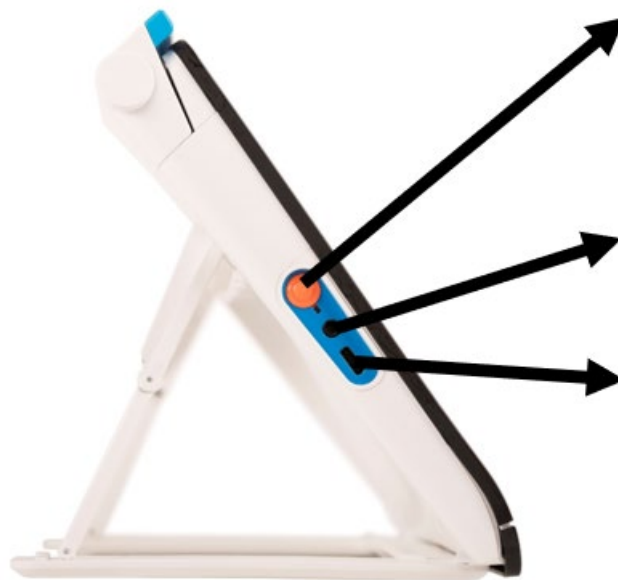

On / Off button

A short press of the orange On / Off button will place the Compact 10 HD into sleep mode or resume the unit. A 6 second press of this button switches the unit off or back on again.

Audio jack

Use the audio jack to connect a headset to the Compact 10 HD.

USB-C connector

Use the USB-C connector to charge the Compact 10 HD. The supplied USB cable connects to this USB port and power supply. Use only the power supply that comes with the Compact 10 HD to power and charge the unit.

3. Cameras

The Compact 10 HD is equipped with three cameras, each serving a specific task or situation. All cameras can be used in Easy mode and Advanced mode. If the image on screen looks out of focus, tap the screen to re-focus the camera and get a sharp image.

3.1. Magnifier camera

The Magnifier camera is used when the Compact 10 HD is in the open position with the stand unfolded. The Magnifier camera is used for reading on a desk or table. The Compact 10 HD is placed on top of the reading material.

3.2. Full Page camera

The Full Page camera is used when the swing-out camera arm is opened. The Full Page camera can be used to view photos and objects more comfortably, or to write your signature, without being restricted in your movements.

Focus lock

The auto focus can be locked for writing or viewing objects at a fixed distance. Use the pen icon at the top right corner of the screen to lock or unlock the focus.



If you own a Compact 10 HD Speech, the full page camera is also used to scan and read full-page documents. Place the document you want to read below the camera, aligning the bottom left corner of the document with the blue line at the right foot of the Compact 10 HD Speech.



3.3. Overview camera

The Overview camera is used when you power on the Compact 10 HD while the Compact 10 HD stand is closed. To switch from Magnifier camera to Overview camera, close the stand and press the On / Off button. The overview camera is optimized to look at objects at a short distance, such as timetables.



4. Using Text-to-Speech & OCR

If you own a Compact 10 HD Speech, you can take a Text-to-Speech snapshot. The Compact 10 HD Speech will extract the text from the image and will read the text aloud.



4.1. Activating the speech

To take a Text-to-Speech snapshot and activate the Speech:

- Position the text or part of the text in the camera view and press the Text-to-Speech snapshot button. When taking a Text-to-Speech snapshot of a full page, use the full-page camera and make sure you align the bottom left corner of the document with the blue indicator at the right side of the stand of the Compact 10 HD Speech. For an optimal result, make sure there is enough light in the environment, prevent shadows and limit the text to only the part of the document you would like to read. If the font you are scanning gets too small, the recognition will lose accuracy and might fail.
- A progress bar will be shown. The Compact 10 HD Speech will start reading after the recognition process has been finished.
- Use the Play/Pause button to start or stop reading.

- Tap and hold (long press) on the text to start reading at the word or section you point at.
- Press the “Mode” button to view the captured text in your selected viewing mode and cycle through the selected high contrast colors of this viewing mode. Please refer to chapter 5.4, View and chapter 5.4 Color for more information.
- If no text is found, a “No text found” message will be shown.

4.2. Adjusting the volume and reading speed

To adjust the volume or reading speed, activate the button bar with a single tap. Tap the Audio button to display the “Volume” and “Speed” sliders. The “Volume” and “Speed” sliders are only present in the snapshot view.

4.3. Adjusting language and voice

To adjust the language or voice in Easy Mode, press and hold the Audio button to go to the Voice menu. To adjust the language or voice in Advanced Mode, press the “Menu” button and then press the “Voice” menu. Refer to Chapter 5.3, Voice for information on navigating the “Voice” menu.

4.4 Table Mode

The regular reading mode reads columns, ideal for newspapers and magazines. But you might occasionally want to read a menu, receipt, table or other text that has a table-like layout. By pressing and holding the Text-to-Speech Snapshot button, the Compact 10 HD Speech will take a snapshot and read all captured text per line from left to right first, and then move to the next line. When you exit the Text-to-Speech snapshot and take another snapshot, you will automatically switch back to the regular reading mode.

5. Easy and Advanced modes


To switch between Easy and Advanced mode, press and hold the Mode button and tap Easy or Advanced.

In Easy mode, you have access to the main features:


- Adjusting the magnification
- Selecting a viewing mode
- Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD only)
- Taking a snapshot and use Text-to-Speech (Compact 10 HD Speech only)
- Switching between the Magnifier and Overview camera

In Advanced mode, you have the same functions as in Easy mode, plus some additional features:


- Time and date
- Access to the menu with the options to:
 - Save and open snapshots
 - Changing the language and reading voice
 - Changing color modes
 - Enabling the Reading Line
 - Bluetooth audio and Miracast
 - Other advanced settings
 - Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD Speech only)

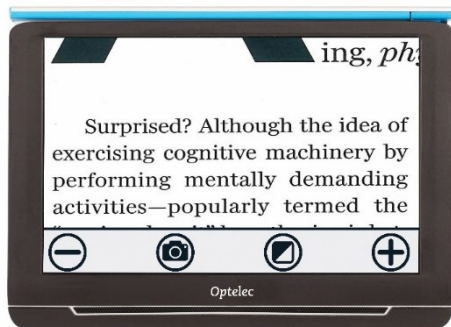


Compact 10 HD Easy Mode

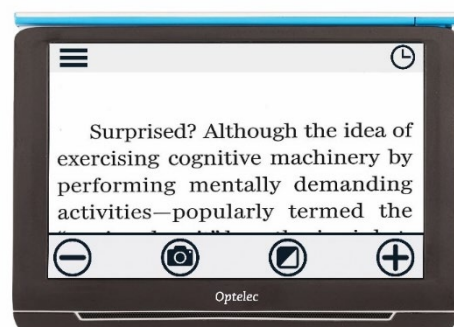

Compact 10 HD Advanced Mode

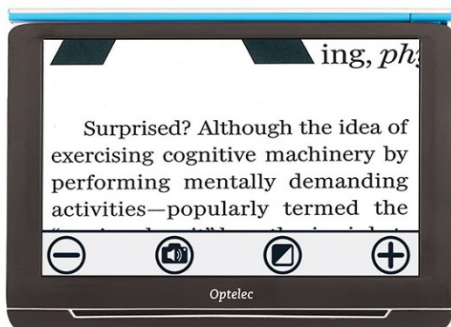

Compact 10 HD Speech Easy Mode

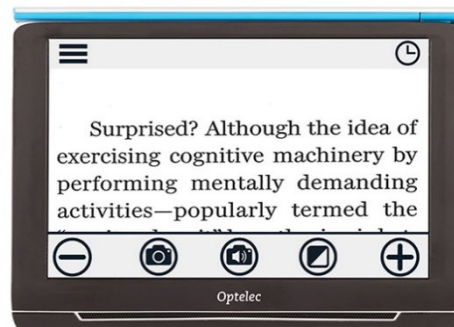

Compact 10 HD Speech Advanced Mode

5.1 Features in Easy mode

Adjusting the magnification



To change the magnification, simply tap the screen. The button bar will be shown at the bottom of the screen or at the right side of the screen, depending on the chosen button bar position. The button bar position can be selected in the menu. See chapter 5 for more information on how to change the button bar position. In the button bar tap the + button to increase or the – button to decrease the magnification. Alternatively, use the pinch-to-zoom gesture to change the magnification. Tap the screen to hide the button bar. The button bar will automatically hide when the screen is not touched for 10 seconds.

Selecting a viewing mode



Tapping the Mode button in the middle of the button bar allows you to select one of the following viewing modes:

- **Photo mode:** Viewing full color texts and photos
- **Negative mode:** Reading in high contrast, white on black
- **Positive mode:** Reading in high contrast, black on white
- High contrast **color combination 1**
- High contrast **color combination 2**

Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD only)



If you own a Compact 10 HD, press the snapshot button to take a snapshot. You can adjust the magnification and viewing mode of the snapshot. Press the X in the top right corner to close the snapshot and return to live video mode.

Taking a snapshot and use Text-to-Speech (Compact 10 HD Speech)



If you own a Compact 10 HD Speech, press the Text-to-Speech snapshot button to take a snapshot and have it read aloud. Use the Play/Pause button to start or stop reading. You can adjust the magnification and viewing mode, adjust the volume and reading speed and change the voice within the Text-to-Speech snapshot. Press the X in the top right corner to close the Text-to-Speech snapshot and return to live video mode. Refer to Chapter 4 for more information on how to use Text-to-Speech.

Contrast Adjustment

If characters or other on-screen elements are not clearly visible in the high contrast color mode you selected, you can enhance the image and increase the sharpness. To adjust the contrast, press and hold the touch screen with three fingers for approximately three seconds and a slider will appear. Slide to the left or right to adjust the contrast. Press the reset button to go back to the default setting. Tap anywhere on the screen to exit.

5.2. Features in Advanced mode

In Advanced mode, you have the same functions as in Easy mode, plus some additional features.

Time and date

To open the clock, tap the screen and tap on the “Clock” icon at the top right corner of the screen. Use the “Back bar” with the arrow to exit the time and date screen.

To set the time and date, tap the time or date. To change a value, tap on the field you would like to change and tap on the up or down symbol to change the value. Tap on the “Back bar” to exit the set time and date screen.

Taking a snapshot of an image (Compact 10 HD Speech)




If you own a Compact 10 HD Speech and just want to take a snapshot of an image without using Text-to-Speech, press the snapshot button. You can adjust the magnification and viewing mode of the snapshot. Press the X in the top right corner to close the snapshot and return to live video mode.

5.3 Menu

Opening and closing the menu

To open the menu, tap on the screen and tap on the “Menu” icon at the left side of the screen. This will open the main menu. To close the menu, tap on the “Back bar”.

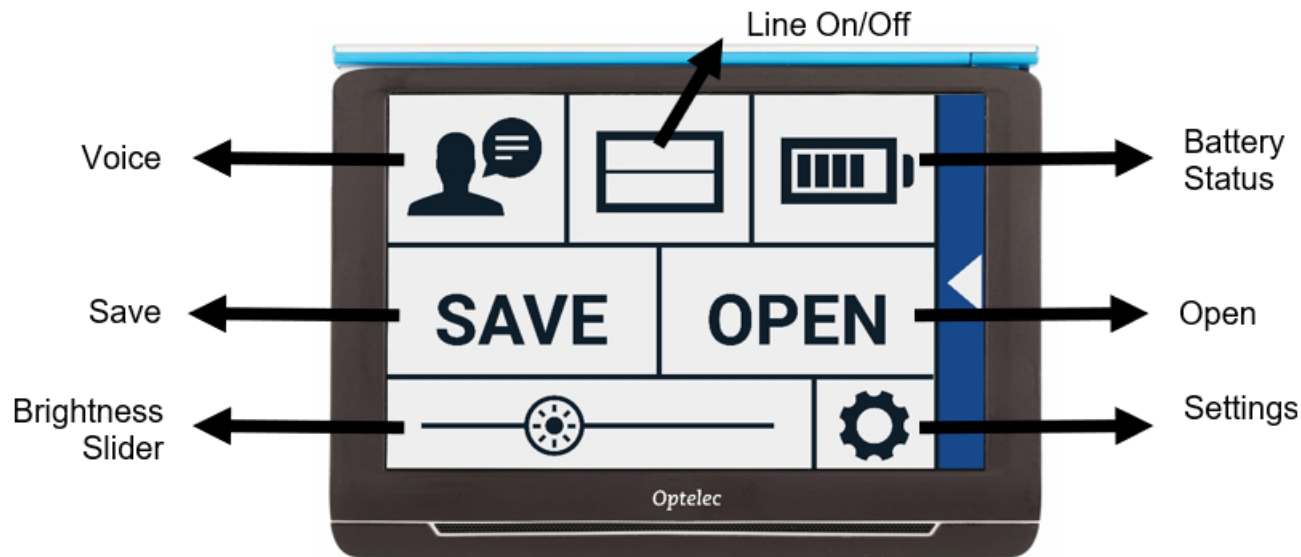

The exact items in the menu will vary, depending on whether you own a Compact 10 HD or 10 HD Speech. To activate a button, tap the button once. Activating a button will open a new menu screen or list. To go back to the main menu, tap on the “Back bar”. To adjust the slider, tap and hold the slider button while moving it to the right or left.

The main menu contains the following options:

- Voice (Compact 10 HD Speech only)
- Line On/Off
- Battery status
- Save
- Open
- Brightness slider
- Settings



Voice (Compact 10 HD Speech only)

To select a voice, language and menu language, or to add or remove a voice or language, open the menu and tap the “Voice” button.

Selecting a voice, language and menu language

This menu item lets you select your reading voice and language. To select another reading voice, tap the voice icon in the top left corner of the main menu to open the list with preselected voices. Each voice represents a language. Tap on a voice to select the voice. If adjusting the reading voice results in a change of language, the menus will automatically change to that language.

Adding or removing a voice or language

To add or remove a voice or language, tap the voice icon in the top left corner of the main menu. In the list with preselected voices, tap on the “Add/Remove” button. To add or remove a reading voice, select the language from the list by tapping on the language. This will display a list with available voices for the selected language. To enable a reading voice, select it from the list by tapping on it. A checkmark in front of the voice name will indicate if it is enabled. When the voice is enabled, it will be available under the “Voice” button in the main menu. By deselecting a voice, the voice will be removed from the available reading voices. The languages of which a reading voice is selected, will appear at the top of the list with languages, and are marked with a checkmark.

Adjusting language and voice in Easy Mode

In Easy mode, you cannot access the Menu. To adjust the language or voice in Easy Mode, press and hold the “Audio” button to go directly to the Voice menu and follow the steps described above.

Line On/Off

The Compact 10 HD can display a reading line to help you position the Compact 10 HD straight on the document. To enable the reading line, tap the “Line” button. Tap this button again to hide the reading line.

Battery status

The battery status is shown in the top right corner of the screen. If you tap the battery icon, a new screen will be opened showing a magnified battery icon and battery status, the “About” button and the “Back arrow” to return to the main menu. The lightning symbol indicates that the battery is charging. Tap on the “About” button in the battery screen to see the application version.

Save

This option is only available in Advanced mode.

To save a snapshot, open the menu and tap the “Save” button.

1. Create a snapshot using the snapshot button.
2. Open the menu.
3. Tap the “Save” button to save the snapshot.

If there is no snapshot to save, the “Save” button is hidden.

Open

To open a snapshot, open the menu and tap on the “Open” button. A list of thumbnails of the saved snapshots will be shown, showing the most recently saved snapshot first. If there are more snapshots than fit on the screen, swipe up and down to scroll through the list. Tap on the snapshot thumbnail to open it.

Delete

To delete a snapshot, open the menu and tap on the “Open” button. In the open screen, tap on the “Delete” button. A list of thumbnails of the saved snapshots will be shown, showing the most recently saved snapshot first. Each snapshot has a checkbox at the top right corner. To select a snapshot, tap the checkbox. Tap the “Delete” button to delete the selected snapshots. To delete all snapshots, tap the “Delete” button without selecting a snapshot. You will be prompted to confirm to delete all snapshots. To delete all snapshots, select “Yes”. To cancel deleting all snapshots, select “No”. Both choices will return you to the list of snapshots. Tap the “Back bar” to return to the “Open” screen. Tap the “Back bar” again to return to the main menu.


Adjusting the brightness

Use the slider with the sun icon to increase or decrease the brightness of the screen.

5.4. Settings

Tap on the “Settings” button to enter the Settings menu. The “Settings” button is the button with the gear icon at the bottom right. The Settings menu contains the following buttons:

- Color
- View (Compact 10 HD Speech only)
- Miracast
- Bluetooth (Compact 10 HD Speech only)
- Line
- Buttons
- Theme
- Columns (Compact 10 HD Speech only)
- Lights
- Sound
- Standby
- Language (Compact 10 HD only)
- Restore

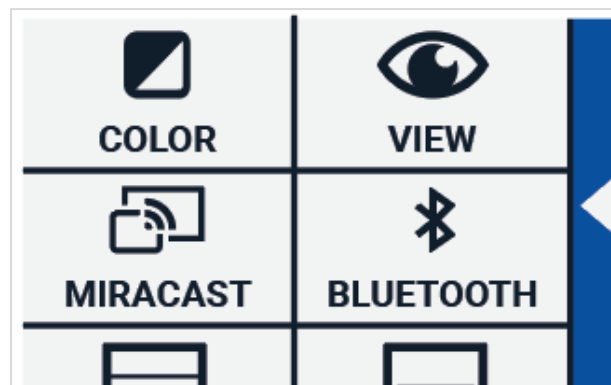

Color

In the settings menu, tap the “Color” button to select the preferred high contrast colors. The Compact 10 HD supports four high contrast modes. For each of these four modes, the foreground and background colors can be selected. Three of the high contrast modes can be disabled. The first high contrast mode on the top left is required.

To change the foreground and background colors, tap the up or down arrow next to the mode you want to change. You will cycle through each of the available modes and can stop on the one you prefer. Select the “X” symbol to disable a high contrast mode. Tap on the “Back bar” to return to the settings menu.



View (Compact 10 HD Speech only)



In the settings menu, tap the “View” button to configure how you want to display captured text when using Text-to-Speech.

To configure how all captured text is shown, press the Mode button to cycle through the different viewing modes: Original, Line and Column.

To configure how the word that is read aloud is shown, press the Highlight button to cycle through the different highlight modes: Rectangle and Underline.

When using Text-to-Speech, tap the Mode button in the button bar to view captured text in the viewing mode you just selected and cycle through your configured high contrast colors.



Miracast: connecting wirelessly to a monitor or TV

Miracast is a standard for a wireless connection to a monitor. It can be described as ‘HDMI over Wi-Fi’, replacing the cable from the Compact 10 HD to the monitor or TV. To be able to use the Miracast function of the Compact 10 HD, your monitor or TV needs to support Miracast. Please refer to your monitor or TV manual and documentation to verify if your device supports the Miracast feature.

To connect your Compact 10 HD to a monitor or TV via Miracast, tap the “Miracast” button and switch to Miracast on. A list with available devices will be displayed. Click on a device to connect. It could take up to a minute to establish the connection. Tap on the device again to disconnect. When a Miracast connection is established, both the audio and video will be streamed to the TV or monitor. To guarantee a good connection, the Compact 10 HD needs to be within one meter or three feet of the monitor or TV. Depending on the connection, a short delay of the video and / or audio could be noticed.



Bluetooth (Compact 10 HD Speech only)

To connect a Bluetooth speaker or headphone, tap the “Bluetooth” button and switch Bluetooth on. A list with paired devices is being displayed.

If no speaker or headphone is being paired, tap the “Search” button to search for available devices. Before starting the Bluetooth search, make sure the speaker or headphone is switched on and is set to discoverable. Please refer to the speaker’s or headphone’s manual on how to switch the device to Bluetooth discoverable mode. To pair the speaker or headphone, tap on the device name and if needed enter the pin code. Refer to the speaker’s or headphone’s manual for the pin code of the device.

When the device is paired, to connect the speaker or headphone, tap the device. You will be asked to connect or forget the device. Tap the “Connect” button to make the connection.

To indicate that a device is connected, the connected device will have a checkmark and will be displayed in blue.

To unpair / forget a device, tap the “Forget” button. The device will be removed from the list with paired devices.

Note: Only Bluetooth version 4.0 or higher headsets and speakers are supported.

Line

This menu item enables you to change the reading line position to one of its six positions: horizontal top, horizontal center, horizontal bottom, vertical left, vertical center, vertical right. By default, the reading line is horizontally set to the center of the screen.

Buttons

This menu item enables you to change the button bar position to one of two positions: bottom or side. Depending on your preference, you could change the position of the button bar to the bottom or side of the screen. The default setting is “Bottom”.

Theme

This menu item enables you to select a light or dark theme for the buttons and menus.

Columns (Compact 10 HD Speech only)



This menu item allows you to choose if you want the Compact 10 HD Speech to only read full columns, or incomplete columns as well. By default, **Read full columns only** is selected. If you select to read incomplete columns, not all characters and words are fully captured, which may result in incoherent text.

Lights

This menu item allows you to enable or disable the lights in Magnifier mode and in Overview mode. The Magnifier lights are located to the left and right of the magnifier camera. By default, the reading lights are enabled for an optimal image quality.

The Overview light is located next to the overview camera. By default, the overview light is disabled.

Sound

This menu item allows you to change the volume, mute the audio feedback and enable or disable the vibration feedback. By default, sound is enabled and vibration is disabled.

Standby

This menu item allows you to adjust the standby time. The standby time sets the time after which the Compact 10 HD goes into standby mode to conserve power. Pressing any button will take the unit out of standby mode. By default, the standby time is set to 5 minutes after no button is pressed or no movement of the Compact 10 HD is detected.

Language (Compact 10 HD only)

This menu item allows you to choose the language of the Compact 10 HD. Tap to select your preferred menu language.

Restore

Tap this menu item if you wish to restore the default settings. You will be prompted if you are sure to restore the defaults. To restore the default values, select “Yes”. To cancel restoring the defaults, select “No”.

6. Transferring documents to PC

To transfer snapshots and documents to a PC, you need a Windows 10 PC and the included USB cable and follow the steps below:

1. Switch on the Compact 10 HD and your PC.
2. Connect the Compact 10 HD to your Windows 10 PC using the included USB cable. The Compact 10 HD will briefly show the “Connected to PC” icon.
3. If you connect the Compact 10 HD for the first time, wait until Windows has finished setting up the device.
4. Depending on your Windows settings, Windows Explorer will open the “CP10” device and show the “Internal Shared Storage”.
5. If Windows 10 does not automatically show the Compact 10 HD device, open Windows Explorer and select the CP10 device.
6. Click on the “Internal Shared Storage” and click on the folder “DCIM”. The “DCIM” folder contains folders named with the time and date of the taken pictures. Each folder contains the taken picture and if you own a Compact 10 HD Speech, a .txt document with the text found in the picture. In addition, the folder contains two system files, a JSON and Processed Picture file.
7. Use copy and paste to copy the files to your PC.

Compact 10 HD Compact 10 HD Speech

Geavanceerde kenmerken en functies



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Compact 10 HD of Compact 10 HD Speech!

Met zijn grote 10-inch scherm, aanpasbare functies en intuïtieve bediening biedt de Compact 10 HD alle voordelen van een beeldscherm vergroter, maar dan in een veel kleiner, inklapbaar en draagbaar ontwerp. Met de uitgevouwen arm kunt u eenvoudig naar foto's kijken, uw handtekening plaatsen, medicijnverpakkingen bekijken en zelfs ronde blikjes lezen, zonder te worden beperkt in uw bewegingen. Met de Compact 10 HD-spraak kunt u met de uitklapbare camera arm de tekst van volledige pagina's scannen en lezen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw leverancier of met het Optelec hoofdkantoor. Contactinformatie vindt u op de laatste pagina van deze handleiding. Uw feedback wordt enorm gewaardeerd. We hopen dat u veel gebruiksplezier heeft van uw Compact 10 HD!

1.1. Over deze handleiding

Bij Optelec zijn we continu bezig met het verbeteren van onze producten en de functionaliteit ervan. Daarom is het mogelijk dat deze handleiding niet de meest recente versie is. De laatste versie van de handleiding vindt u op www.optelec.nl onder de categorie support.

Deze handleiding maakt u bekend met de functionaliteit en bediening van de Compact 10 HD en Compact 10 HD Speech. Lees deze handleiding vooraf goed door voor u het apparaat gaat gebruiken.



Alle informatie over de Compact 10 HD is ook van toepassing op de Compact 10 HD Speech behalve als het anders wordt aangegeven. Specifieke functionaliteit van de Compact 10 HD Speech wordt gemarkeerd met het “Speech” logo.

1.2. Wat zit er in de doos?

De Compact 10 HD-verpakking bevat het volgende:

- De Compact 10 HD of de Compact 10 HD Speech video-loep
- Een beschermend tasje
- Een USB-voeding met USB-C-kabel
- 4 landspecifieke stekkers (EU, VS, VK en AU)
- Een schermreinigingsdoekje
- Installatie en gebruik
- Veiligheid en Onderhoud

Als een van deze items ontbreekt in uw pakket, neem dan contact op met uw leverancier.

1.3. Wat staat er op het scherm?

Op het Compact 10 aanraakscherm worden pictogrammen gebruikt om productfuncties weer te geven. Gebruik dit gedeelte als naslagwerk om de afbeeldingen op het scherm te begrijpen.

Sommige afbeeldingen verschijnen alleen als u een Compact 10 speech hebt. De onderstaande tabel geeft aan welke functies alleen beschikbaar zijn voor Speech. Een blauw pictogram in de documentatie geeft aan dat opties alleen in Speech mogelijk zijn.



Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	Verlaag de vergroting van het beeld op het scherm.	Beide	Eenvoudige en geavanceerde modus
	Maak een snapshot van een afbeelding zonder tekst naar spraak te gebruiken.	Beide	Eenvoudige en geavanceerde modus
	Maak een snapshot, scan op tekst en lees de tekst.	Alleen Speech	Geavanceerde modus

Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	Wijzig de kleurencombinatie die wordt gebruikt om de liveweergave weer te geven.	Beide	Eenvoudige en geavanceerde modus
	Vergroot het beeld op het scherm.	Beide	Eenvoudige en geavanceerde modus
	Open het hoofdmenu, waar u de systeeminstellingen kunt wijzigen.	Beide	Geavanceerde modus
	Toont de huidige tijd en datum.	Beide	Geavanceerde modus
	Stel scherpstelvergrendeling in zodat u kunt blijven focussen op een item terwijl een ander item wordt verplaatst in het camerakader.	Beide	Volledige paginacamera in de Eenvoudige en Geavanceerde modus

Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	Tik om het menu voor volume en leessnelheid te openen. Lang indrukken om een stem te selecteren.	Alleen Speech	Na het maken van een Tekst-naar-Spraak snapshot in de Eenvoudige en Geavanceerde modus
	De snapshot sluiten.	Beide	Na het maken van een snapshot in de Eenvoudige en Geavanceerde modus
	Het volume aanpassen.	Alleen Speech	Na het openen van het volume en het voorleesmenu in de Eenvoudige en Geavanceerde modus

Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	Voorleessnelheid anaphase.	Alleen Speech	Na het openen van het volume en het voorleesmenu in de Eenvoudige en Geavanceerde modus
	Voorlezen starten of pauzeren.	Alleen Speech	Na tekst naar spraak
	Tikken om de weergavemodus te wijzigen. Lang indrukken om te schakelen tussen de eenvoudige en geavanceerde modus.	Beide	Eenvoudige en geavanceerde modus
	Uw leesstem en -taal en uw menustem en -taal toevoegen, verwijderen en selecteren.	Alleen Speech	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus

Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	Bepaal of markeren, onderstrepen of kaders wordt gebruikt om de huidige plaats in de vastgelegde tekst weer te geven.	Alleen Speech	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus
	Gebruik Miracast om via Wi-Fi verbinding te maken met een televisie of monitor.	Beide	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus
	Gebruik Bluetooth om te koppelen met een luidspreker of hoofdtelefoon via Wi-Fi.	Alleen Speech	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus
	Kies of er een leeslijn over het scherm moet worden weergegeven.	Beide	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus

Pictogram	Omschrijving	Beide of alleen Speech	Voorkomen
	De positie van de knoppenbalk wijzigen.	Beide	Bij het wijzigen van menu-instellingen in de geavanceerde modus
	Toont de status van de batterij. Een bliksemsymbool betekent dat de batterij wordt opgeladen.	Beide	Vanuit het hoofdmenu in de geavanceerde modus
	Helderheid schuifregelaar.	Beide	Vanuit het hoofdmenu in de geavanceerde modus
	Geef een menu weer waarin u instellingen kunt wijzigen, zoals de manier waarop beelden op het scherm worden weergegeven en hoe er met geluid wordt omgegaan.	Beide	Vanuit het hoofdmenu in de geavanceerde modus

2. Aan de slag

De Compact 10 HD is correct voor u geplaatst wanneer het scherm naar boven en naar u toe is gericht, met het Optelec-logo onder het scherm.



2.1. De batterij opladen

De Compact 10 HD wordt geleverd met een voeding en vier landspecifieke stekkers in EU-, VS-, VK- en AU-formaat. Schuif de juiste stekker voor uw regio op de voeding totdat deze vastklikt.

De batterij moet worden opgeladen voor het eerste gebruik. Om de Compact 10 HD op te laden, sluit u de meegeleverde USB-kabel aan op de voeding en de blauwe USB-aansluiting aan de linkerkant van het apparaat. Steek het andere uiteinde van de voeding in een stopcontact.



Batterij vol



Batterij laadt op



Batterij bijna leeg

Het opladen van de Compact 10 HD duurt ongeveer 3,5 uur. Een volledig opgeladen Compact 10 HD heeft een batterijlevensduur tot 3,5 uur, afhankelijk van productinstellingen en gebruik. Gebruik om veiligheidsredenen alleen de voeding en USB-kabel die bij de Compact 10 HD zijn geleverd om de batterij van het apparaat op te laden.

Batterijwaarschuwing

De Compact 10 HD toont kort een waarschuwingspictogram voor lege batterijen om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen. Wanneer dit gebeurt, moet u het apparaat opladen. Als de batterij leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit.

Als de Compact 10 HD niet wordt ingeschakeld, controleer dan of deze is opgeladen.

2.2. In- en uitschakelen



Om de Compact 10 HD voor de eerste keer in te schakelen, moet het apparaat worden opgeladen. Houd na het opladen de oranje Aan/Uit-schakelaar drie seconden ingedrukt. Om de Compact 10 HD uit te schakelen, drukt u nogmaals drie seconden op de oranje knop. Als u de Compact 10 HD inschakelt, duurt het ongeveer 20 seconden voordat er beeld op het scherm verschijnt.

Stand-by



Druk kort op de oranje aan/uit-knop om Compact 10 HD in stand-bymodus te zetten. Compact 10 gaat automatisch in stand-bymodus als er gedurende een door de gebruiker ingestelde tijd geen knop wordt ingedrukt en geen beweging wordt waargenomen. Door kort op de aan/uit-knop te drukken wordt het apparaat weer ingeschakeld. U kunt de stand-bytijd wijzigen of uitschakelen in het Compact 10 HD menu. Zie hoofdstuk 5.4 voor meer informatie.

2.3. Het opvouwen en ontvouwen van de Compact 10 HD

Bij het ontvouwen van de Compact 10 HD wordt het scherm ingesteld op een ergonomische hoek voor lezen en de vergrootcamera wordt geactiveerd.

Volg deze stappen, om de Compact 10 HD te **openen**:

1. Plaats de Compact 10 HD voor u zodat het scherm naar boven wijst en het Optelec-logo zich onder het scherm bevindt.
2. Houd de Compact 10 HD rechtop. De vingers houden de voeten van de standaard vast terwijl de duimen de zijkant van de Compact 10 HD vasthouden.
3. Neem met de vingers de rand van de voeten van de standaard vast in de uitsparing aan de achterkant van het apparaat.

4. Vouw de voeten van de standaard open totdat ze op hun plaats klikken.

Volg deze stappen, om de Compact 10 HD **op te vouwen**:

1. Plaats de Compact 10 HD voor u zodat het scherm naar u toe is gericht.
2. Houd de Compact 10 HD aan de zijkanten vast en plaats uw vingers op de steunen tussen de voeten en het apparaat.
3. Druk de steunen van de voeten voorzichtig naar u toe zodat ze buigen.
4. Kantel het scherm naar beneden totdat het op zijn plaats klikt.

2.4. Het schoonhouden van de cameralens en de spiegel

Voor een optimaal beeld, is het aanbevolen er voor te zorgen dat de cameralens en de spiegel van het apparaat worden schoongehouden. Een vieze lens resulteert in een troebel beeld en kan ervoor zorgen dat de autofocus camera niet goed kan scherpstellen. Een schone spiegel is belangrijk om donkere en lichte vlekken te voorkomen en om een egaal verlicht beeld te krijgen. Om de cameralens en de spiegel te reinigen, gebruikt u het meegeleverde reinigingsdoekje of een andere zachte doek die geschikt is voor cameralenzen.

Let op: Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om de cameralens en spiegel te reinigen.



2.5. Knoppen en aansluitingen

De Compact 10 HD heeft de volgende knoppen en aansluitingen.



Aan / uit knop

Kort drukken op de oranje Aan / Uit-knop zet de Compact 10 HD in de slaapstand of hervat het apparaat. Een druk op deze knop van 6 seconden schakelt het apparaat uit of weer in.

Audio aansluiting

Gebruik de audio-aansluiting om een headset op de Compact 10 HD aan te sluiten.

USB-C aansluiting

Gebruik de USB-C-connector om de Compact 10 HD op te laden. De meegeleverde USB-kabel wordt aangesloten op deze USB-poort en op de voeding. Gebruik alleen de voeding die bij de Compact 10 HD wordt geleverd om het apparaat van stroom te voorzien en op te laden.

3. Camera's

De Compact 10 HD is uitgerust met drie camera's die elk een specifieke taak of situatie bedienen. Alle camera's kunnen gebruikt worden in de eenvoudige weergave en de geavanceerde weergave. Als het beeld op het scherm onscherp is, tik dan op het scherm om de camera opnieuw te focussen en scherp beeld te krijgen.

3.1. Camera voor Vergroting

De vergrotercamera wordt gebruikt wanneer de Compact 10 HD in de open positie staat met de standaard uitgevouwen. De vergrotercamera wordt gebruikt om op een bureau of tafel te lezen. De Compact 10 HD wordt bovenop het leesmateriaal geplaatst.

3.2. Camera voor Volledige pagina

De volledige pagina camera wordt gebruikt wanneer de uitklapbare camera arm wordt geopend. De volledige pagina camera kan worden gebruikt om foto's en objecten comfortabeler te bekijken, of om uw handtekening te plaatsen, zonder te worden beperkt in uw bewegingen.



Focus vergrendeling

De autofocus kan op een vaste afstand worden vergrendeld voor het schrijven, of bekijken van objecten. Gebruik het penpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm om de focus te vergrendelen of ontgrendelen.



Wanneer u de Compact 10 HD-speech bezit, wordt de volledige pagina camera ook gebruikt om documenten met een volledige pagina te scannen en lezen. Lijn de linkeronderhoek van het document uit met de indicator op de voet van de Compact 10 HD Speech om het document correct te positioneren.

3.3. Overzichtscamera

De overzichtscamera wordt gebruikt wanneer u de Compact 10 HD inschakelt terwijl de Compact 10 HD-standaard is gesloten. Om van de vergroter camera naar de overzichtscamera te gaan, sluit u de standaard en drukt u op de aan / uit-knop. De overzichtscamera is geoptimaliseerd om objecten op korte afstand te bekijken, zoals tijdschema's.



4. Tekst-naar-spraak en OCR

Als u in het bezit bent van een Compact 10 HD Speech, zal het nemen van een tekst-naar-spraak snapshot de spraakfunctionaliteit activeren. De Compact 10 HD Speech zal de tekst filteren uit een afbeelding en deze hardop voorlezen.



4.1 Spraak activeren

Om een tekst-naar-spraak snapshot te nemen en de spraak te activeren:

- Centreer de tekst of een deel van de tekst in de cameraweergave en druk op de tekst-naar-spraak snapshotknop. Wanneer u een tekst-naar-spraak snapshot maakt van een volledige pagina, gebruik dan de camera voor volledige pagina en zorg ervoor dat u de linkerbenedenhoek van het document uitlijnt met de blauwe indicator aan de rechterkant van de standaard van de Compact 10 HD Speech.
- Voor een optimaal resultaat, is omgevingslicht noodzakelijk. Voorkom schaduwen en beperk de tekst tot alleen dat wat u wilt lezen. Als de tekst in beeld te klein wordt, zal de herkenning minder accuraat zijn of mislukken.
- Er zal een voortgangsbalk getoond worden. De Compact 10 HD Speech zal beginnen met lezen nadat het herkenningsproces is afgerond.
- Gebruik de Play/Pauze knop om het lezen te starten of stoppen.

- Tik op de tekst en houd daarbij langdurig ingedrukt om het lezen te starten vanaf het aangewezen woord of de tekstsectie.
- Druk op de Modus knop om de gescande tekst te tonen in de geselecteerde ‘beeld’ modus, en om te schakelen tussen de geselecteerde hoog contrast varianten hiervan. Zie hoofdstuk 5.4 “Beeld” en “Kleuren” hoe u dit kunt instellen.
- Als er geen tekst is gevonden, wordt er een ‘Geen tekst gevonden’ bericht getoond.

4.2 Aanpassen van het volume en de leessnelheid

Om het volume of de leessnelheid aan te passen, activeer de knoppenbalk met een enkele tik. Tik op de Audio knop, om de “Volume” en “Snelheid” schuifbalken weer te geven. De “Volume” en “Snelheid” schuifbalken zijn enkel aanwezig in de snapshot weergave.

4.3 Aanpassen van taal en stem

Om de taal of stem aan te passen in de Eenvoudige weergave, druk de Audio knop en houd deze ingedrukt om naar het Stem menu te gaan. Om de taal of stem aan te passen in de Geavanceerde weergave, druk de “Menu” knop en druk vervolgens het “Stem” menu.

Zie hoofdstuk 5.3. “Stem”, voor meer informatie over hoe te navigeren in het “Stem” menu.

4.4 Tabel modus

De standaard lees modus leest kolommen, ideaal voor kranten en tijdschriften. Maar, soms zult u een menu, bonnetje, tabel, of andere tekst willen lezen die in een tabel staat.

Als u de tekst-naar-spraak snapshotknop even ingedrukt houdt, zal de Compact 10 HD Speech een tekst-naar-spraak snapshot maken en alle tekst in het snapshot per regel van links naar rechts lezen, en daarna pas de volgende regel lezen. Als u het snapshot verlaat en een nieuw snapshot neemt, zult u automatisch terug in de standaard lees modus komen.

5. Eenvoudige en geavanceerde weergave


Bij het eerste gebruik van het apparaat zal het starten in de Eenvoudige weergave. Om te schakelen tussen de Eenvoudige en Geavanceerde weergave, druk en houd de Modus knop, ingedrukt en tik op Eenvoudig of Geavanceerd.

In Eenvoudige weergave, heeft u toegang tot de algemene opties:


- Aanpassen van de vergroting
- Selecteren van een weergave modus
- Nemen van een snapshot (Compact 10 HD)
- Nemen van een tekst-naar-spraak snapshot (Compact 10 HD Speech)
- Schakelen tussen de vergroter- en overzichtscamera

In Geavanceerde weergave heeft u enkele aanvullende mogelijkheden:


- Tijd en datum
- Toegang tot het menu met de opties:
 - Opslaan en openen van snapshots
 - Veranderen van de taal en leesstem
 - Veranderen kleurweergave
 - Leeslijn inschakelen
 - Bluetooth audio en Miracast
 - Andere geavanceerde instellingen
 - Nemen van een tekst-naar-spraak snapshot (Compact 10 HD Speech)

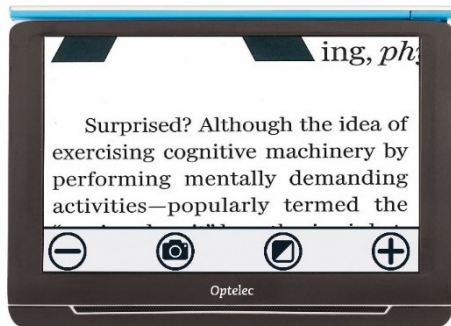


Compact 10 HD Eenvoudige weergave

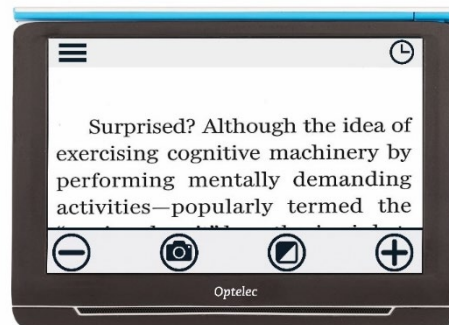

Compact 10 HD Geavanceerde weergave

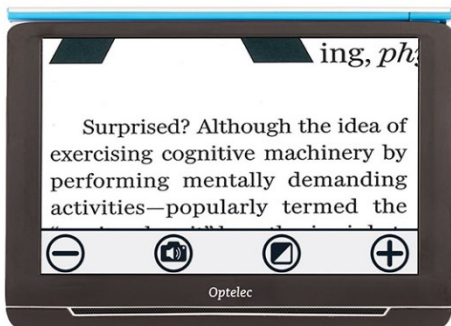

Compact 10 HD Speech Eenvoudige weergave

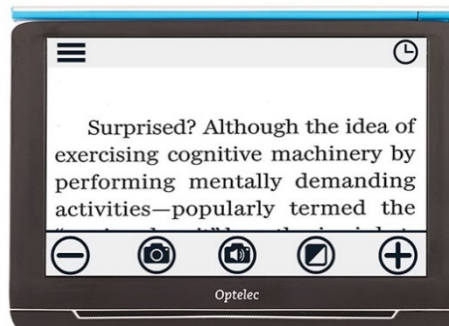

Compact 10 HD Speech Geavanceerde weergave

5.1. Eenvoudige weergave

Vergroting aanpassen



Tik op het scherm om de vergroting aan te passen. De knoppenbalk wordt onderaan of aan de rechterzijde van het scherm getoond, afhankelijk van de gekozen positie van de knoppenbalk. De positie van de knoppenbalk kan geselecteerd worden in het menu.



Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie. In de knoppenbalk tikt u op de “+” knop om te vergroten of de “-” knop om te verkleinen. U kunt ook het pinch-to-zoom gebaar (twee vingers naar elkaar, of van elkaar af bewegen) gebruiken om de vergroting aan te passen. Tik op het scherm om de knoppenbalk te verbergen.

De knoppenbalk zal automatisch verdwijnen wanneer het scherm tien seconden niet wordt aangeraakt.

Een leesmodus selecteren



Door op de “Modus” knop in het midden van de knoppenbalk te tikken, kunt u één van de volgende leesmodi kiezen

Foto: Bekijk foto's en tekst in ware kleur.

Negatief: Lezen in hoog-contrast, wit op zwart

Positief: Lezen in hoog-contrast, zwart op wit

Hoog-contrast **kleur 1**

Hoog-contrast **kleur 2**

Een snapshot maken van een afbeelding (Compact 10 HD)



Als u een Compact 10 HD heeft, drukt u op de snapshotknop om een snapshot (foto) te maken. U kunt de vergroting en kleurenweergave veranderen. Druk op de X in de rechterbovenhoek om de snapshot te sluiten en terug te keren naar live beelden.

Een tekst-naar-spraak snapshot maken (Compact 10 HD Speech)



Als u een Compact 10 HD Speech heeft, drukt u op de tekst-naar-spraak snapshotknop om een snapshot (foto) te maken en deze meteen voor te laten lezen. Gebruik de Play/Pauze knop om het voorlezen te starten of pauzeren. U kunt de vergroting, weergave, volume, voorleessnelheid, en voorleesstem veranderen in het snapshot.

Druk op de X in de rechterbovenhoek om de snapshot te sluiten en terug te keren naar live beelden. In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie over het gebruiken van tekst-naar-spraak.

Contrast aanpassen

Als tekens of andere elementen op het scherm niet duidelijk zichtbaar zijn in de hoog contrast kleurmodus die u hebt geselecteerd, kunt u het beeld verbeteren en de scherpte vergroten. Om het contrast aan te passen, houdt u het aanraakscherm met drie vingers ongeveer drie seconden ingedrukt en er verschijnt een schuifregelaar. Schuif naar links of rechts om het contrast aan te passen. Druk op de resetknop om terug te gaan naar de standaardinstelling. Tik ergens op het scherm om af te sluiten.

5.2. Geavanceerde weergave

In de geavanceerde weergave zijn dezelfde functies beschikbaar als in de eenvoudige weergave, plus een aantal extra functies.

Tijd en datum

Om de klok te openen, tik op het scherm, en tik op het “klok” icoon in de rechterbovenhoek van het scherm. Om de datum en tijd in te stellen, tik op de tijd of datum om een waarde te wijzigen. Tik binnen het veld dat u wilt wijzigen op het omhoog of omlaag symbool, om de waarde te wijzigen. Tik op het “pijl terug” symbool om het Tijd en datum instellen venster te verlaten.

Een snapshot maken van een afbeelding (Compact 10 HD Speech)




Als u een Compact 10 HD Speech heeft en een snapshot wilt maken van een afbeelding zonder tekst-naar-spraak te gebruiken, drukt u op de snapshotknop. U kunt de vergroting en kleurenweergave veranderen. Druk op de X in de rechterbovenhoek om de snapshot te sluiten en terug te keren naar live beelden.

5.3 Het menu

Het menu activeren en verlaten

Om het menu te openen, tik op het scherm, en tik het “Menu” icoon aan de linkerkzijde van het scherm. Dit opent het hoofd menu. Om het menu te sluiten, tik op het “pijl terug” symbool.

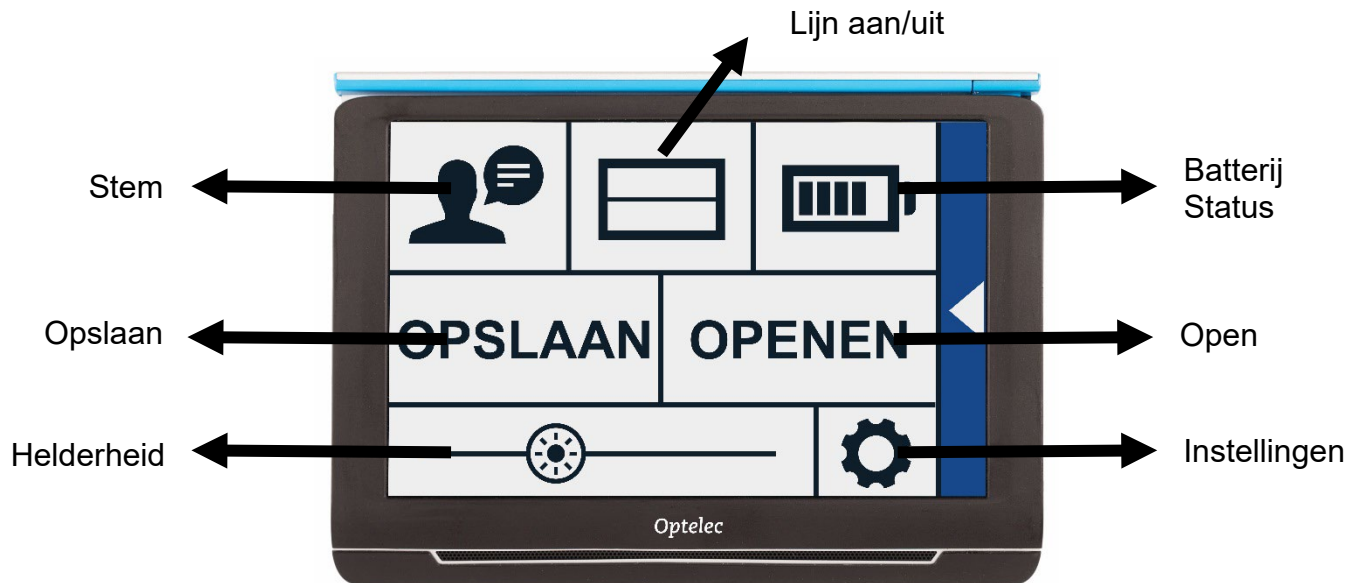

De onderdelen in het menu verschillen afhankelijk van of u een Compact 10 HD or 10 HD Speech bezit. Om een knop te activeren, tik eenmaal op de knop. Het activeren van een knop opent een nieuw menu venster of lijst. Om terug te keren naar het hoofdmenu, tik op het “pijl terug” symbool. Om de schuifbalk aan te passen tik op de schuifbalk knop, en houd deze ingedrukt, tijden het verplaatsen naar rechts of links.

Het hoofdmenu bevat de volgende opties:

- Stem (enkel Compact 10 HD Speech)
- Lijn aan/uit
- Batterij status
- Opslaan
- Openen
- Helderheid schuifbalk
- Instellingen



Stem (Compact 10 HD Speech)

Om een stem, taal of menutaal te selecteren of om een stem of taal toe te voegen of te verwijderen, open het hoofdmenu en tik op de “Stem” knop.

Selecteren van een stem, taal en menutaal

Hier kunt u de leesstem en taal selecteren. Om een andere leesstem te selecteren, tik op het stem icoon in de rechter bovenhoek van het hoofdmenu voor de lijst met voorgeselecteerde stemmen. Elke stem representeert tevens een taal. Tik op een stem om deze te selecteren. Als dit resulteert in een verandering van taal dan verandert het menu automatisch in dezelfde taal.

Toevoegen of verwijderen van een stem of taal

Om een stem of taal toe te voegen of te verwijderen tikt u op het stemicoon in de rechter bovenhoek van het hoofdmenu. In de lijst met voorgeselecteerde stemmen tikt u op de “Wijzigen” knop. Om een leesstem toe te voegen of te verwijderen, selecteert u de taal in de lijst door op de taal te tikken. Dit toont een lijst met beschikbare stemmen voor de geselecteerde taal. Om een taal toe te voegen, selecteer deze door erop te tikken. Een vinkje voor de stem indiceert of de stem is toegevoegd. Als de stem is toegevoegd zal deze beschikbaar zijn onder de stem knop in het hoofdmenu. Door een stem te deselecteren zal deze verwijderd worden uit de beschikbare leesstemmen. De talen waaruit lees stemmen zijn geselecteerd zullen bovenaan de lijst met talen worden weergegeven en zijn gemarkeerd met een vinkje.

Aanpassen van taal en stem in de Eenvoudige weergave

In Eenvoudige weergave kunt u het menu niet benaderen. Om de taal of stem aan te passen in Eenvoudige weergave druk de “Audio” knop, en houd deze ingedrukt, om direct naar het Stem menu te gaan en volg de stappen hierboven.

Lijn aan/uit

De Compact 10 HD kan een leeslijn weergeven om u te helpen de Compact 10 HD recht op het document te positioneren. Om de leeslijn in te stellen, tik op de “Lijn” knop. Tik nogmaals op de knop, om de leeslijn te verbergen.

Batterijstatus

De batterijstatus wordt getoond in de rechter bovenhoek van het scherm. Tikt u op het batterij icoon dan wordt een nieuw scherm geopend met een vergroot batterijsymbool met de batterijstatus, een “Over” knop en een “pijl terug” symbool. Het “bliksem” symbool indiceert dat de batterij bezig is met opladen.

Over

Tik op de “Over” knop in het batterienscherm om de versie van het apparaat te zien.

Opslaan

Deze optie is alleen beschikbaar in de geavanceerde weergave.

Om een snapshot op te slaan open het menu en tik op de “Opslaan” knop.

- Maak een snapshot, zie het gebruik van de snapshotfunctie
- Open het menu.
- Tik op de “Opslaan” knop om de snapshot op te slaan.

Als er geen snapshot is om op te slaan wordt de “Opslaan” knop verborgen.

Openen

Om een snapshot te openen, open het menu en tikt op de “Openen” knop. Een lijst met miniatuur voorbeelden van de opgeslagen snapshots wordt getoond, met de meest recente bovenaan.

Wanneer er meer snapshots zijn dan er in beeld passen, veegt u omhoog en omlaag om door de lijst te navigeren. Tik op het miniatuur voorbeeld van de snapshot om het te openen.

Verwijderen

Om een snapshot te verwijderen, open het menu en tik op de “Openen” knop. In het open scherm tikt u op de “Verwijderen” knop. Een lijst met miniatuur voorbeelden van de opgeslagen snapshots wordt getoond, met de meest recent opgeslagen snapshots bovenaan. Elk snapshot heeft een vinkvakje in de rechter bovenhoek. Om een snapshot te selecteren vinkt u het vinkvakje aan. Tik op de “Verwijderen” knop om de geselecteerde snapshot te verwijderen. Om alle snapshots te verwijderen, tikt u op de “Verwijderen” knop zonder een snapshot te selecteren. U dient te bevestigen dat u alle snapshots wilt verwijderen door op “Ja” te tikken. Om af te zien van het

verwijderen van alle snapshots tikt u op “Nee”. Na beide opties keert u terug naar de lijst van snapshots. Tik op het “pijl terug” symbool om terug te keren naar het “Openen” scherm. Tik opnieuw op het “pijl terug” symbool om terug te keren naar het hoofdmenu.

Aanpassen van helderheid


Gebruik de schuifbalk met het “zon” symbool om de helderheid van het scherm aan te passen.

5.4 Instellingen

Tik op de “Instellingen” knop, om het Instellingen menu. te activeren. De “Instellingen knop is de knop met het gereedschaps symbool aan de rechter onderkant.

Het Instellingen menu bevat de volgende knoppen:

- Kleuren
- Beeld (enkel Compact 10 HD Speech)
- Miracast
- Bluetooth (enkel Compact 10 HD Speech)
- Lijn
- Knoppen
- Thema

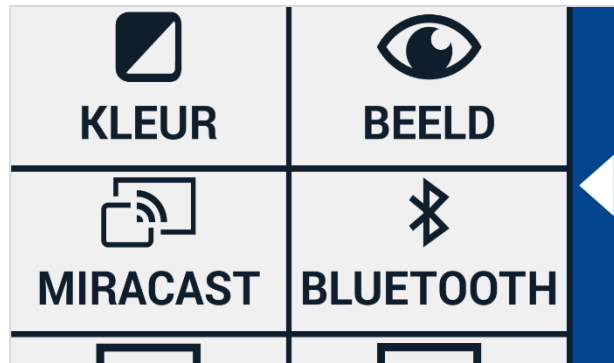


Instellingen menu

- Kolommen (enkel Compact 10 HD Speech)
- Verlichting
- Geluid
- Standby
- Taal (enkel Compact 10 HD)
- Herstel

Kleuren

In het instellingen menu, tik op de “Kleuren” knop om de gewenste hoog-contrast kleuren te selecteren.

De Compact 10 HD ondersteunt vier hoog-contrast modi. Voor elk van deze vier modi, kunnen de voor- en achtergrondkleur geselecteerd worden. Drie van de hoog-contrast modi kunnen uitgeschakeld worden. De eerste hoog-contrast modus in de linkerbovenhoek is vereist.

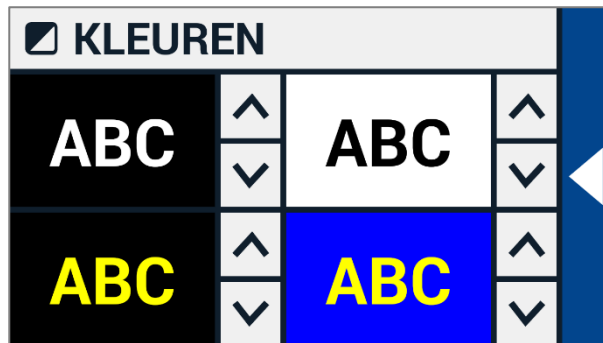

Om de voor- en achtergrondkleuren te wijzigen tikt u op de pijl omhoog of pijl omlaag naast de modus die u wilt aanpassen. U tikt door de verschillende hoog-contrast modi heen en stopt bij de modus die uw voorkeur heeft. Selecteer het “X” symbool om een hoog-contrast modus uit te schakelen. Tik op het “pijl terug” symbool om terug te keren naar het instellingen menu.




Beeld (enkel Compact 10 HD Speech)

In het Instellingen menu, tik op de “Beeld” knop om in te stellen hoe u wilt dat gescande tekst wordt voorgelezen met tekst-naar-spraak.

Om in te stellen hoe alle gescande tekst wordt getoond, drukt u op de Modus knop om te rouleren door de verschillende weergaven: Origineel, Lijn en Kolom.

Om in te stellen hoe het woord wordt getoond dat wordt voorgelezen, drukt u op de Markering knop om te rouleren door de verschillende accentueringen: Vierkant en Onderlijnd. Wanneer u tekst-naar-spraak gebruikt tikt u op de Modus knop in de knoppenbalk om de gescande tekst in de door u gekozen weergave te zien en om door de ingestelde hoog-contrast modi te rouleren.

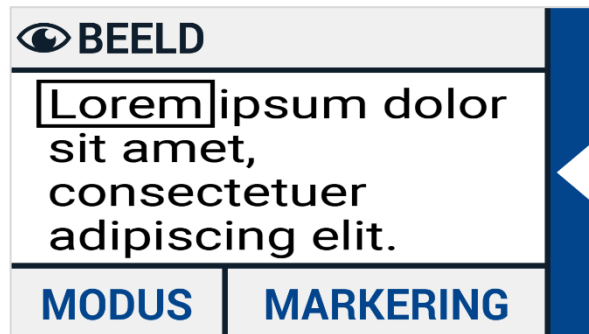

Miracast: draadloos verbinden met een monitor of tv

Miracast is een standaard voor een draadloze verbinding met een monitor. Het kan omschreven worden als "HDMI over Wi-Fi", wat de kabel van de 10 HD naar de monitor of TV vervangt. Om gebruik te kunnen maken van de Miracast functie van de Compact 10 HD, moet uw monitor of TV

Miracast ondersteunen. Zie de handleiding van de monitor of TV om na te gaan of het apparaat de Miracast functie ondersteunt.

Om uw Compact 10 HD te verbinden met een monitor of TV via Miracast, tik op de “Miracast” knop en schakel Miracast in. Een lijst met beschikbare apparaten wordt getoond. Tik op de naam van een apparaat om ermee te verbinden. Het kan tot een minuut duren om de verbinding tot stand te brengen. Tik nogmaals op de naam van het apparaat om de verbinding te verbreken. Als een Miracast verbinding tot stand is gebracht zullen zowel audio als video gestreamd worden naar de TV of monitor. Om gegarandeerd te zijn van een goede verbinding moet de Compact 10 HD zich bevinden in een radius van 1 meter van de monitor of TV. Afhankelijk van de verbinding kan een kleine vertraging van de video en/of audio plaatsvinden.



Bluetooth (enkel Compact 10 HD Speech)

Om een Bluetooth luidspreker of hoofdtelefoon te koppelen tik op de “Bluetooth” knop en schakel Bluetooth in.

Een lijst met gekoppelde apparaten wordt getoond. Als er geen luidspreker of hoofdtelefoon is aangesloten, tikt u op de “Zoeken” knop om naar beschikbare apparaten te zoeken. Voor de Bluetooth zoekopdracht moet u er voor zorgen dat de luidspreker of hoofdtelefoon aan staat en vindbaar is. Zie de handleiding van het apparaat om na te gaan hoe het apparaat vindbaar voor Bluetooth wordt. Om de luidspreker of hoofdtelefoon te koppelen, tik op de naam van het apparaat en voer zo nodig de pincode in. Zie de handleiding van de luidspreker of hoofdtelefoon voor de pin- code.

Als het apparaat gekoppeld is, tikt u op de naam van de luidspreker of hoofdtelefoon om de verbinding tot stand te brengen.

U wordt gevraagd, met het apparaat te verbinden of het te vergeten. Tik op de “Verbinden” knop om de verbinding tot stand te brengen.

Om te indiceren dat een apparaat beschikbaar is, is het aangevinkt en wordt het in blauw weergegeven.

Om een apparaat te ontkoppelen / te vergeten, tik op de “Vergeten” knop. Het apparaat wordt verwijderd uit de lijst met gekoppelde apparaten.

Let op: Alleen Bluetooth luidsprekers of hoofdtelefoons versie 4.0 of hoger worden ondersteund.

Lijn

Dit menu onderdeel stelt u in staat de positie van de leeslijn te veranderen in een van deze zes posities: horizontaal boven, horizontaal midden, horizontaal onder, verticaal links, verticaal midden, verticaal rechts. Standaard is de leeslijn ingesteld horizontaal midden op het scherm.

Knoppen

Dit menu onderdeel stelt u in staat de knoppenbalk positie te veranderen in een van twee posities: Onder of Zijde. Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u de positie van de knoppenbalk veranderen naar de onderkant of zijkant van het scherm. De standaard instelling is “Onder”.

Thema

Dit menu onderdeel stelt u in staat een licht of donker thema te selecteren voor de knoppen en menu's.



Kolommen (enkel Compact 10 HD Speech)

Dit menu onderdeel stelt u in staat te kiezen of u de Compact 10 HD Speech enkel complete kolommen of ook incomplete kolommen wilt laten lezen. Standaard is Lees enkel complete kolommen geselecteerd. Houd er rekening mee dat wanneer u Lees incomplete Kolommen selecteert, mogelijk niet alle karakters en woorden volledig gevangen worden, wat kan resulteren in foutieve tekst.

Verlichting

Dit menu onderdeel stelt u in staat de verlichting in de vergroter- en overzichtsweergave in of uit te schakelen. De vergroter/leesverlichting bevindt zich links en rechts van de vergroter camera. Standaard is de leesverlichting ingeschakeld voor een optimale beeldkwaliteit. De overzichtsverlichting bevindt zich naast de overzichtscamera. Standaard is de overzichtsverlichting uitgeschakeld.

Geluid

Dit menu onderdeel stelt u in staat om het volume aan te passen en de audio- en vibratie feedback in of uit te schakelen. Standaard is geluid ingeschakeld en vibratie uitgeschakeld.

Standby

In dit menuonderdeel kunt u de standbytijd aanpassen. De standbytijd stelt de tijd in na welke tijd de Compact 10 HD in de standbymodus gaat om de batterij te sparen. Het indrukken van een willekeurige knop brengt het apparaat uit de standbymodus. Standaard is de standbytijd ingesteld op vijf minuten waarin geen knop wordt ingedrukt of beweging wordt waargenomen.

Taal (enkel Compact 10 HD)

In dit menuonderdeel kunt u de taal van de Compact 10 HD kiezen. Tik, om de voorkeurs menu taal te selecteren.

Fabrieksinstellingen herstellen

In dit menu onderdeel kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. U wordt dan gevraagd de keuze te bevestigen. Door “Ja” bevestigt u de keuze en “Nee” annuleert de keuze.

6. Documenten overzetten naar de PC

Om snapshots en documenten naar een PC over te zetten heeft u een Windows 10 PC en de bijgeleverde USB kabel nodig en volgt u onderstaande stappen:

1. Zet de Compact 10 HD en de PC aan.
2. Verbind de Compact 10 HD met de Windows 10 PC met de bijgeleverde USB kabel. De Compact 10 HD zal kort een “Verbonden met PC” icoon tonen.
3. Als u de Compact 10 HD voor het eerst verbindt zal het Windows wat tijd kosten om het apparaat goed op te zetten.
4. Afhankelijk van uw Windows 10 instellingen, zal Windows Explorer het “CP10” apparaat openen en een map met intern gedeelde opslag laten zien.
5. Als Windows 10 niet automatisch het Compact 10 HD apparaat toont, open dan Windows Explorer en selecteer “CP10”.
6. Klik op ‘Intern Gedeelde Opslag’ en klik op de map “DCIM”.
7. In de “DCIM” map staan mappen met de tijd en datum wanneer de snapshots zijn genomen. Elke map bevat het gemaakte snapshot, en als u een Compact 10 HD Speech heeft ook een .txt document met de gescande tekst. Daarnaast bevat de map 2 systeem bestanden, een JSON en een Processed Picture bestand.
8. Kopiëer en plak de bestanden naar uw PC

Compact 10 HD

Compact 10 HD Speech

Fonctionnalités et fonctions avancées



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.nl

1. Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre Compact 10 HD ou Compact 10 HD Speech!

Avec son
ou les bureaux d'Optelec en vous référant à la dernière page de ce manuel. Vos commentaires sont grandement appréciés. Nous espérons que vous aimerez travailler avec votre Compact 10 HD!

1.1 À propos de ce manuel

Chez Optelec, nous travaillons grand écran de 10 pouces, ses fonctionnalités personnalisables et son fonctionnement intuitif, le Compact 10 HD offre tous les avantages d'un téléagrandisseur de bureau, mais dans un design beaucoup plus petit, pliable et portable. Une fois le bras déployé, vous pouvez facilement regarder des photos, signer votre nom, visualiser l'emballage de médicaments et même lire des boîtes de conserves, sans être limité dans vos mouvements. Avec le Compact 10 HD Speech, le bras pivotant vous permet de numériser et de lire des pages complètes de texte.

Si vous avez des questions ou des suggestions à propos de ce produit ou de son utilisation, veuillez contacter votre distributeur constamment à améliorer nos produits et leurs fonctions. Il est donc possible que ce manuel ne soit pas la plus récente édition. Veuillez télécharger la plus récente édition du manuel sur notre site www.optelec.com dans la section Support.



Ce manuel sert à vous familiariser avec les fonctions et les opérations de base du Compact 10 HD et Compact 10 HD Speech. Veuillez prendre le temps de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil. Sauf indication contraire, toutes les références au Compact 10 HD s'appliquent aussi au Compact 10 HD Speech. Les fonctions s'appliquant uniquement au Compact 10 HD Speech sont marquées du logo suivant.

1.2. Contenu du paquet

L'emballage du Compact 10 HD contient les éléments suivants :

- Loupe électronique Compact 10 HD ou Compact 10 HD Speech
- Une pochette de protection
- Un câble d'alimentation USB de type USB-C
- 4 prises d'alimentation spécifiques (UE, États-Unis, Royaume-Uni et AU)
- Un chiffon de nettoyage d'écran
- Configuration et utilisation
- Sécurité et entretien

S'il vous manque l'un ou plusieurs de ces éléments, veuillez en informer votre distributeur.

1.3. Que trouve - t-on sur l'écran?

Des icônes sont utilisées sur l'écran tactile du Compact 10 pour représenter la fonctionnalité du produit. Utilisez cette section comme outil de référence pour mieux comprendre les graphiques à l'écran.

Certains graphiques n'apparaissent que si vous possédez un Compact 10 Speech. Le tableau ci-dessous précise quelles fonctions sont disponibles en version Speech uniquement. De plus, une icône bleue dans la documentation indique uniquement la version Speech.




Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Diminuer le grossissement de l'image sur l'écran.	Avec les deux versions	Mode facile et mode avancé
	Prendre un instantané d'une image sans utiliser la synthèse vocale.	Avec les deux versions	Mode facile et mode avancé
	Prendre un instantané, numériser le texte et le lire.	RUBY Speech uniquement	Mode Avancé

Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Modifier la combinaison de couleurs utilisée pour afficher la vue en direct.	Avec les deux versions	Mode facile et mode avancé
	Augmenter le grossissement de l'image sur l'écran.	Avec les deux versions	Mode facile et mode avancé
	Ouvrir le menu principal, où vous pouvez modifier les paramètres du système.	Avec les deux versions	Mode Avancé
	Affiche l'heure et la date actuelles.	Avec les deux versions	Mode Avancé
	Régler le verrouillage de la mise au point afin de pouvoir maintenir la mise au point sur un élément pendant qu'un autre se déplace dans le cadre de la caméra.	Avec les deux versions	La caméra pleine page en mode facile et avancé

Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Appuyez pour ouvrir le menu du volume et de la vitesse de lecture. Appuyez longuement pour sélectionner une voix.	RUBY Speech uniquement	Après avoir capturé du texte- pour -la lecture en modes Facile et Avancé
	Fermer l'instantané.	Avec les deux versions	Après avoir capturé un instantané en modes Facile et Avancé
	Régler le volume.	RUBY Speech uniquement	Après avoir ouvert le menu de volume et de lecture dans les modes Facile et Avancé

Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Ajustez la vitesse de lecture.	RUBY Speech uniquement	Après avoir ouvert le menu de volume et de lecture dans les modes Facile et Avancé
	Lire ou suspendre la lecture.	RUBY Speech uniquement	Après la synthèse vocale
	Taper pour changer les modes d'affichage. Appuyez longuement pour basculer entre les modes de facile et avancé.	Avec les deux versions	Mode facile et mode avancé
	Ajoutez, supprimez et sélectionnez votre voix et votre langue de lecture ainsi que la voix et la langue de votre menu.	RUBY Speech uniquement	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé

Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Détermine si la surbrillance, le soulignement ou les cases sont utilisés pour afficher l'emplacement actuel dans le texte capturé.	RUBY Speech uniquement	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé
	Utilisez Miracast pour vous connecter à un téléviseur ou un moniteur via Wi-Fi.	Avec les deux versions	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé
	Utilisez le Bluetooth pour vous connecter à un haut-parleur ou à un casque via Wi-Fi.	RUBY Speech uniquement	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé

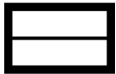Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Choisissez d'afficher ou non une ligne de lecture sur l'écran.	Avec les deux versions	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé
	Changez la position de la barre de boutons.	Avec les deux versions	Lors de la modification des paramètres de menu en mode avancé
	Affiche l'état de la batterie. Un symbole lumineux indique que la batterie est en charge.	Avec les deux versions	Depuis le menu principal en mode avancé
	Curseur de luminosité.	Avec les deux versions	Depuis le menu principal en mode avancé

Icône	Description	Les deux versions ou en Speech uniquement	Occurrence
	Affichez un menu dans lequel vous modifiez les paramètres, notamment l'apparence des images à l'écran et la gestion du son.	Avec les deux versions	Depuis le menu principal en mode avancé

2. Pour débiter

Le Compact 10 HD est correctement placé devant vous lorsque l'écran est dirigé vers le haut et vers vous, avec le logo Optelec sous l'écran.

2.1. Charger la batterie

La vidéoloupe Compact 10 HD est livrée avec un câble d'alimentation et quatre types de fiches d'alimentation des régions suivantes : UE, États-Unis, Royaume-Uni et AU. Faites glisser la fiche appropriée pour votre région sur l'alimentation électrique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

La batterie doit être chargée avant la première utilisation. Pour charger le Compact 10 HD, connectez le câble USB fourni à l'alimentation et au connecteur USB bleu situé sur le côté gauche de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du bloc d'alimentation dans une prise de courant.



*Batterie pleine**Batterie en chargement**Batterie presque vide*

Le chargement de la batterie du Compact 10 HD prend environ 3,5 heures. Un Compact 10 HD entièrement chargé a jusqu'à 3,5 heures d'autonomie, selon les paramètres du produit et son utilisation. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement le bloc d'alimentation et le câble USB fournis avec la loupe électronique Compact 10 HD pour charger la batterie de l'appareil.

Alerte de charge de batterie

Le Compact 10 HD affichera brièvement une icône d'avertissement de batterie vide pour indiquer que la batterie doit être chargée. Lorsque cela se produit, assurez-vous de charger votre appareil. Lorsque la batterie se décharge complètement, l'appareil s'éteint automatiquement.

Si le Compact 10 HD ne s'allume pas, assurez-vous de charger la batterie.

2.2. Allumer et éteindre



Pour allumer le Compact 10 HD pour la première fois, l'appareil doit être chargé. Une fois chargé, maintenez enfoncé le bouton orange Marche/Arrêt pendant trois secondes. Pour éteindre le Compact 10 HD, appuyez à nouveau sur le bouton orange pendant trois secondes. Quand vous allumez le Compact 10 HD, il faudra environ 20 secondes avant qu'une image ne s'affiche à l'écran.

Mise en veille



Appuyez brièvement sur le bouton orange Marche/Arrêt pour mettre le Compact 10 HD en mode veille. Le Compact 10 passe automatiquement en mode veille l'appareil n'est pas utilisé pendant une période définie par l'utilisateur. Un appui bref sur le bouton Marche/Arrêt pour désactiver le mode veille. Vous pouvez modifier ou désactiver le temps de veille dans le menu du Compact 10 HD. Reportez-vous au chapitre 5.4 pour plus d'informations.

2.3. Plier et déplier le Compact 10 HD

Lors du dépliage du Compact 10 HD, l'écran sera réglé sur un angle ergonomique pour la lecture et la caméra pour le grossissement sera activée.

Pour **ouvrir** le Compact 10 HD, procédez comme suit:

1. Placez le Compact 10 HD devant vous de sorte que l'écran soit orienté vers le haut et que le logo Optelec se trouve sous l'écran.
2. Saisissez et maintenez le Compact 10 HD en position verticale. Vos doigts tiennent les pieds du support tandis que vos pouces tiennent le côté du Compact 10 HD.
3. Avec vos doigts, saisissez le bord des pieds du support dans le renforcement situé à l'arrière de l'appareil.
4. Dépliez les pieds du support jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Pour **fermer** le Compact 10 HD, procédez comme suit:

1. Placez le Compact 10 HD devant vous afin que l'écran soit face à vous.
2. Tenez le Compact 10 HD sur les côtés et placez vos doigts sur les supports situés entre les pieds et l'appareil.
3. Appuyez doucement sur les supports des pieds vers vous pour qu'ils se plient.
4. Inclinez l'écran vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2.4. Nettoyer la fenêtre de la caméra

Pour une qualité d'image optimale, il est recommandé de maintenir la lentille de la caméra et la fenêtre de lumière d'objet propres. De la saleté sur la fenêtre de la caméra peut créer une image floue et empêcher la mise au point automatique de fonctionner correctement. Utiliser le chiffon fourni ou un autre tissu doux pour nettoyer la fenêtre de la caméra.

Note: Ne pas utiliser d'eau ou d'agent nettoyant pour nettoyer la fenêtre de la caméra.



2.5. Les boutons

Le Compact 10 HD est doté des boutons et des connexions suivants sur le côté gauche du produit:



Bouton On / Off

Une brève pression sur le bouton orange On / Off mettra le Compact 10 HD en mode veille ou remettra l'appareil en marche. Une pression de 6 secondes sur cette touche éteint ou rallume l'appareil.

Prise audio

Utilisez la prise audio pour connecter un casque au Compact 10 HD.

Connecteur USB-C

Utilisez le connecteur USB-C pour charger le Compact 10 HD. Le câble USB fourni se connecte au port USB et à un bloc d'alimentation. Utilisez uniquement ce bloc d'alimentation fournie avec le Compact 10 HD pour alimenter et charger l'appareil.

3. Caméras

Le Compact 10 HD est équipé de trois caméras, chacune servant à une tâche ou une situation spécifique. Toutes les caméras peuvent être utilisées en Mode Standard et en Mode Avancé. Si l'image à l'écran semble floue, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point de la caméra et obtenir une image nette.

3.1. Caméra de grossissement

La caméra de grossissement est utilisée lorsque le Compact 10 HD est en position ouverte avec le support déplié. Cette caméra est utilisée pour lire sur un bureau ou une table. Le Compact 10 HD est placé sur le support de lecture.

3.2. Caméra pleine page

La caméra pleine page est utilisée lorsque le bras pivotant de cette caméra est ouvert. La caméra pleine page peut être utilisée pour visualiser plus confortablement des photos et des objets, ou pour signer votre nom, sans être restreint dans vos mouvements.



Verrouillage de la mise au point

La mise au point automatique peut être verrouillée pour écrire ou visualiser des objets à une distance fixe. Utilisez l'icône du stylo dans le coin supérieur droit de l'écran pour verrouiller ou déverrouiller la mise au point.



Si vous possédez un Compact 10 HD Speech, la caméra pleine page est également utilisée pour numériser et lire des documents d'une page complète. Placez le document que vous souhaitez lire sous la caméra, en alignant le coin inférieur gauche du document sur le repère bleu situé à droite de la base du Compact 10 HD Speech.

3.3. Caméra vue d'ensemble

La caméra vue d'ensemble est en fonction lors de la mise sous tension du Compact 10 HD alors que le support Compact 10 HD est fermé. Pour passer de la caméra de grossissement à la caméra vue d'ensemble, fermez le support et appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. La caméra vue d'ensemble est optimisée pour regarder des objets à une courte distance, tels que des horaires.



4. Utiliser les fonctions texte-à-parole et OCR

Si vous possédez un Compact 10 HD Speech, vous pouvez prendre une photo incluant la synthèse vocale. Le Compact 10 HD Speech extraira le texte dans l'image et le lira à haute voix.



4.1 Activer le speech

Pour prendre une capture instantanée avec synthèse vocale et activer Speech:

- Positionnez le texte ou une partie du texte sous la caméra et appuyez sur le bouton photo avec synthèse vocale. Lorsque vous prenez une photo avec synthèse vocale d'une page entière, utilisez la caméra dédiée à une page complète et veillez à aligner le coin inférieur gauche du document sur le point bleu situé à droite du socle du Compact 10 HD Speech. Assurez-vous que le document est suffisamment éclairé et limitez la photo au texte que vous désirez lire. Si le texte est trop petit, la reconnaissance sera moins précise.
- Une barre de progrès apparaîtra. Le Compact 10 HD Speech débutera la lecture dès le processus de reconnaissance terminé.
- Utilisez le bouton Lecture/Pause pour lancer ou arrêter la lecture.
- Touchez et maintenez l'appuie (appuie longue) pour commencer à lire le mot ou la section de texte que vous pointez.
- Appuyez sur le bouton «Mode» pour afficher le texte capturé dans le mode de visualisation sélectionné et parcourez les couleurs de contraste élevé sélectionnées pour ce mode de

visualisation. Veuillez vous reporter au chapitre 5.4, Affichage et au chapitre 5.4 Couleur pour plus d'informations sur la configuration du mode de visualisation et des couleurs à contraste élevé.

- Le message “Aucun texte détecté” apparaîtra si aucun texte n’est trouvé.

4.2 Réglage du volume et de la vitesse de lecture

Pour régler le volume ou la vitesse de lecture, activez la barre de boutons en appuyant simplement sur une touche. Appuyez sur le bouton Audio pour afficher les curseurs « Volume » et « Vitesse ». Les curseurs « Volume » et « Vitesse » ne sont présents que dans la vue photos.

4.3 Ajuster la langue et la voix

Pour régler la langue ou la voix en mode standard, maintenez le bouton Audio enfoncé pour accéder au menu Voix. Pour régler la langue ou la voix en mode avancé, appuyez sur le bouton “Menu” puis sur le menu « Voix ». Veuillez-vous reporter au Chapitre 5.3., Voix, pour plus d’informations sur la navigation dans le menu « Voix ».

4.4 Mode tableau

Le mode de lecture normal lit les colonnes, idéal pour les journaux et les magazines. Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez lire un menu, un reçu, un tableau ou un autre texte présentant une présentation semblable à celle d'un tableau. En appuyant sur le bouton photo avec synthèse vocale et en le maintenant enfoncé, le Compact 10 HD Speech prend une

capture instantanée avec synthèse vocale et lit tout le texte capturé par ligne de gauche à droite, puis passe à la ligne suivante. Lorsque vous quittez la capture d'écran et que vous prenez une autre capture d'écran, vous revenez automatiquement au mode de lecture normal.

5. Mode Standard et Mode Avancé

Pour basculer entre les modes standard et Avancé, maintenez le bouton Mode enfoncé et appuyez sur standard ou Avancé.


En mode standard, vous avez accès aux fonctionnalités principales :

- Ajuster le grossissement
- Sélection d'un mode de visualisation
- Prendre une photo d'une image (Compact 10 HD)
- Prendre une photo et utiliser la synthèse vocale (Compact 10 HD Speech)
- Basculement entre le grossissement et la vue d'ensemble de la caméra


En mode avancé, vous disposez également des fonctionnalités supplémentaires :

- Heure et date
- Accès au menu avec les options pour :
 - Enregistrer et ouvrir des instantanés
 - Changer la langue et la voix
 - Changer les modes de couleur


- Activer la ligne-guide de lecture
- Audio Bluetooth et Miracast
- Autres paramètres avancés
- Prendre une photo d'une image (Compact 10 HD)

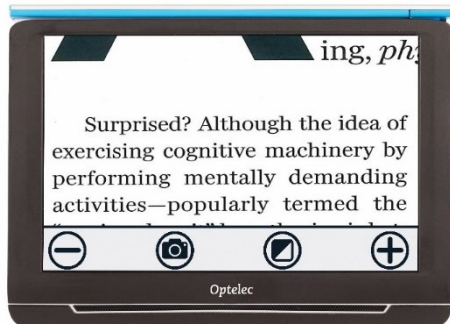


Compact 10 HD Mode Standard

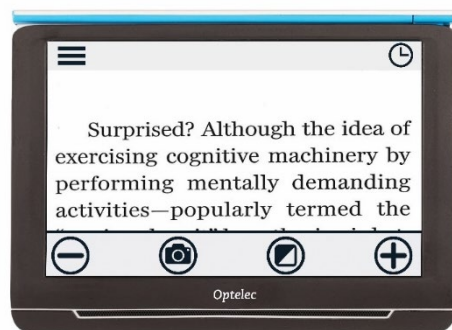

Compact 10 HD Mode Avancé

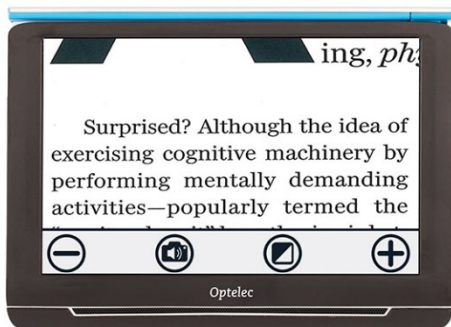

Compact 10 HD Speech Mode Standard

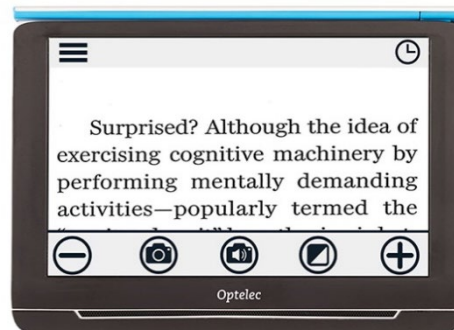

Compact 10 HD Speech Mode Avancé

5.1. Mode Standard

Ajuster le grossissement



Pour modifier le grossissement, il suffit de taper doucement sur l'écran. Ceci fera apparaître la barre de boutons au bas de l'écran ou sur le côté droit. La position de la barre de boutons peut être sélectionnée dans le menu. Voir le chapitre 5 pour plus d'information à ce sujet. Sur la barre de bouton, appuyez soit sur + pour augmenter, ou sur – pour diminuer le grossissement. Vous pouvez également utiliser le geste Pincer pour modifier l'agrandissement. Tapez de nouveau sur l'écran pour cacher la barre de boutons. La barre de boutons disparaîtra d'elle-même après 10 secondes d'inactivité.



Choisir un mode de visualisation



Appuyez sur le bouton Mode au milieu de la barre de boutons pour sélectionner un mode de visualisation parmi les suivants:

Mode Photo: Photos et textes en pleine couleur

Mode Négatif: Mode lecture à contraste élevé, blanc sur noir

Mode Positif: Mode lecture à contraste élevé, noir sur blanc

Combinaison de couleurs 1 Contraste élevé

Combinaison de couleurs 2 Contraste élevé

Prendre une photo (Compact 10 HD)



Si vous possédez un Compact 10 HD, appuyez sur le bouton Photo pour prendre une photo. Vous pouvez régler le grossissement et le mode de visualisation de la photo. Appuyez sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer l'option Photo et revenir au mode vidéo en direct.

Prendre une photo et utiliser la synthèse vocale (Compact 10 HD Speech)



Si vous possédez un Compact 10 HD Speech, appuyez sur le bouton Photo avec synthèse vocale pour prendre une photo et le lire à voix haute. Utilisez le bouton Lecture / Pause pour débiter ou arrêter la lecture. Vous pouvez régler le grossissement et le mode de visualisation, régler le volume et la vitesse de lecture et modifier la voix dans la photo avec synthèse vocale. Appuyez sur X dans le coin supérieur droit pour fermer la photo avec synthèse vocale et revenir au mode vidéo en direct. Reportez-vous au chapitre 4 pour plus d'informations sur l'utilisation de la synthèse vocale.

Réglage du contraste

Si des caractères ou d'autres éléments à l'écran ne sont pas clairement visibles dans le mode de couleur à contraste élevé que vous avez sélectionné, vous pouvez améliorer l'image et augmenter la netteté. Pour régler le contraste, Appuyez sur l'écran tactile avec 3 doigts pendant environ trois secondes et un curseur apparaîtra. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour régler le contraste. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour revenir au réglage par défaut. Appuyez n'importe où sur l'écran pour quitter.

5.2. Mode Avancé

En mode Avancé, vous disposez des mêmes fonctions qu'en mode Facile, plus quelques fonctionnalités supplémentaires.

Heure et date

Pour ouvrir l'horloge, appuyez sur l'écran, puis sur l'icône « Horloge » dans le coin en haut à droite de l'écran. Utilisez la barre arrière pour quitter l'écran de la date et l'heure.

Pour régler l'heure et la date, appuyez sur l'heure ou la date. Pour modifier une valeur, appuyez sur le champ que vous souhaitez modifier, puis sur le symbole haut ou bas pour modifier la valeur. Tapez sur la barre arrière pour quitter l'écran de la date et l'heure.

Prendre une photo (Compact 10 HD Speech)




Si vous possédez un Compact 10 HD Speech et souhaitez simplement prendre une photo d'une image sans utiliser la synthèse vocale, appuyez sur le bouton photo. Vous pouvez régler le grossissement et le mode de visualisation de la photo. Appuyez sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer l'option Photo et revenir au mode vidéo en direct.

5.3 Menu

Ouvrir et fermer

Pour ouvrir le menu, appuyez sur l'écran et appuyez sur l'icône « Menu » sur le côté gauche de l'écran. Cela ouvrira le menu principal. Pour fermer le menu, tapez sur la « Barre arrière ».

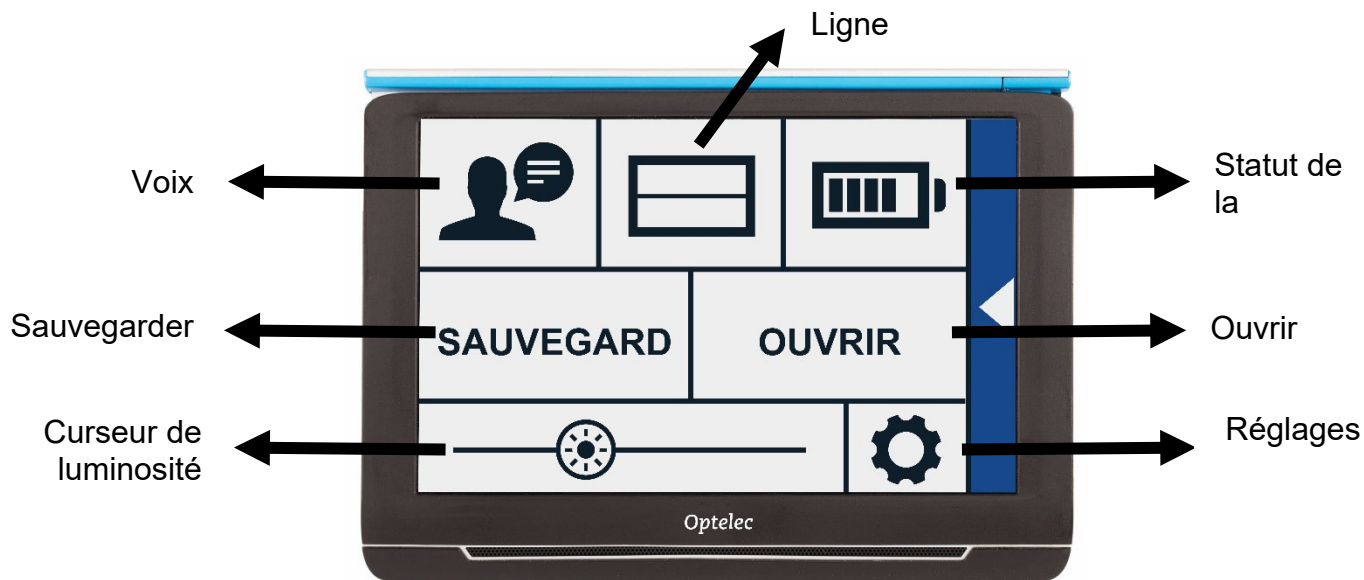

Les éléments dans le menu varient selon que vous possédez un Compact 10 HD ou 10 HD Speech. Pour activer un bouton, appuyez une fois sur le bouton. L'activation d'un bouton ouvre un nouvel écran de menu ou une nouvelle liste. Pour revenir au menu principal, tapez sur la "Barre arrière". Pour régler le curseur, maintenez le bouton du curseur enfoncé tout en le déplaçant vers la droite ou la gauche.

Le menu principal contient les options suivantes :

- Voice (Compact 10 HD Speech uniquement)
- Ligne On / Off
- État de la batterie
- Sauvegarder
- Ouvrir
- Curseur de luminosité
- Réglages



Voix (Compact 10 HD Speech uniquement)

Pour sélectionner une voix, une langue et le menu de langues, ou pour ajouter ou enlever une voix ou une langue, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Voix”.

Sélectionner voix, langue et menu de langue

Cet item de menu vous permet de sélectionner une langue et une voix de lecture. Pour sélectionner une autre voix de lecture, appuyez sur l’icône voix dans le coin supérieur gauche du menu principal pour ouvrir la liste de voix présélectionnées. Chaque voix représente une langue. Appuyez sur une voix pour la sélectionner. Si le changement de la voix de lecture change la langue, les menus se changeront en cette langue.

Ajouter ou enlever une voix ou une langue

Pour ajouter ou retirer une voix ou une langue, appuyez sur l’icône de voix au coin supérieur gauche du menu principal. Dans la liste des voix présélectionnées, appuyez sur le bouton “Modifier”. Pour ajouter ou enlever une voix de lecture, sélectionnez la langue dans la liste en appuyant sur la langue. Les voix disponibles pour la langue sélectionnée s’afficheront. Sélectionnez une voix de lecture dans la liste en appuyant dessus pour l’activer. Un crochet devant cette voix indiquera qu’elle est activée. Une fois la voix activée, elle sera disponible sous le bouton “Voix” du menu principal. Si vous désélectionnez une voix, celle-ci disparaîtra de la liste de voix disponibles. Les langues dont des voix de lecture ont été sélectionnées apparaîtront au-dessus de la liste de langues et seront marquées d’un crochet.

Réglage du langage et de la voix en Mode Standard

En mode standard, vous ne pouvez pas accéder au menu. Pour régler la langue ou la voix en mode standard, maintenez le bouton « Voix » enfoncé pour accéder directement au menu Voix et suivez les étapes décrites ci-dessus.

Ligne On / Off

Le Compact 10 HD peut afficher une ligne de lecture pour vous aider à positionner le Compact 10 HD directement sur le document. Pour activer la ligne de lecture, appuyez sur le bouton « Ligne ». Touchez à nouveau ce bouton pour masquer la ligne de lecture.

État de la batterie

L'état de la batterie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous appuyez sur l'icône de batterie, un nouvel écran apparaîtra vous indiquant l'état de la batterie, le bouton "À propos" et la flèche vers l'arrière qui ramène au menu principal. Le symbole d'éclair signifie que la batterie est en chargement.

À propos

Appuyez sur le bouton "À propos" dans le menu "Batterie" pour voir la version de l'application.

Sauvegarder

Cette option est uniquement disponible en Mode Avancé.

Pour sauvegarder une photo en capture instantanée, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Sauvegarder”.

- Prenez une photo en capture instantanée à l’aide du bouton Capture instantanée.
- Ouvrez le menu.
- Appuyez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder la capture instantanée.


Le bouton Sauvegarder sera caché s’il n’y a pas de capture instantanée à sauvegarder.

Ouvrir


Pour ouvrir une capture instantanée, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Ouvrir”, une liste des captures sauvegardées apparaîtra, les captures plus récentes apparaissant au-dessus de la liste. S’il y a plus de captures sauvegardées que l’écran peut en contenir, balayez l’écran vers le bas pour descendre dans la liste. Appuyez sur l’image d’une capture pour l’ouvrir.

Supprimer

Pour supprimer une capture instantanée, ouvrez le menu et appuyez sur le bouton “Ouvrir”. Appuyez ensuite sur le bouton “Supprimer”. Une liste des captures apparaîtra, les captures plus récentes s’affichant d’abord. Au coin supérieur droit de chaque image se trouve une case à cocher. Cochez les cases des captures à supprimer.

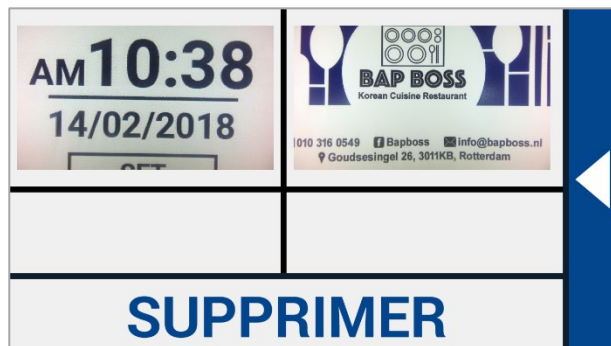

Ouvrir et voir les captures sauvegardées

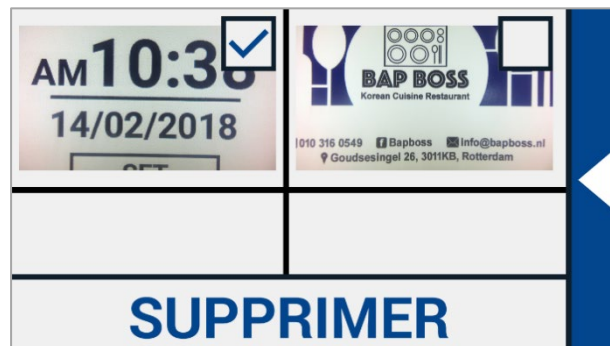

Supprimer les captures

Appuyez sur le bouton “Supprimer” pour supprimer les captures sélectionnées. Pour supprimer toutes les captures, appuyez sur le bouton “Supprimer” sans avoir sélectionné d’image. Une confirmation sera requise pour supprimer la totalité des captures, sélectionnez “Oui”. Pour annuler, sélectionnez “Non”. Vous retournerez ensuite automatiquement à la liste de captures. Appuyez sur la barre arrière pour retourner au menu “Ouvrir”. Appuyez de nouveau sur la barre arrière pour retourner au menu principal.


Ajuster la luminosité

Utilisez le curseur avec l’icône de soleil pour augmenter ou diminuer la luminosité.

5.4 Réglages

Appuyez sur le bouton "Réglages" pour accéder au menu Réglages. Le bouton "Réglages" est le bouton avec l'icône d'engrenage en bas à droite. Le menu Réglages contient les boutons suivants:


- Couleur
- Affichage (Compact 10 HD Speech uniquement)
- Miracast
- Bluetooth (Compact 10 HD Speech uniquement)
- Ligne
- Boutons
- Thème
- Colonnes (Compact 10 HD Speech uniquement)
- Lumières
- Son
- En attente
- Langue (Compact 10 HD uniquement)
- Restaurer

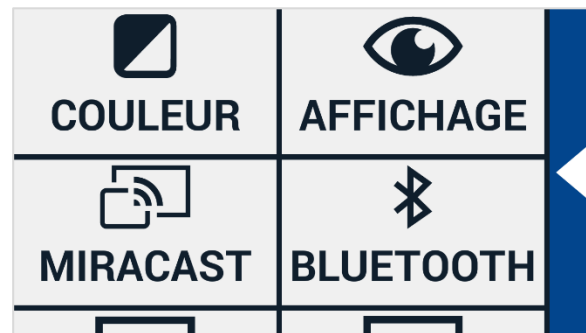

Couleurs

Dans le menu Réglages, appuyez sur le bouton “Couleur” pour sélectionner votre combinaison de couleurs à contraste élevé.

Le Compact 10 HD supporte quatre modes à contraste élevé. Pour chacun de ces modes, les couleurs d’arrière-plan et d’avant-plan peuvent être sélectionnées. Trois des modes à contraste élevé peuvent être désactivés. Le premier mode de contraste élevé en haut à gauche est requis.

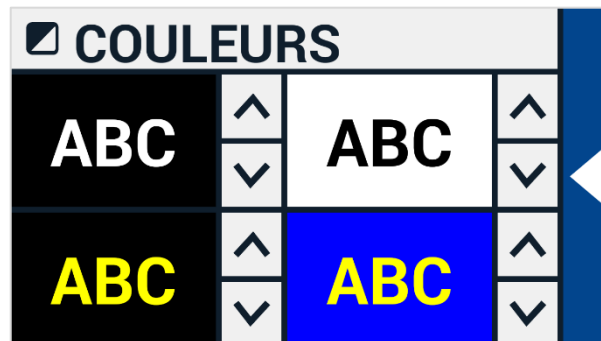

Pour changer les couleurs de premier plan et d’arrière-plan, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas en regard du mode que vous souhaitez modifier. Vous passerez en revue chacun des modes disponibles et pourrez vous arrêter sur celui que vous préférez. Sélectionnez le symbole «X» pour désactiver le mode contraste élevé. Tapez sur la barre arrière pour revenir au menu des paramètres.




Affichage (Compact 10 HD Speech uniquement)

Dans le menu des paramètres, appuyez sur le bouton «Affichage» pour configurer le mode d'affichage du texte capturé lors de l'utilisation de la synthèse vocale.

Pour configurer le mode d'affichage de tout le texte capturé, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler les différents modes d'affichage : Original, Ligne et Colonne.

Pour configurer le mode d'affichage du mot lu à voix haute, appuyez sur le bouton Surligner (Surbrillance) pour faire défiler les différents modes de surbrillance : Rectangle et Souligné. Lorsque vous utilisez la synthèse vocale, appuyez sur le bouton Mode dans la barre de boutons pour afficher le texte capturé dans le mode de visualisation que vous venez de sélectionner et faire défiler les couleurs de contraste élevé qui y ont été configurées.

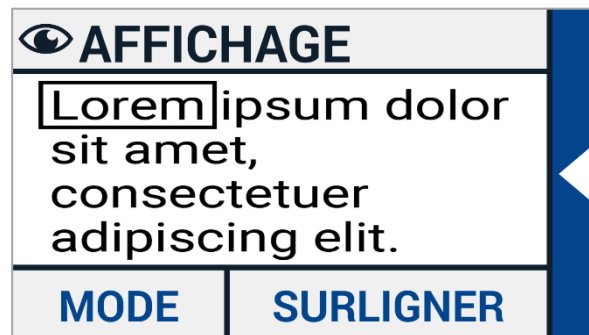

Miracast: Connection sans-fil à un moniteur ou à un téléviseur

Miracast est une norme de connection sans-fil à un moniteur. Il peut-être décrit comme une connection HDMI via une connection wi-fi, remplaçant le câble à partir du Compact 10 HD au moniteur. Reportez-vous au manuel de votre moniteur ou téléviseur pour vérifier si votre appareil prend en charge la fonction Miracast.

Pour connecter votre Compact 10 HD à un moniteur ou un téléviseur via Miracast, appuyez sur le bouton Miracast pour basculer sur cette fonction. Une liste avec les périphériques disponibles sera affichée. Cliquez sur un appareil pour vous connecter. Cela pourrait prendre jusqu'à une minute pour établir la connexion. Appuyez à nouveau sur le bouton Miracast pour vous déconnecter. Lorsqu'une connexion Miracast est établie, l'audio et la vidéo sont transmis au téléviseur ou au moniteur. Pour garantir une bonne connexion, votre Compact 10 HD doit se trouver à moins d'un mètre ou 3 pieds du moniteur ou du téléviseur. Selon la connexion, un court délai de la vidéo et/ou de l'audio pourrait être remarqué.



Bluetooth (Compact 10 HD Speech uniquement)

Pour connecter des écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth, appuyez sur le bouton "Bluetooth" et activez le Bluetooth.

Une liste des appareils jumelés apparaîtra.

Si vos écouteurs ou haut-parleurs ne sont pas jumelés, appuyez sur le bouton "Chercher" pour chercher les appareils disponibles. Avant de débiter la recherche Bluetooth, assurez-vous que les écouteurs ou haut-parleurs sont allumés et réglés à repérable ou visible. Référez-vous au manuel de vos écouteurs ou haut-parleurs pour savoir comment les régler en mode repérable. Pour jumeler les écouteurs ou haut-parleurs, appuyez sur le nom de l'appareil et entrez le code si nécessaire. Référez-vous au manuel des écouteurs ou haut-parleurs pour connaître le code.

Lorsque jumelés, appuyez sur le nom de l'appareil pour le connecter. Vous aurez l'option de connecter ou d'oublier l'appareil. Appuyez sur "Connecter".

Le nom de l'appareil connecté apparaîtra en bleu et sera coché. Pour oublier un appareil, appuyez sur le bouton "Oublier". L'appareil disparaîtra de la liste d'appareils jumelés.

Remarque: Seuls les écouteurs et les haut-parleurs Bluetooth version 4.0 et supérieurs sont pris en charge.

Ligne

Cet élément de menu vous permet de modifier la position de la ligne de lecture sur l'une de ses six positions: haut horizontal, centre horizontal, bas horizontal, vertical gauche, centre vertical, vertical droit. Par défaut, la ligne de lecture est placée horizontalement au centre de l'écran.

Boutons

Cet élément de menu vous permet de modifier la position de la barre de boutons sur l'une des deux positions suivantes: bas ou côté. Selon vos préférences, vous pouvez modifier la position de la barre de boutons en bas ou sur le côté de l'écran. Le réglage par défaut est "Bas".

Thème

Cet élément de menu vous permet de sélectionner un thème clair ou foncé pour les boutons et les menus.



Colonnes (Compact 10 HD Speech uniquement)

Cet élément de menu vous permet de choisir si vous voulez que le Compact 10 HD Speech lise uniquement les colonnes complètes, ou les colonnes incomplètes. Par défaut, l'option Lire uniquement les colonnes complètes est sélectionnée. Veuillez noter que si vous choisissez de lire des colonnes incomplètes, tous les caractères et tous les mots ne sont pas entièrement capturés, ce qui peut entraîner un texte incohérent.

Lumières

Cet élément de menu vous permet d'activer ou de désactiver les lumières en mode grossissement et en mode Vue d'ensemble. Les voyants de la loupe sont situés à gauche et à droite de la caméra de grossissement. Par défaut, les lumières de lecture sont activées pour une qualité d'image optimale. Le voyant de la vue d'ensemble est situé à côté de la caméra de la vue d'ensemble. Par défaut, le voyant de vue d'ensemble est désactivé.

Son

Cet élément du menu vous permet de modifier le volume, désactiver le retour audio et d'activer ou de désactiver le retour de vibration. Par défaut, le son est activé et la vibration est désactivée.

Mode veille

Cet élément de menu vous permet de régler le temps de veille. Le temps d'inactivité nécessaire à la mode veille peut être modifié à l'aide de cette option. Il suffit d'appuyer sur n'importe quel

bouton pour réveiller le Compact 10 HD. Par défaut, le temps d'inactivité nécessaire à la mode veille est réglé à 5 minutes.

Langue (Compact 10 HD uniquement)

Cet élément de menu vous permet de choisir la langue du Compact 10 HD. Appuyez pour sélectionner votre langue de menu préférée.

Restaurer

Appuyez sur cette option pour restaurer les paramètres par défaut. Le Compact 10 HD vous demandera de confirmer la restauration. Sélectionnez "Oui" pour restaurer les paramètres par défaut. Sélectionnez "Non" pour annuler la restauration.

6. Transférer des documents vers un PC

Pour transférer des photos et des documents vers un PC, vous devez disposer d'un ordinateur Windows 10 et du câble USB fourni. Suivez ensuite les étapes ci-dessous:

1. Allumez le Compact 10 HD et votre PC;
2. Connectez le Compact 10 HD à votre PC Windows 10 à l'aide du câble USB fourni. Le Compact 10 HD affiche brièvement l'icône «Connecté à un PC»;
3. Si vous connectez le Compact 10 HD pour la première fois, veuillez patienter jusqu'à ce que Windows ait terminé la configuration de l'appareil.
4. En fonction de vos paramètres Windows, Windows Explorer ouvre le périphérique «CP10» et affiche le «Stockage partagé interne».
5. Si Windows 10 n'affiche pas automatiquement le périphérique Compact 10 HD, ouvrez l'explorateur Windows et sélectionnez le périphérique CP10;
6. Cliquez sur «Stockage partagé interne», puis sur le dossier «DCIM».
7. Le dossier «DCIM» contient des dossiers nommés avec l'heure et la date des photos prises. Chaque dossier contient la photo prise et, si vous possédez un Compact 10 HD Speech, un document au format .txt avec le texte présent sur la photo. De plus, le dossier contient 2 fichiers système, un fichier JSON et une image traitée.
8. Utilisez le copier et coller pour copier les fichiers sur votre PC.

Compact 10 HD

Compact 10 HD Speech

Caratteristiche e funzionalità avanzate



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introduzione

Complimenti per aver scelto Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech!

Grazie al suo schermo da 10", alle funzioni personalizzabili ed all'uso intuitivo, Compact 10 HD offre tutti i vantaggi di un videingranditore da tavolo ma in una struttura molto più piccola e portatile. A braccio aperto, è possibile guardare foto, firmare documenti, vedere medicinali e leggere scritte su barattoli e lattine, senza essere limitati nei movimenti. Con Compact 10 HD Speech, il braccio estraibile consente di scansionare e leggere intere pagine di testo.

Se avete domande o suggerimenti sull'uso di questo prodotto, contattate il vostro distributore o Optelec usando le informazioni reperibili sull'ultima pagina di questo manuale. Il vostro feedback è il benvenuto, ci auguriamo che Compact 10 HD sia di vostro gradimento!

1.1. Informazioni su questo manuale

In Optelec ogni prodotto è soggetto a migliorie ed aggiornamenti. Pertanto è possibile che questo manuale non corrisponda all'ultima versione del prodotto. È sempre possibile scaricare il manuale aggiornato dal sito www.optelec.com nella sezione Supporto.

Nota: i termini "swipe" e "tap", sono stati sostituiti rispettivamente da "scorrere con il dito" e "toccare".



Questo manuale vi aiuterà a familiarizzare con le funzioni e le operazioni di base di Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech. Leggete questo manuale con attenzione prima di usare il dispositivo. A meno che non sia indicato diversamente, tutti i riferimenti per Compact 10 HD valgono anche per Compact 10 HD Speech. Le funzioni specifiche per Compact 10 HD Speech sono contrassegnate dal logo Speech.

1,2. Cosa c'è nella confezione

La confezione di Compact 10 HD contiene quanto segue:

- Il videoingranditore Compact 10 HD o Compact 10 HD Speech
- Una custodia protettiva
- Un alimentatore USB-C con relativo cavo
- Quattro spine di corrente specifiche per Paese (UE, Stati Uniti, UK e Australia)
- Un panno per la pulizia dello schermo
- Configurazione e uso
- Cura e sicurezza

Se qualcosa di questi elementi è mancante nella confezione, contattare il distributore.

1.3. Cosa si vede sullo schermo

Sullo schermo touch di Compact 10 vengono utilizzate icone per rappresentare le funzionalità del prodotto. Utilizzare questa sezione come strumento di riferimento per comprendere la grafica sullo schermo.

Alcune grafiche compaiono solo se si possiede un Compact 10 Speech. La tabella sottostante specifica quali funzioni sono disponibili solamente nella versione Speech. Inoltre, un'icona blu nel documento indica solo lo Speech.




Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Riduce l'ingrandimento dell'immagine sullo schermo.	Entrambi	Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Scatta una foto all'immagine senza usare il text to speech.	Entrambi	Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Scatta una foto, scansiona il testo e lo legge.	Solo Speech	Modalità avanzata

Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Cambia la combinazione di colori usati per mostrare a video l'immagine.	Entrambi	Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Aumenta l'ingrandimento dell'immagine sullo schermo.	Entrambi	Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Apri il menu principale, dove è possibile modificare le impostazioni di sistema.	Entrambi	Modalità avanzata
	Mostra la data e l'ora corrente.	Entrambi	Modalità avanzata
	Imposta il blocco della messa a fuoco per mantenere la messa a fuoco su un elemento mentre un altro si sposta nell'inquadratura della fotocamera.	Entrambi	Fotocamera a pagina intera in Modalità Semplificata e Modalità Avanzata

Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Toccare per aprire il menu del volume e della velocità di lettura. Tenere premuto per selezionare una voce.	Solo Speech	Dopo aver scattato una foto text-to-speech in Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Chiude la fotografia.	Entrambi	Dopo aver scattato una foto in Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Imposta il volume.	Solo Speech	Dopo aver aperto il menu del volume e della velocità di lettura in Modalità Semplificata e Modalità Avanzata

Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Imposta velocità di lettura.	Solo Speech	Dopo aver aperto il menu del volume e della velocità di lettura in Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Play o pausa della lettura.	Solo Speech	Dopo il Text To Speech
	Toccare per cambiare la modalità di lettura. Tenere premuto per cambiare tra Modalità Semplificata e Modalità Avanzata.	Entrambi	Modalità Semplificata e Modalità Avanzata
	Aggiunge, rimuove e seleziona la voce di lettura e la lingua del menu.	Solo Speech	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata

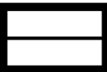Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Determina se l'evidenziazione, la sottolineatura o i riquadri sono utilizzati per mostrare la posizione corrente nel testo catturato.	Solo Speech	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata
	Tasto Miracast per connettere alla televisione o a un monitor tramite Wi-Fi.	Entrambi	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata
	Usare il Bluetooth per accoppiare il Compact 10 con un altoparlante o con delle cuffie via Wi-Fi.	Solo Speech	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata
	Sceglie se visualizzare una linea di lettura sullo schermo.	Entrambi	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata

Icona	Descrizione	Entrambi o solo Speech	Evidenza
	Cambia la posizione della barra dei comandi.	Entrambi	Quando si cambiano le impostazioni nella Modalità Avanzata
	Mostra lo stato della batteria. Il simbolo di un fulmine indica che la batteria è in carica.	Entrambi	Dal menu principale in Modalità Avanzata
	Cursore della luminosità.	Entrambi	Dal menu principale in Modalità Avanzata
	Visualizza un menu in cui è possibile modificare le impostazioni, tra cui l'aspetto delle immagini sullo schermo e la gestione del suono.	Entrambi	Dal menu principale in Modalità Avanzata

2. Iniziamo

Compact 10 HD è posizionato correttamente davanti a voi quando lo schermo è rivolto verso l'alto e il logo Optelec è sotto lo schermo.

2.1. Ricarica della batteria

Il Compact 10 HD viene fornito con un alimentatore e quattro spine di alimentazione specifiche per il paese, nei tipi EU, US, UK e AU.

Far scivolare l'adattatore di corrente appropriato per la propria regione nell'alimentatore sino a quando non scatta.

La batteria dovrebbe essere caricata prima dell'utilizzo iniziale. Per caricare il Compact 10 HD, collegare il cavo USB in dotazione all'alimentatore e al connettore USB blu situato sul lato sinistro dell'unità. Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di corrente.



*Batteria carica**Batteria in carica**Batteria quasi scarica*

Caricare completamente Compact 10 HD richiede all'incirca 3.5 ore. Un Compact 10 HD completamente carico ha un'autonomia fino a 3,5 ore, a seconda delle impostazioni e dell'uso del prodotto. Attenzione: per motivi di sicurezza, usate solo il cavo USB-C e l'alimentatore di corrente forniti con Compact 10 per caricare la batteria.

Avvertenze sulla batteria

Il Compact 10 HD mostrerà brevemente un'icona di avviso di batteria scarica per indicare che la batteria deve essere caricata. Quando ciò accade, assicurarsi di ricaricare l'unità. Quando la batteria è completamente scarica, l'unità si spegnerà automaticamente.

Se il Compact 10 HD non si accende, assicurarsi che sia carico.

2.2. Accensione e spegnimento



Per accendere il Compact 10 HD per la prima volta, l'unità ha bisogno di essere caricata. Una volta caricata, tenere premuto il pulsante arancione On / Off per tre secondi. Per spegnere il Compact 10 HD, premere il tasto arancione di nuovo per tre secondi. Quando il Compact 10 viene acceso, impiegherà circa 20 secondi prima di mostrare un'immagine a video.

Standby



Premere brevemente il tasto arancione di On / Off per mettere il Compact 10 HD in modalità Standby. Il Compact 10 va automaticamente in modalità standby se nessun tasto viene premuto e non viene rilevato nessun movimento per un periodo di tempo impostato dall'utente. Premere brevemente il tasto On / Off riaccende l'unità. E' possibile cambiare o disabilitare il tempo di standby nel menu di Compact 10 HD. Vedere capitolo 5.4 per maggiori informazioni.

2.3. Aprire e chiudere Compact 10 HD

Quando si apre Compact 10 HD, lo schermo verrà inclinato in modo da garantire l'angolazione corretta per la lettura, e contemporaneamente si attiverà la telecamera dell'ingrandimento.

Per **aprire** Compact 10 HD, seguite questi passaggi:

1. Posizionate Compact 10 HD davanti a voi in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto, con il logo Optelec sotto lo schermo.
2. Afferrate Compact 10 HD in posizione diritta. Le dita devono tenere la base dello stand mentre i pollici saranno ai lati di Compact 10 HD.
3. Con le dita, prendete il bordo della base dello stand con il rientro verso il retro dell'unità.
4. Aprite la base dello stand fino a sentire un click.

Per **chiudere** Compact 10 HD, seguite questi passaggi:

1. Posizionate Compact 10 HD davanti a voi affinché lo schermo sia rivolto verso di voi.
2. Tenete Compact 10 HD ai lati e posizionate le dita sui supporti tra la base e l'unità.
3. Premete leggermente i supporti della base verso di voi in modo da inclinarli.
4. Inclinate lo schermo verso il basso fino a sentire un click.

2.4. Pulire la telecamera


Per ottenere la miglior qualità dell'immagine, assicuratevi che le lenti della telecamera e delle varie luci siano pulite. Una telecamera sporca causa immagini sfocate e può far sì che la telecamera abbia una messa a fuoco scorretta. Per la pulizia, usate il panno in dotazione o un altro panno morbido usato per la pulizia delle lenti.

Nota: non usate acqua o altre soluzioni per pulire la telecamera.



2.5. Pulsanti

Compact 10 HD, sul lato sinistro, ha i pulsanti e le connessioni seguenti:

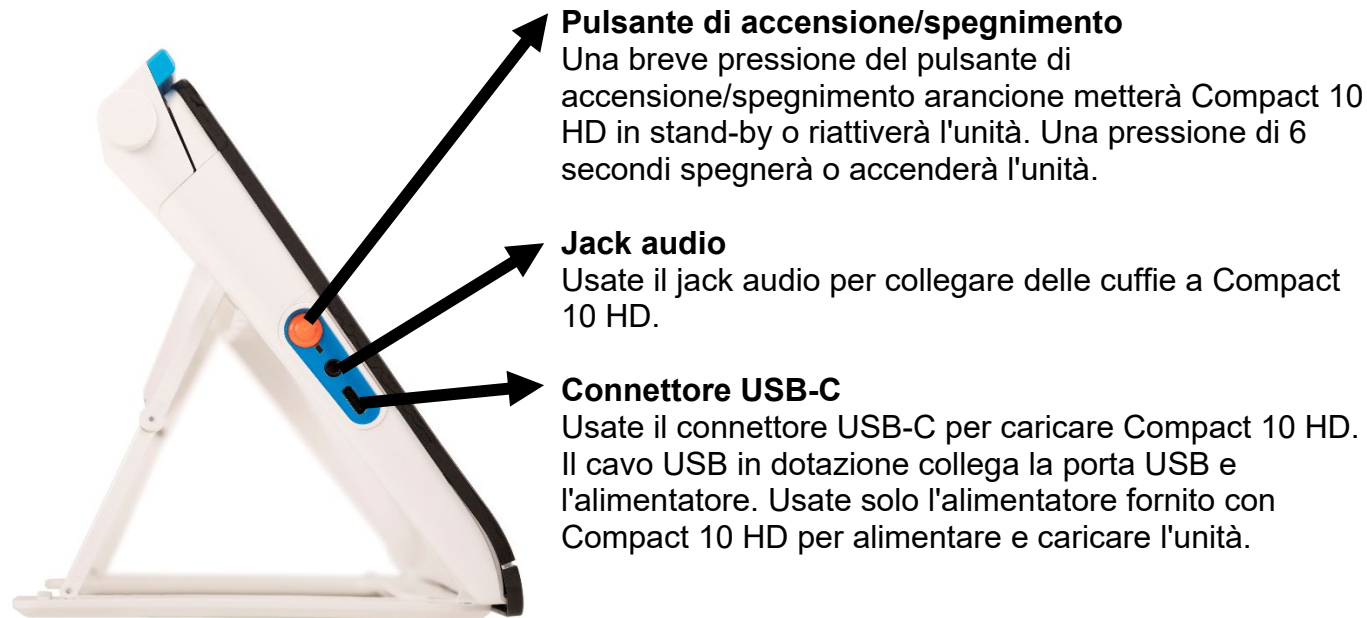

3. Telecamere

Compact 10 HD ha tre telecamere, ognuna delle quali con un compito specifico. Tutte le telecamere possono essere usate in Modalità Semplice ed in Modalità Avanzata. Se l'immagine a schermo sembra sfocata, toccate lo schermo per mettere di nuovo a fuoco la telecamera.

3.1. Telecamera per l'ingrandimento

La telecamera per l'ingrandimento viene usata quando Compact 10 HD è in posizione con lo stand aperto. La telecamera per l'ingrandimento viene usata per leggere su una scrivania o su un tavolo. Compact 10 HD viene posizionato sopra al materiale da leggere.

3.2. Telecamera per tutta la pagina

La telecamera per tutta la pagina viene usata quando viene aperto il braccio per la telecamera. La telecamera per tutta la pagina può essere usata per visualizzare foto e oggetti con maggiore comodità, o per firmare, senza essere limitati nei movimenti.



Blocco della messa a fuoco

L'autofocus può essere bloccato per scrivere o visualizzare oggetti ad una distanza fissa. Usate l'icona a forma di penna nell'angolo in alto a destra dello schermo per bloccare o sbloccare la messa a fuoco.



Se siete in possesso di un Compact 10 HD Speech, la telecamera per tutta la pagina può essere usata anche per scansionare e leggere i documenti a pagina intera. Posizionate il documento che volete leggere sotto la telecamera, allineando l'angolo in basso a sinistra del documento con l'indicazione in blu sul lato destro della base del Compact 10 HD Speech.

3.3. Telecamera panoramica

La telecamera panoramica viene usata quando accendete Compact 10 HD con lo stand chiuso. Per passare dalla telecamera per l'ingrandimento alla telecamera panoramica, chiudete lo stand e premete il pulsante di accensione/spengimento. La telecamera panoramica è ottimizzata per vedere gli oggetti a breve distanza, come gli orari dei treni.



4. Uso delle funzioni Sintesi vocale e OCR

Se siete in possesso di un Compact 10 HD Speech, è possibile acquisire l'immagine per fare l'OCR. Compact 10 HD Speech estrapolerà il testo dall'immagine e lo leggerà tramite sintesi.



4.1 Attivazione della sintesi

Per acquisire un'immagine ed attivare la sintesi:

- Posizionate il testo o parte di esso nella visualizzazione telecamera e premete il pulsante di acquisizione per OCR. Quando acquisite per OCR un'immagine di una pagina intera, usate la telecamera per tutta la pagina e assicuratevi di allineare l'angolo in basso a sinistra del documento con l'indicatore in blu sul lato destro dello stand del Compact 10 HD Speech.
- Per ottenere i risultati migliori, assicuratevi che ci sia luce a sufficienza nel locale, evitate zone d'ombra e limitatevi al testo del documento che volete effettivamente leggere. Se il testo nella visualizzazione è troppo piccolo, il riconoscimento perderà in precisione e potrebbe non riuscire.
- Apparirà una barra di progressione. Compact 10 HD Speech avvierà la lettura una volta terminata la procedura di riconoscimento.
- Usate il pulsante Play/Pausa per avviare o interrompere la lettura.

- Toccate e tenete premuto (pressione prolungata) sul testo per avviare la lettura a partire dalla parola o dalla Sezione di testo su cui puntate
- Premete il pulsante Modalità per visualizzare il testo acquisito nella modalità di visualizzazione selezionata e scorrere tra i colori a contrasto elevato di questa modalità di visualizzazione. Consultate il capitolo 5.4, Visualizza, e Colore, per maggiori informazioni.
- Se non viene trovato nessun testo, apparirà il messaggio “Nessun testo trovato”.

4.2 Regolazione del volume e della velocità di lettura

Per regolare il volume o la velocità di lettura, attivate la barra dei pulsanti con un singolo tocco. Toccate il pulsante dell'audio per visualizzare gli slider “Volume” e “Velocità”. Troverete lo slider del “Volume” a fianco al pulsante dell'audio. Gli slider “Volume” e “Velocità” sono presenti solo in modalità snapshot.

4.3 Regolazioni per lingua e voce

Per regolare la lingua o la voce in Modalità semplice, premete e tenete premuto il pulsante dell'audio per andare al menu Voce. Per regolare la lingua o la voce in modalità Avanzata, premete il pulsante “Menu” e poi il menu “Voce”. Fate riferimento al capitolo 5.3, Voce, per maggiori informazioni.

4.4 Modalità tabella

La classica modalità di lettura legge le colonne, che è l'ideale per i giornali e le riviste. Ma occasionalmente si potrebbe voler leggere un menu, una ricevuta, una tabella o dell'altro testo che ha un aspetto simile ad una tabella. Premendo e tenendo premuto il pulsante di acquisizione, Compact 10 HD Speech leggerà tutto il testo acquisito riga per riga da sinistra a destra, dopodichè si sposterà alla riga successiva. Quando uscirete dal fermo-immagine e acquisirete un nuovo documento, tornerete automaticamente alla classica modalità di lettura.


5. Modalità Semplice e Avanzata

Per cambiare tra modalità Semplice e Avanzata, premete e tenete premuto il pulsante Modalità e toccate Semplice o Avanzata. In modalità Semplice, avrete accesso alle funzioni principali:


- Regolazione dell'ingrandimento
- Selezionare una modalità di visualizzazione
- Acquisire un'immagine (Compact 10 HD)
- Acquisire un'immagine e fare l'OCR (Compact 10 HD Speech)
- Alternare tra la fotocamera per l'ingrandimento e panoramica

In modalità avanzata, avrete le stesse funzioni della modalità Semplice, in più altre funzioni:


- Data e ora
- Accedere al menu con le opzioni per:
 - Salvare ed aprire le immagini
 - Cambiare la lingua e la voce di lettura
 - Cambiare le modalità colore
 - Attivare la riga di lettura
 - Bluetooth, audio e Miracast
 - Altre impostazioni avanzate
 - Acquisire un'immagine (Compact 10 HD Speech)

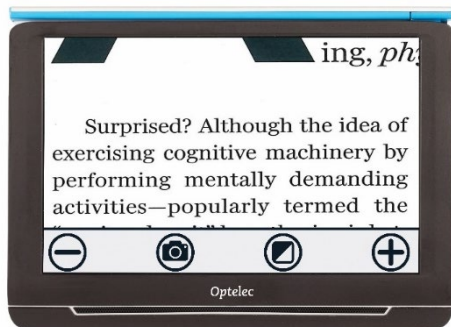


Compact 10 HD Mod. Semplice

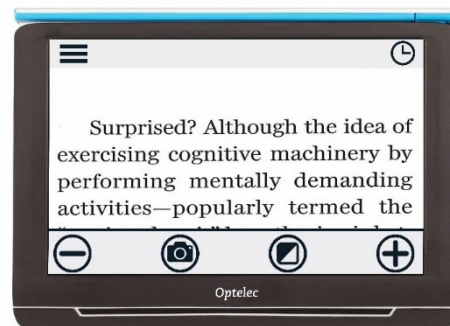

Compact 10 HD Modalità Avanzata

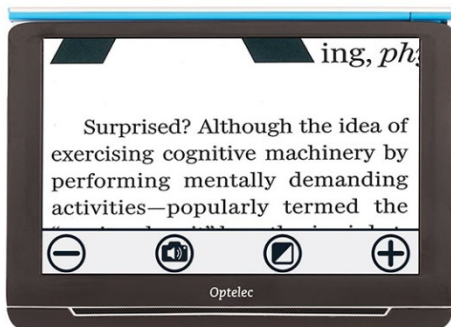

Compact 10 HD Speech Mod. Semplice

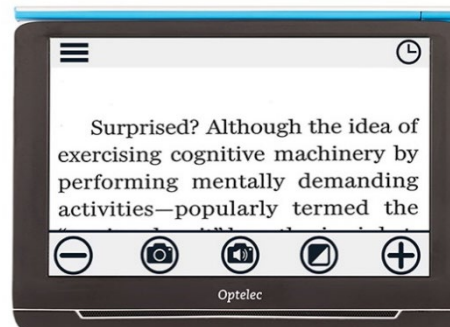

Compact 10 HD Speech Modalità Avanzata

5.1. Funzioni in modalità Semplice

Regolare l'ingrandimento



Per cambiare l'ingrandimento, toccate lo schermo. La barra dei pulsanti apparirà in fondo o sul lato destro dello schermo, in base alla posizione scelta per la barra. La posizione della barra può essere selezionata nel menu. Consultate il capitolo 5 per maggiori informazioni su come cambiare la posizione della barra dei pulsanti. Nella barra dei pulsanti toccate il pulsante + per aumentare o il pulsante − per diminuire l'ingrandimento. In alternativa, allontanate/avvicinate le due dita appoggiate sullo schermo per cambiare l'ingrandimento. Toccate lo schermo per nascondere la barra dei pulsanti. La barra scomparirà automaticamente se non viene toccata per 10 secondi.



Selezionare una modalità di visualizzazione



Toccando il pulsante Modalità al centro della barra dei pulsanti sarà possibile selezionare una delle seguenti modalità di visualizzazione:

Modalità Foto: visualizzazione di testo e foto a colori reali

Modalità in negativo: Lettura a contrasto elevato, bianco su nero

Modalità in positivo: Lettura a contrasto elevato, nero su bianco

Combinazioni di colore 1 a contrasto elevato

Combinazioni di colore 2 a contrasto elevato

Acquisire un'immagine (Compact 10 HD)



Se siete in possesso di un Compact 10 HD, premete il pulsante snapshot per acquisire un'immagine. Sarà poi possibile regolare ingrandimento e modalità di visualizzazione dell'immagine. Premete la X in alto a destra per chiudere e ritornare alla modalità dal vivo.

Acquisire un'immagine e fare l'OCR (Compact 10 HD Speech)



Se siete in possesso di un Compact 10 HD Speech, premete il pulsante snapshot per acquisire un'immagine e poi leggerla con la sintesi vocale. Usate il pulsante Play/Pausa per avviare o interrompere la lettura. È possibile regolare l'ingrandimento e la modalità di visualizzazione, regolare il volume e la velocità di lettura e cambiare la voce in fase di lettura con l'OCR. Premete la X nell'angolo in alto a destra per chiudere la modalità di acquisizione con l'OCR e ritornare alla modalità video in tempo reale. Consultate il capitolo 4 per maggiori informazioni su come usare la sintesi e l'OCR.

Regolazione del contrasto

Se i caratteri o altri elementi a schermo non sono ben visibili nella modalità a contrasto elevato che avete selezionato, è possibile ottimizzare l'immagine ed aumentare la definizione. Per regolare il contrasto, premete e tenete premuto il touch screen con tre dita per circa tre secondi in modo da far apparire una barra di scorrimento. Fate scorrere a sinistra o a destra per regolare il

contrasto. Premete il pulsante di ripristino per tornare all'impostazione predefinita. Toccate una parte qualsiasi dello schermo per uscire.

5.2. Funzioni in modalità Avanzata

In Modalità Avanzata, avete le stesse funzioni della modalità Facile, con alcune funzioni in più.

Data e ora

Per aprire l'orologio, toccate lo schermo e successivamente l'icona "Orologio" nell'angolo in alto a destro dello schermo. Usate la barra "Indietro" per uscire dalla schermata di data e ora.

Per impostare data e ora, toccate la data o l'ora. Per cambiare un valore, toccate sulle frecce su e giù per cambiare un valore. Toccate sulla barra "Indietro" per uscire dalla schermata di impostazione di data e ora.

Acquisire un'immagine (Compact 10 HD Speech)



Se siete in possesso di un Compact 10 HD Speech e volete semplicemente acquisire un'immagine senza fare l'OCR, premete il pulsante Acquisisci. Sarà poi possibile regolare ingrandimento e modalità di visualizzazione dell'immagine. Premete la X in alto a destra per chiudere e ritornare alla modalità dal vivo.

5.3 Menu

Aprire e chiudere il menu

Per aprire il menu, toccate sullo schermo e successivamente sull'icona "Menu" sul lato sinistro dello schermo. Aprirete così il menu principale. Per chiudere il menu, toccate sulla barra "Indietro".



Gli elementi nel menu possono variare, in base all'unità che avete: Compact 10 HD o 10 HD Speech. Per attivare un pulsante, toccatelo una volta. Per tornare al menu principale, toccate sul pulsante "Indietro". Per regolare lo slider, toccate e tenete premuto lo slider mentre vi spostate a destra e a sinistra.

Il menu principale contiene le opzioni seguenti:

- Voce (solo Compact 10 HD Speech)
- Riga attivata/disattivata
- Stato batteria
- Salva
- Apri
- Slider luminosità
- Impostazioni



Voce (Solo Compact 10 HD Speech)

Per selezionare una voce, una lingua o un menu per la lingua, o per aggiungere e rimuovere una voce o una lingua, aprite il menu e toccate il pulsante “Voce”.

Selezionare una voce, una lingua o una lingua del menu

Questa opzione di menu consente di selezionare la voce e la lingua di lettura. Per selezionare un'altra voce di lettura, toccate l'icona della voce nell'angolo in alto a sinistra del menu principale per aprire l'elenco con le voci preselezionate. Ciascuna voce rappresenta una lingua. Toccate su una voce per selezionarla. Se la regolazione della voce in lettura comporta un cambiamento della lingua, i menu passeranno automaticamente a quella lingua.

Aggiungere o rimuovere una voce o una lingua

Per aggiungere o rimuovere una voce o una lingua, toccate l'icona della voce nell'angolo in alto a sinistra del menu principale. Nell'elenco delle voci preselezionate, toccate sul pulsante “Aggiungi/Rimuovi”. Per aggiungere o rimuovere una voce in lettura, selezionate la lingua dall'elenco toccando sulla lingua. Apparirà un elenco con le voci per la lingua selezionata. Per attivare una voce in lettura, selezionatela dall'elenco toccandola. Il segno di spunta davanti al nome della voce indicherà se è attivata. Quando è attivata, sarà disponibile sotto il pulsante “Voce” nel menu principale. Deselezionando una voce, la voce sarà rimossa dalle voci di lettura disponibili. Le lingue per cui è selezionata la voce di lettura appariranno nella parte superiore dell'elenco e saranno contrassegnate con un segno di spunta.

Impostazioni di lingua e voce in Modalità Semplice

In modalità Semplice non è possibile accedere al menu. Per regolare la lingua o la voce in Modalità facile, premete e tenete premuto il tasto dell'audio per andare direttamente al menu Voce e seguite i passaggi descritti qui sopra.

Riga Attivata/Disattivata

Compact 10 HD può visualizzare una riga di lettura per aiutarvi a posizionare Compact 10 HD correttamente sul documento. Per attivare la riga di lettura, toccate il pulsante “Riga”. Toccate ancora questo pulsante per nasconderla.

Stato della batteria

Lo stato della batteria appare nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se toccate sull'icona della batteria, si aprirà una nuova schermata che mostra l'icona ingrandita della batteria e lo stato di quest'ultima, il pulsante “Informazioni” e la “freccia Indietro” per tornare al menu principale. Il simbolo del fulmine indicherà che la batteria è in carica.

Informazioni

Toccate sul pulsante “Informazioni” nella schermata della batteria per vedere la versione dell'applicazione.

Salva

Questa opzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

Per salvare un'immagine, aprite il menu e toccate sul pulsante “Salva”.

- Acquisite un oggetto con il pulsante Acquisisci
- Aprite il menu
- Premete il pulsante Salva per salvare l'oggetto


Se non c'è nessuna immagine da salvare, il pulsante Salva sarà nascosto.

Apri


Per aprire un'immagine, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Verrà mostrato un elenco con le miniature delle immagini salvate, con le acquisizioni più recenti in cima all'elenco. Se sono presenti altre acquisizioni rispetto a quelle visibili a schermo, scorrete con il dito su e giù per scorrere l'elenco. Toccate sulla miniatura per aprire la relativa immagine.

Elimina

Per eliminare un'immagine, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Nella schermata che si presenta, toccate sul pulsante “Elimina”. Verrà mostrato un elenco di miniature delle acquisizioni salvate, a partire da quelle salvate più recentemente. Ciascuna acquisizione ha una casella di controllo nell'angolo in alto a destra. Per selezionare un'immagine, attivate la casella.

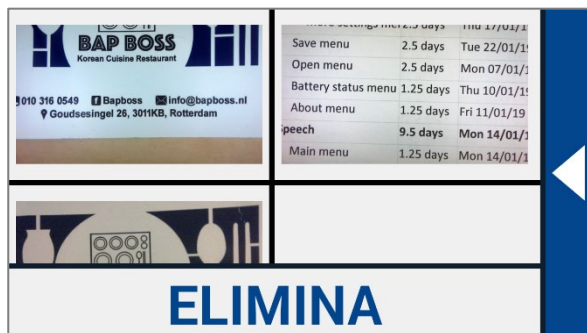

Apri per visualizzare le acquisizioni salvate

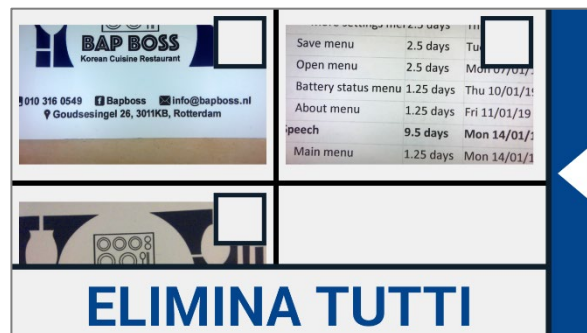

Elimina acquisizioni

Toccate sul pulsante “Elimina” per eliminare le immagini selezionate. Per eliminare tutte le immagini, toccate sul pulsante “Elimina” senza selezionare un'acquisizione. Sarà chiesto di confermare l'eliminazione di tutte le immagini. Per eliminare tutto, selezionate “Sì”. Per annullare l'operazione, selezionate “No”. In entrambi i casi ritornerete all'elenco delle acquisizioni. Toccate sulla “barra Indietro” per tornare alla schermata “Apri”. Toccate di nuovo sulla “barra Indietro” per tornare al menu principale.


Regolare la luminosità

Usate lo slider con l'icona del Sole per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

5.4 Impostazioni

Toccate sul pulsante “Impostazioni” per accedere al relativo menu. Il pulsante “Impostazioni” è il pulsante con l'icona a forma di rotella in basso a destra. Il menu Impostazioni contiene i pulsanti seguenti:


- Colore
- Visualizza (Solo Compact 10 HD Speech)
- Miracast
- Bluetooth (Solo Compact 10 HD Speech)
- Riga
- Pulsanti
- Tema
- Colonne (Solo Compact 10 HD Speech)
- Luci
- Suoni
- Standby
- Lingua (Solo Compact 10 HD)
- Ripristina

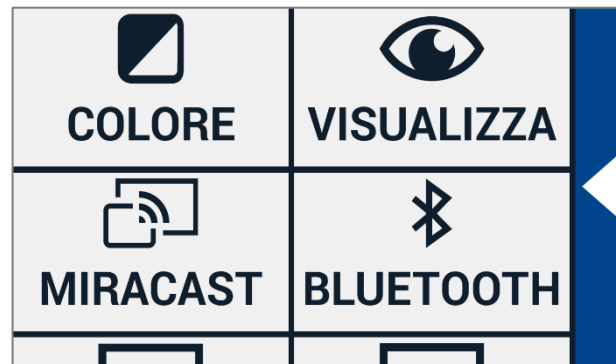

Menu Impostazioni

Colore

Nel menu Impostazioni, toccate sul pulsante “Colore” per selezionare i colori a contrasto elevato preferiti. Compact 10 HD supporta quattro modalità a contrasto elevato. Per ciascuna modalità, possono essere selezionati colori per scritte e sfondo. Possono essere disabilitate tre modalità a contrasto elevato. La prima modalità a contrasto elevato in alto a sinistra è obbligatoria.

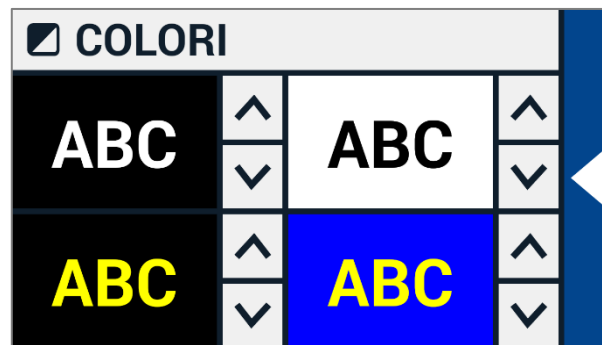

Per cambiare i colori di scritte e sfondo, toccate sulle frecce su e giù al fianco della modalità che volete modificare. Passerete tra le varie modalità disponibili; fermatevi su quella desiderata. Selezionate il simbolo “X” per disabilitare una modalità a contrasto elevato. Toccate sulla “barra Indietro” per tornare al menu Impostazioni.



Visualizza (Solo Compact 10 HD Speech)

Nel menu Impostazioni, toccate sul pulsante “Visualizza” per configurare il modo in cui volete visualizzare il testo quando si usa la sintesi vocale.

Per configurare il modo in cui viene visualizzato tutto il testo acquisito, premete il pulsante Stato per passare tra le diverse modalità di visualizzazione: Originale, Riga e Colonna.

Per modificare il modo in cui viene letta la parola quando viene visualizzata, premete il pulsante Evidenzia per passare tra le diverse modalità di evidenziazione: Rettangolo e Sottolineato.

Quando usate la sintesi vocale, toccate sul pulsante Modalità nella barra dei pulsanti per visualizzare il testo acquisito nella modalità di visualizzazione che avete appena selezionato e passare tra le modalità a contrasto elevato configurate.

Miracast: connessione wireless a un monitor o a una TV

Miracast è uno standard per la connessione senza fili ad un monitor. Può essere descritto come "HDMI via Wi-Fi", sostituendo il cavo dal Compact 10 HD al monitor o alla TV. Per poter usare la funzione Miracast del Compact 10 HD, il vostro monitor o TV deve supportare Miracast. Consultate il manuale del monitor o della TV e la documentazione per verificare che il vostro dispositivo sia compatibile con Miracast.

Per collegare Compact 10 HD ad un monitor o ad una TV via Miracast, toccate sul pulsante "Miracast" ed attivate l'opzione. Verrà mostrato l'elenco dei dispositivi disponibili. Cliccate su un dispositivo per collegarvi ad esso. L'operazione potrebbe durare fino ad un minuto. Toccate di nuovo sul dispositivo per scollegarvi. Quando viene stabilita una connessione Miracast, saranno trasmessi sia l'audio sia il video alla TV o al monitor. Per garantire una buona connessione, Compact 10 HD deve rimanere entro un metro dal monitor o dalla TV. In base alla connessione, si potrebbe notare un piccolo ritardo nella trasmissione del video e/o dell'audio.

Bluetooth (Solo Compact 10 HD Speech)

Per collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth, toccate il pulsante "Bluetooth" ed attivate il Bluetooth. Sarà visualizzato un elenco dei dispositivi associati.

Se non è stato associato nessun altoparlante o delle cuffie, toccate sul pulsante "Cerca" per individuare i dispositivi disponibili. Prima di avviare la ricerca Bluetooth, assicuratevi che l'altoparlante o le cuffie siano accesi e che siano individuabili. Consultate il manuale dell'altoparlante o delle cuffie per sapere come attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Per associare l'altoparlante o le cuffie, toccate sul nome del dispositivo e, se serve, digitate il codice pin. Consultate il manuale dell'altoparlante o delle cuffie per sapere il codice pin del dispositivo. Una volta associato il dispositivo, per collegarlo toccate sul nome. Vi sarà chiesto di collegarvi o di ignorare il dispositivo. Toccate il pulsante "Connetti" per effettuare la connessione.

Ad indicare che un dispositivo è collegato, ci sarà un segno di spunta a fianco del nome del dispositivo e quest'ultimo sarà evidenziato in blu. Per dissociare / ignorare un dispositivo, toccate sul pulsante "Ignora". Il dispositivo verrà rimosso dall'elenco dei dispositivi accoppiati.

Nota: Sono supportati solo altoparlanti o cuffie compatibili con Bluetooth versione 4.0 o superiore.

Riga

Questa opzione consente di cambiare la posizione della riga di lettura tra sei posizioni; orizzontale in alto, orizzontale al centro, orizzontale in basso, verticale a sinistra, verticale al centro, verticale a destra. Per default, la riga di lettura è impostata orizzontalmente al centro dello schermo.

Pulsanti

Questa opzione consente di cambiare la posizione della barra dei pulsanti tra due posizioni: in basso o laterale. In base alla scelta, è possibile cambiare la posizione della barra nella parte inferiore dello schermo o a lato dello schermo. L'impostazione predefinita è "in basso".

Tema

Questa opzione consente di selezionare un tema chiaro o scuro per i pulsanti e per i menu.



Colonne (Solo Compact 10 HD Speech)

Questa opzione consente di scegliere se Compact 10 HD Speech leggerà solo le colonne complete, o anche quelle incomplete. Di default, è selezionata Leggi solo colonne complete. Notate che se decidete di leggere delle colonne incomplete, non tutti i caratteri e le parole saranno acquisiti, e questo potrebbe generare un testo non coerente.

Luci

Questa opzione consente di attivare e disattivare le luci in modalità ingrandita ed in modalità panoramica. Le luci per l'ingrandimento si trovano a sinistra e a destra della fotocamera per l'ingrandimento. Di default, le luci di lettura sono abilitate per una qualità dell'immagine ottimale. Le luci per la fotocamera panoramica si trovano al fianco di quest'ultima. Di default, queste luci sono disabilitate.

Suoni

Questa opzione del menu consente di cambiare il volume, di disattivare il riscontro audio e di abilitare o disabilitare il riscontro tramite vibrazione. Di default, i suoni sono attivati e la vibrazione è disattivata.

Standby

Questa opzione consente di regolare il tempo dello standby. Il tempo di standby imposta dopo quanto va in standby Compact 10 HD per risparmiare energia. Premendo un tasto qualsiasi riattiverete l'apparecchio dallo standby. Per default lo standby è impostato su 5 minuti di inutilizzo, in pratica se per cinque minuti non viene premuto nessun pulsante e non viene rilevato nessuno spostamento del Compact 10 HD.

Lingua (Solo Compact 10 HD)

Questa opzione consente di scegliere la lingua di Compact 10 HD. Toccate per selezionare la lingua preferita per i menu.

Ripristina

Tocate su questa opzione se volete ripristinare le impostazioni predefinite. Sarà chiesta una conferma per proseguire. Per ripristinare le impostazioni selezionate “Sì”. Per annullare l'operazione, selezionare “No”.

6. Trasferire documenti sul PC

Per trasferire le immagini ed i documenti su un PC, sarà necessario un PC con Windows 10 ed il cavo USB in dotazione:

1. Accendete Compact 10 HD ed il PC;
2. Collegate Compact 10 HD al PC con Windows 10 tramite il cavo USB in dotazione. Compact 10 HD mostrerà brevemente l'icona "Collegato a PC";
3. Se collegate Compact 10 HD per la prima volta, aspettate che Windows termini di configurare il dispositivo;
4. In base alle impostazioni di Windows, Esplora file aprirà "CP10" e mostrerà la memoria condivisa interna;
5. Se Windows 10 non mostrasse automaticamente Compact 10 HD, aprite Esplora file e selezionate CP10;
6. Cliccate su Memoria interna e successivamente sulla cartella "DCIM";
7. La cartella "DCIM" contiene cartelle che hanno per nome la data e l'ora dell'acquisizione delle immagini. Ogni cartella contiene l'immagine presa e, se possedete un Compact 10 HD Speech, anche un documento .txt con il testo riconosciuto nell'immagine. Inoltre, la cartella contiene 2 file di sistema, un file JSON ed un file immagine.
8. Usate le classiche funzioni di copia e incolla per copiare le immagini su PC.

Compact 10 HD

Compact 10 HD Speech

Características y funciones avanzadas



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introducción

Gracias por adquirir Compact 10 HD o Compact 10 HD Speech.

Con su pantalla de 10", sus posibilidades de configuración y su funcionalidad intuitiva, Compact 10 HD ofrece todas las ventajas de un ampliador de vídeo de sobremesa pero en un diseño plegable, portátil y de un tamaño mucho menor. Con el brazo desplegado, Compact 10 HD permite ver fotos, firmar, leer los envases de los medicamentos o latas de forma cilíndrica sin ninguna restricción de movimiento. El brazo abatible de Compact 10 HD Speech permite escanear y leer páginas de texto completas.

Si tiene preguntas o sugerencias acerca del uso de este producto, póngase en contacto con su proveedor o con las oficinas centrales de Optelec haciendo uso de la información que encontrará en la última página de este manual. Valoramos su opinión. Esperamos que disfrute de su Compact 10 HD.

1.1 À propos de ce manuel

Chez Optelec, nous travaillons constamment à améliorer nos produits et leurs fonctions. Il est donc possible que ce manuel ne soit pas la plus récente édition. Veuillez télécharger la plus récente édition du manuel sur notre site www.optelec.com dans la section Support.



Ce manuel sert à vous familiariser avec les fonctions et les opérations de base du Compact 10 HD et Compact 10 HD Speech. Veuillez prendre le temps de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil. Sauf indication contraire, toutes les références au Compact 10 HD s'appliquent aussi au Compact 10 HD Speech. Les fonctions s'appliquant uniquement au Compact 10 HD Speech sont marquées du logo suivant.

1.2 Contenido de la caja?

El embalaje de Compact 10 HD contiene lo siguiente:

- El amplificador de vídeo Compact 10 HD o Compact 10 HD Speech
- Una funda de protección
- Un cargador USB con un cable USB-C
- 4 adaptadores de corriente para EEUU, UE, Reino Unido y Australia
- Una bayeta para la limpieza de la pantalla
- El documento Primeros pasos y funcionamiento
- El documento Mantenimiento y seguridad

Si su caja no contuviera alguno de estos elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

1.3. La pantalla

La pantalla táctil de Compact 10 muestra iconos que representan las funciones del producto. En esta sección podrá consultar el significado de los gráficos que aparecen en la pantalla.

Algunos de ellos son exclusivos de Compact 10 Speech. En la tabla siguiente se especifican las funciones que solo están disponibles en Compact 10 Speech. Ello también se indica con un icono azul en la documentación.




Icono	Descripción	Ambos o solo Speech	Modo
	Disminuye la ampliación de la imagen en pantalla.	Ambos	Modos Básico y Avanzado
	Hace una captura una imagen sin usar texto a voz.	Ambos	Modos Básico y Avanzado
	Hace una captura, escanea y lee el texto.	Solo Speech	Modo Avanzado
	permite cambiar la combinación de colores de la vista en tiempo real.	Ambos	Modos Básico y Avanzado

Icono	Descripción	Ambos o solo Speech	Modo
	Aumenta la ampliación de la imagen en pantalla.	Ambos	Modos Básico y Avanzado
	Abre el menú principal, que permite modificar la configuración del sistema.	Ambos	Modo Avanzado
	Muestra la fecha y la hora actuales.	Ambos	Modo Avanzado
	Fija el enfoque para mantenerlo en un elemento mientras otro se mueve en el encuadre de la cámara.	Ambos	Cámara de página completa en modos Básico y Avanzado
	Tocar para abrir el menú de volumen y velocidad de lectura. Pulsación larga para seleccionar una voz.	Solo Speech	Tras una captura con texto- a voz- en modos Básico y avanzado
	Cierra la captura.	Ambos	Tras una captura en modos Básico y Avanzado

Icono	Descripción	Ambos o solo Speech	Modo
	Ajusta el volumen.	Solo Speech	Tras abrir el menú de volumen y velocidad de lectura en modos Básico y Avanzado
	Ajusta la velocidad de lectura.	Solo Speech	Tras abrir el menú de volumen y velocidad de lectura en modos Básico y Avanzado
	Inicia o pausa la lectura.	Solo Speech	Después de texto a voz
	Toque para cambiar el modo de visualización. Pulsación larga para conmutar entre los modos Básico y Avanzado.	Ambos	Modos Básico y Avanzado

Icono	Descripción	Ambos o solo Speech	Modo
	Permite seleccionar, agregar y eliminar idioma y voz de lectura y de menús.	Solo Speech	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado
	Define el uso de resaltado, subrayado o recuadro para marcar la posición actual en el texto capturado.	Solo Speech	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado
	Utilice Miracast para conectar a una monitor o televisor por Wi-Fi.	Ambos	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado
	Utilice Bluetooth para vincular auriculares o altavoces.	Solo Speech	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado

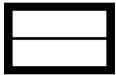Icono	Descripción	Ambos o solo Speech	Modo
	Permite activar una línea de lectura en la pantalla.	Ambos	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado
	Cambia la posición de la barra de botones.	Ambos	Al cambiar la configuración del menú en modo Avanzado
	Muestra el estado de la batería. Un símbolo de rayo indica que la batería está en carga.	Ambos	Desde el menú principal en modo Avanzado
	Barra de brillo.	Ambos	Desde el menú principal en modo Avanzado
	Muestra un menú de configuración que permite modificar opciones tales como la apariencia de las imágenes y el sonido.	Ambos	Desde el menú principal en modo Avanzado

2. Cómo empezar a trabajar

Compact 10 HD está en la posición correcta cuando la pantalla está hacia arriba y hacia usted y el logotipo de Optelec está debajo de la pantalla.



2.1. Cargar la batería

Compact 10 HD se distribuye con un alimentador y adaptadores de corriente para EEUU, la UE, Reino Unido y Australia. Inserte en el alimentador el adaptador adecuado para su país hasta que haga clic.

Debe cargar la batería antes de utilizar el equipo por primera vez. Para cargar Compact 10 HD, conecte el cable USB que se proporciona con el producto al alimentador y al conector azul situado en el lateral izquierdo del equipo. Conecte el alimentador a un enchufe estándar.



Batería llena



Batería en carga



Batería muy baja

Compact 10 HD tarda unas 3,5 horas en cargarse. Con la carga completa, el equipo permite hasta 3,5 horas de uso, dependiendo de la configuración utilizada. Por razones de seguridad, cargue Compact 10 HD únicamente con el alimentador y el cable USB que se proporcionan con el producto.

Aviso de batería

Compact 10 HD mostrará brevemente un icono de batería baja para indicar que el equipo debe cargarse. Cuando la batería se descarga completamente, el equipo se apaga automáticamente.

Si Compact 10 HD no se enciende, asegúrese de que está cargado.

2.2. Encender y apagar el quipo



Es necesario cargar Compact 10 HD antes de encenderlo por primera vez. Una vez cargado, mantenga pulsado el botón naranja de Encendido/Apagado durante tres segundos. Para apagar Compact 10 HD, vuelva a pulsar el botón naranja durante 3 segundos. Cuando se enciende el equipo, la imagen tarda unos 20 segundos en aparecer en pantalla.

Suspensión



Para poner Compact 10 HD en modo suspensión, pulse brevemente el botón naranja de Encendido/Apagado. El equipo pasará al modo suspensión automáticamente si no se toca ningún botón y no se detecta ningún movimiento durante un tiempo que puede configurarse. Si pulsa el botón naranja de Encendido / Apagado, el equipo volverá a activarse. El tiempo del modo suspensión puede desactivarse o modificarse en el menú de Compact 10 HD. Para más información, consulte el capítulo 5.4.

2.3. Plegar y desplegar Compact 10 HD

Cuando Compact 10 HD está desplegado, la pantalla queda dispuesta en un ángulo ergonómico para la lectura, y se activa la cámara de ampliación.

Para **abrir** Compact 10 HD, siga estos pasos:

1. Coloque el equipo frente a usted, con la pantalla hacia arriba y el logotipo de Optelec debajo de la misma.
2. Sostenga Compact 10 HD en posición vertical. Sujete con los pulgares los laterales del equipo y los laterales del soporte con el resto de los dedos.

3. Coloque los dedos en los bordes de los laterales del soporte, en la hendidura que se forma en la parte posterior del equipo.
4. Despliegue el soporte hasta que encaje y quede en una posición estable.

Para **cerrar** Compact 10 HD, siga estos pasos:

1. Coloque Compact 10 HD con la pantalla mirando hacia usted.
2. Sostenga el equipo por los laterales y coloque los dedos en los tensores que se encuentran entre el soporte y el equipo.
3. Empuje suavemente los tensores hacia usted hasta que se doblen.
4. Incline la pantalla hacia abajo hasta que encaje.

2.4. Limpiar la ventana de la cámara


Para obtener una calidad de imagen óptima, se recomienda mantener limpias las ventanas de las lentes y de las luces de la cámara. Si la ventana de la cámara está sucia, la imagen puede aparecer borrosa y el enfoque automático puede no ser correcto. Limpie la ventana de la cámara con la bayeta que se suministra con el equipo o con paño adecuado para la limpieza de lentes.

Nota: No limpie la ventana de la cámara con agua ni con productos de limpieza.



2.5. Botones y conectores

En el lateral izquierdo de Compact 10 HD se encuentran los siguientes botones y conectores:

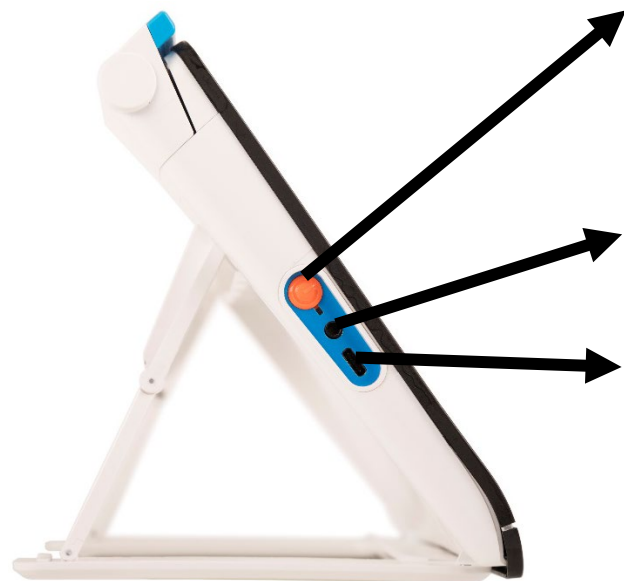

Botón de Encendido / Apagado

Una pulsación corta del botón naranja activa o desactiva el modo suspensión de Compact 10 HD. Si se pulsa el botón durante 6 segundos, el dispositivo se apagará o encenderá.

Conector de audio

El conector de audio permite conectar auriculares a Compact 10 HD.

Conector USB-C

El conector USB-C permite cargar Compact 10 HD. El cable USB que se suministra con el equipo se conecta a este puerto y al alimentador. Cargue y utilice Compact 10 HD únicamente con el alimentador que se suministra con el equipo.

3. Cámaras

Compact 10 HD está equipado con tres cámaras, que se utilizan para distintas tareas y situaciones. Todas las cámaras pueden utilizarse en los dos modos, Básico y Avanzado. Si la imagen en pantalla parece desenfocada, toque la pantalla para que la cámara vuelva a enfocar y así obtener una imagen nítida.

3.1. Cámara de ampliación

La cámara de ampliación se activa cuando Compact 10 HD está en posición abierta con el soporte desplegado y se utiliza para leer en una mesa o escritorio. Compact 10 HD se coloca sobre el material de lectura.

3.2. Cámara de página completa

La cámara de página completa se activa cuando se abre el brazo abatible de la cámara y se utiliza para visualizar fotos y objetos de una forma más cómoda, o para firmar sin restricciones de movimiento.

Enfoque fijo

El enfoque automático puede fijarse para escribir o visualizar objetos a una distancia fija. Para activar o desactivar el enfoque fijo, utilice el icono en forma de lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.



Si dispone de Compact 10 HD Speech, podrá también utilizar la cámara de página completa para escanear y leer documentos que ocupen toda la página. Para ello, coloque bajo la cámara el documento que desea leer, alineando la esquina inferior izquierda del mismo con el indicador azul que se encuentra en la parte derecha de la base de Compact 10 HD Speech.

3.3. Cámara de vista general

La cámara de vista general se activa cuando se enciende Compact 10 HD con el soporte cerrado. para conmutar de la cámara de ampliación a la de vista general, cierre el soporte y pulse el botón de Encendido/Apagado. La cámara de vista general resulta especialmente útil para ver objetos a corta distancia.



4. Utilizar las funciones de texto a voz y OCR

Si trabaja con Compact 10 HD Speech, podrá hacer una captura para su reconocimiento. Compact 10 HD Speech extrae el texto de la imagen y lo lee en voz alta.



4.1 Activar la respuesta de voz

Para hacer una captura y activar la respuesta de voz, proceda del modo siguiente:

- Sitúe el texto o parte del mismo bajo la cámara y pulse el botón de captura con reconocimiento y lectura. Para capturar una página completa, utilice la cámara de página completa y asegúrese de que la esquina inferior izquierda del documento está alineada con el indicador azul que se encuentra en la parte derecha de Compact 10 HD Speech. Para obtener un resultado óptimo, asegúrese de que la iluminación del entorno es suficiente, evite las sombras y limite el texto a la porción del documento que desea leer. Si el texto visualizado es de un tamaño demasiado pequeño, el reconocimiento puede perder precisión o no llevarse a cabo.
- Verá una barra de progreso. Compact 10 HD Speech empezará a leer una vez que el proceso de reconocimiento haya terminado.
- Utilice el botón Reproducir/Pausa para iniciar o detener la lectura

- Haga un toque largo sobre el texto para empezar a leer a partir de la palabra o sección de texto señaladas.
- Pulse el botón “Modo” para ver el texto capturado en el modo de vista seleccionado y conmutar entre los colores de alto contraste seleccionados. Para obtener más información, consulte el capítulo 5.4 Vista y Color.
- Si no hay texto, aparecerá el mensaje "no hay texto".

4.2 Ajustar el volumen y la velocidad de lectura

Para ajustar el volumen y la velocidad de lectura, active la barra de botones con un solo toque. Toque el botón Audio para ver las barras de "Volumen" y "Velocidad". Estas barras solo se muestran en la vista de captura.

4.3 Cambiar el idioma y la voz

Para cambiar el idioma y la voz en el Modo Básico, mantenga pulsado el botón Audio para abrir el menú Voz. Para cambiar el idioma y la voz en el Modo Avanzado, pulse el botón "Menú" y después el menú "Voz". Para obtener más información acerca de cómo navegar por el menú "Voz", consulte el capítulo 5.3., Voz.

4.4 Modo tabla

El modo normal de lectura lee por columnas, que es la forma correcta de leer periódicos y revistas. Pero puede darse el caso de que queramos leer la carta del restaurante, un recibo, una tabla o cualquier otro tipo de texto en formato tabla. Si pulsa y mantiene pulsado botón de captura, Compact 10 HD Speech leerá todo el texto de la línea, de izquierda a derecha, y después pasará a la línea siguiente. Cuando se sale de la captura actual y se toma otra, Compact 10 HD Speech vuelve automáticamente al modo de lectura normal.


5. Los modos Básico y Avanzado

La primera vez que se utiliza el dispositivo, este activa el modo Básico. Para conmutar entre los modos Básico y Avanzado, mantenga pulsado el botón Modo y después toque Básico o Avanzado. El **modo Básico** permite acceder a las funciones principales.


- Ajustar la ampliación
- Seleccionar un modo de vista
- Hacer una captura (Compact 10 HD)
- Hacer una captura para reconocimiento y lectura del texto (Compact 10 HD Speech)
- Conmutar entre la cámara de ampliación y la de vista general

El **modo Avanzado** ofrece todas las funciones disponibles en el modo Básico más algunas funciones adicionales.


- Fecha y hora
- Desde el menú, tendrá acceso a las siguientes opciones:
 - Guardar y abrir capturas
 - Cambiar el idioma y la voz de lectura
 - Cambiar los modos de color
 - Activar la Línea guía
 - Bluetooth audio y Miracast
 - Otras opciones avanzadas
 - Hacer una captura (Compact 10 HD Speech)

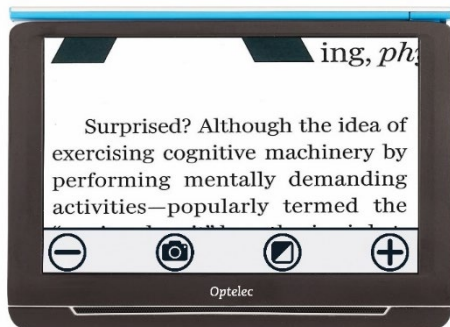


Compact 10 HD Modo Básico

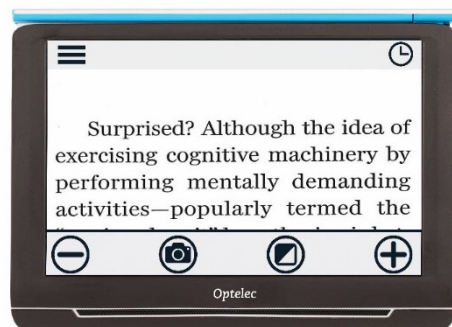

Compact 10 HD Modo Avanzado

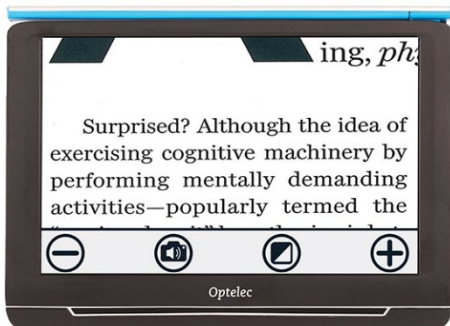

Compact 10 HD Speech Modo Básico

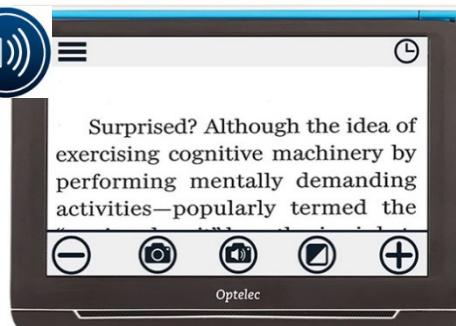

Compact 10 HD Speech Modo Avanzado

5.1 Funciones del modo Básico

Ajustar la ampliación



Para modificar la ampliación, simplemente toque la pantalla. La barra de botones se mostrará en la parte inferior o en el lateral derecho de la pantalla, en función de la posición que se haya seleccionado. La posición de la barra de botones se selecciona en el menú. Para más información acerca de cómo cambiar la posición de la barra de botones, consulte el capítulo 5. En la barra de botones, toque el botón + para



aumentar la ampliación o el botón – disminuirla. También podrá modificar la ampliación con el gesto Ampliar-reducir. Toque la pantalla para ocultar la barra de botones. Ésta se oculta automáticamente cuando no se hace ningún toque en la pantalla durante 10 segundos.

Seleccionar un modo de vista



Toque el botón Modo, situado en el centro de la barra de botones, para seleccionar uno de los modos de vista siguientes:

- **Modo Foto:** Permite visualizar fotos y texto a todo color
- **Modo Negativo:** Permite leer en alto contraste, blanco sobre negro
- **Modo Positivo:** Permite leer en alto contraste, negro sobre blanco
- Alto contraste **combinación de colores 1**
- Alto contraste **combinación de colores 2**



Hacer una captura de una imagen (Compact 10 HD)

Si trabaja con Compact 10 HD, pulse el botón Captura para hacer una captura. Podrá modificar la ampliación y el modo de visualización de la misma. Pulse la X que se encuentra en la esquina superior derecha para cerrar la captura y volver al modo de vídeo a tiempo real.

Hacer una captura para reconocimiento y lectura del texto (Compact 10 HD Speech)



Si trabaja con Compact 10 HD Speech, pulse el botón Captura con reconocimiento y lectura para hacer una captura y hacer que se lea en voz alta. Utilice el botón Reproducir/Pausa para iniciar o detener la lectura. Cuando se hace una captura para su reconocimiento y lectura, es posible cambiar la vista y el nivel de ampliación, cambiar de voz y modificar el volumen y la velocidad de lectura. Pulse la X que se

encuentra en la esquina superior derecha para cerrar la captura con reconocimiento y lectura y volver al modo de vídeo en tiempo real. Para obtener más información acerca del uso de la función de texto a voz, consulte el capítulo 4.

Ajustar contraste

Si los caracteres u otros elementos en pantalla no se visualizan con claridad en el modo de alto contraste seleccionado, es posible mejorar la imagen y aumentar la nitidez. Para ajustar el contraste, haga un toque con tres dedos en la pantalla táctil durante unos 3 segundos, y aparecerá una barra. Desplácese a derecha o izquierda para ajustar el contraste. Para volver a la configuración predeterminada, pulse el botón Restaurar. Toque cualquier punto de la pantalla para salir.

5.2. Funciones del Modo Avanzado

El modo Avanzado ofrece todas las funciones disponibles en el modo Básico más algunas funciones adicionales.

Fecha y hora

Para abrir el reloj, toque la pantalla y a continuación haga un toque en el icono del "Reloj" que se encuentra en la esquina superior derecho de la schermo.

Utilice la "Barra Atrás" para salir de la pantalla de fijar fecha y hora.

Para fijar la hora y la fecha, haga un toque en la hora o en la fecha. Para modificar un valor, haga un toque en el campo que desee modificar y toque los símbolos arriba o abajo para cambiar el valor. Haga un toque en la "Barra Atrás" para salir de la pantalla de fijar fecha y hora.

Hacer una captura de una imagen (Compact 10 HD Speech)




Si trabaja con Compact 10 HD Speech y desea capturar una imagen sin que el equipo reconozca el texto, pulse el botón captura. Podrá modificar la ampliación y el modo de visualización de la misma. Pulse la X que se encuentra en la esquina superior derecha para cerrar la captura y volver al modo de vídeo a tiempo real.

5.3 Menú

Abrir y cerrar el menú

Para abrir el menú, toque la pantalla y a continuación haga un toque en el icono del "Menú" que se encuentra en el borde izquierdo de la misma. Se abrirá el menú principal. Para cerrar el menú, toque la "barra Atrás".

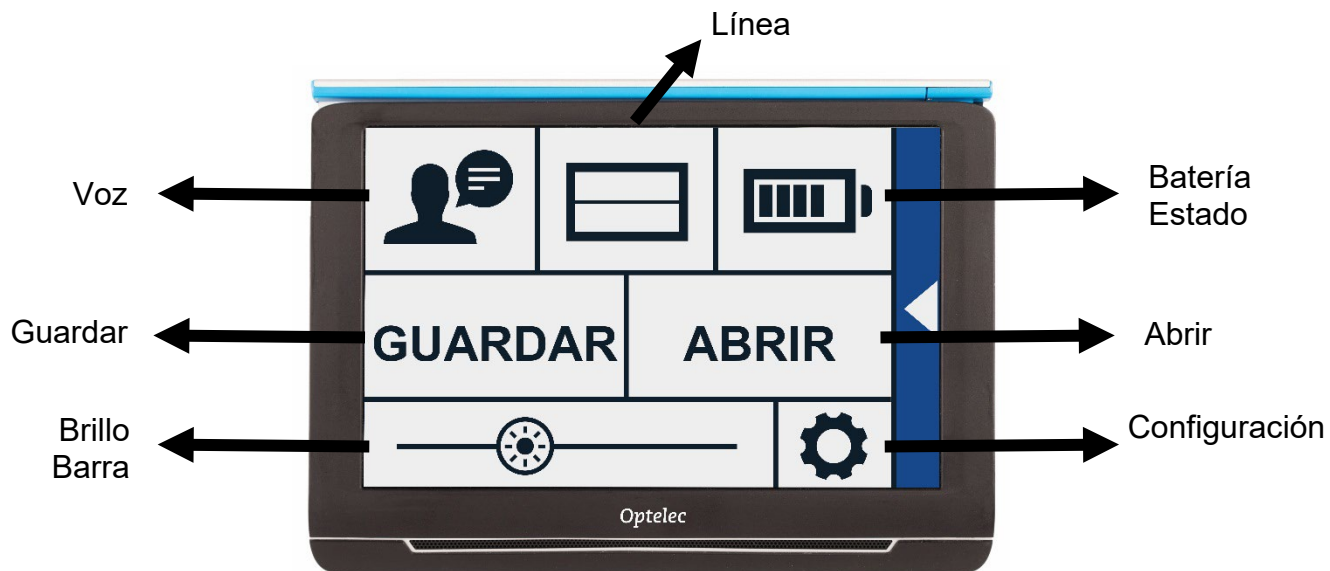

Los elementos del menú variarán en función de si se trabaja con Compact 10 HD o con Compact 10 HD Speech. Para activar un botón, haga un toque en él. Cuando se activa un botón, se abre una nueva pantalla del menú o una lista. Para volver al menú principal, toque la "barra Atrás". Para ajustar las barras, toque, mantenga el toque y desplácese a derecha o izquierda.

El menú principal contiene las siguientes opciones:

- Voz (sólo Compact 10 HD Speech)
- Línea activada/desactivada
- Estado de la batería
- Guardar
- Abrir
- Barra de brillo
- Configuración



Voz (sólo Compact 10 HD Speech)

para seleccionar una voz, un idioma o el idioma del menú, o para agregar o eliminar una voz o idioma, abra el menú y toque el botón "Voz".

Seleccionar voz, idioma e idioma del menú

Este elemento de menú permite seleccionar la voz y el idioma de lectura. para seleccionar otra voz de lectura, toque el icono Voz situado en la esquina superior izquierda del menú principal para abrir la lista de las voces preseleccionadas. Cada voz representa un idioma. Toque una voz para seleccionarla. Si, al seleccionar una voz de lectura, se cambia de idioma, los menús cambiarán automáticamente a dicho idioma.

Agregar o eliminar una voz o idioma

Para agregar o eliminar una voz o idioma, toque el icono Voz que se encuentra en la esquina superior izquierda del menú principal. En la lista de voces preseleccionadas, toque el botón "Agregar/Eliminar". Para agregar o eliminar una voz de lectura, seleccione el idioma en la lista haciendo un toque en él. Aparecerá la lista de las voces disponibles para el idioma seleccionado. Para activar una voz de lectura, selecciónela haciendo un toque en ella. Una marca de verificación delante del nombre de la voz indicará si está activada. Las voces activadas estarán disponibles en el botón "Voz" del menú principal. Si se elimina la selección de una voz, ésta ya no estará entre las voces de lectura disponibles. Los idiomas que tienen una voz de lectura seleccionada se mostrarán al principio de la lista de idiomas y presentarán una marca de verificación.

Cambiar el idioma y la voz en el Modo Básico

No es posible acceder al menú desde el modo Básico. Para cambiar el idioma y la voz en el Modo Básico, mantenga pulsado el botón "Audio" para abrir directamente el menú Voz y siga los pasos antes descritos.

Línea activada/desactivada

Compact 10 HD permite activar una línea guía que le ayudará a situar el equipo en el documento. Para activar la línea guía, toque el botón "Línea". Vuelva a tocar el botón para ocultar la línea.

Estado de la batería

El estado de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Si se hace un toque en el icono de la batería, se abre una nueva pantalla con un icono de batería y el estado de la batería ampliados, el botón "Acerca de" y la "flecha Atrás" para volver al menú principal. El símbolo de un relámpago indica que la batería está en carga.

Acerca de

Toque el botón "Acerca de" en la pantalla de la batería para ver la versión de la aplicación.

Guardar

Esta opción solo está disponible en el modo Avanzado.

Para guardar una captura, abra el menú y toque el botón "Guardar".

- Haga una captura con el botón de Captura
- Abra el menú
- Pulse el botón Guardar para guardar la captura

Si no hay capturas que guardar, el botón "Guardar" estará oculto.

Abrir

Para abrir una captura, abra el menú y toque el botón "Abrir". Se mostrará una lista en miniatura de las capturas guardadas, empezando por la última que se guardó. Si existen más capturas de las que pueden mostrarse en una pantalla, deslícese arriba o abajo para desplazar la pantalla. Toque una miniatura para abrir la captura correspondiente.

Eliminar

Para eliminar una captura, abra el menú y toque el botón "Abrir". En la pantalla abrir, toque el botón "Eliminar". Se mostrará una lista en miniatura de las capturas guardadas, empezando por la última que se guardó. Cada captura presenta una casilla de verificación en la esquina superior derecha. Para seleccionar una captura, verifique la casilla. Toque el botón "Eliminar" para borrar las capturas seleccionadas. Para eliminar todas las capturas, toque el botón "Eliminar" sin seleccionar ninguna captura. Aparecerá un mensaje de confirmación de que desea eliminar todas las capturas. Para borrarlas, seleccione "Sí". Cancelar, seleccione "No". Ambas acciones le devolverán a la lista de capturas. Toque la "barra Atrás" para volver a la pantalla "Abrir". Vuelva a tocar la "barra Atrás" para volver al menú principal.


Ajustar el brillo

Utilice la barra con el símbolo de un sol para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla.

5.4 Configuración

Toque el botón "Configuración" para entrar en el menú Configuración. El botón de "Configuración" se encuentra en la esquina inferior derecha y presenta un icono en forma de rueda dentada. El menú Configuración contiene los botones siguientes:

- Color
- Vista (sólo Compact 10 HD Speech)
- Miracast
- Bluetooth (solo Compact 10 HD Speech)
- Línea
- Botones
- Tema
- Columnas (sólo Compact 10 HD Speech)
- Luces
- Sonido
- Standby
- Idioma (solo Compact 10 HD)
- Restaurar

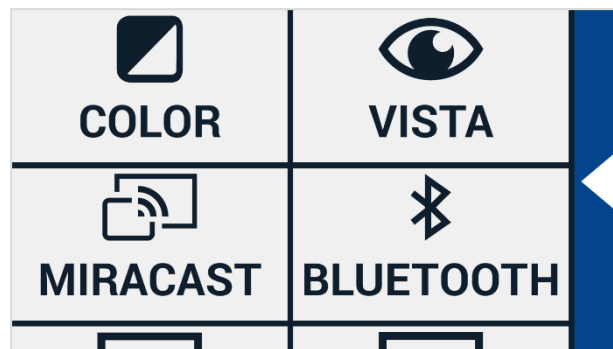

Color

En el menú configuración, toque el botón "Color" para seleccionar la combinación de colores de alto contraste que prefiera. Compact 10 HD ofrece cuatro modos de alto contraste. Es posible seleccionar los colores de fondo y texto para cada uno de estos cuatro modos. El primer modo de alto contraste arriba a la izquierda no puede desactivarse.

Para cambiar los colores de fondo y texto, toque la flecha arriba o abajo que se encuentra junto al modo que desea modificar. De esta forma conmutará entre los distintos modos disponibles y podrá detenerse en el que prefiera. Para desactivar un modo de alto contraste, seleccione el símbolo "X". Toque la barra "Atrás" para volver al menú Configuración.






Vista (sólo Compact 10 HD Speech)

En el menú configuración, toque el botón "Vista" para configurar la apariencia del texto capturado cuando trabaje con la función de Texto a voz. Para configurar la apariencia de todo el texto, pulse el botón Modo para conmutar entre los distintos modos de vista: original, Línea y Columna. Para configurar la apariencia de la palabra que se está leyendo, pulse el botón Resaltado para conmutar entre los distintos modos de resaltado: Rectángulo y Subrayado.

Cuando trabaje con la función de texto a voz, toque el botón Modo en la barra de botones para ver el texto capturado en el modo de visualización que ha seleccionado y para conmutar entre los colores de alto contraste configurados.

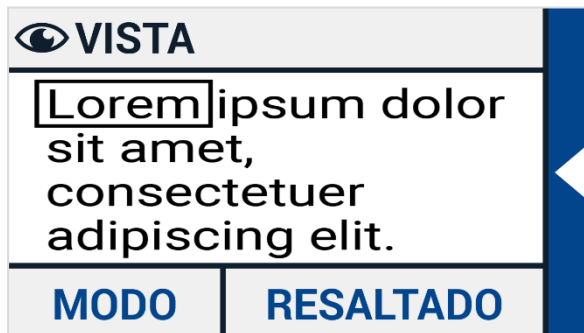

Miracast: conexión inalámbrica con un monitor o televisor

Miracast es un protocolo de conexión inalámbrica con un monitor. Podría describirse como "HDMI sobre Wi-Fi", por lo que sustituiría el cable de conexión entre Compact 10 HD y el monitor o televisor. Pero, para que sea posible utilizar la función Miracast de Compact 10 HD, es necesario que el monitor o televisor también la incluya. Consulte el manual y la documentación de su monitor o televisor para comprobar si este trabaja con el protocolo Miracast.

Para conectar Compact 10 HD a un monitor o televisor vía Miracast, toque el botón "Miracast" y active Miracast. Se mostrará la lista de los dispositivos disponibles. Haga clic en un dispositivo para conectar. La conexión podría tardar hasta un minuto en establecerse. Vuelva a hacer un toque en el dispositivo para desconectar. Cuando se establece una conexión vía Miracast, tanto el audio como el vídeo se envían al monitor o televisor. Para que la calidad de la conexión sea óptima, Compact 10 HD debe estar a una distancia de un metro del monitor o televisor. Dependiendo de la conexión, podría apreciarse un pequeño retardo en el vídeo y/o audio.



Bluetooth (sólo Compact 10 HD Speech)

para conectar un altavoz o unos auriculares Bluetooth, toque el botón "Bluetooth" y active el Bluetooth. Se mostrará la lista de los dispositivos vinculados.

Si no hay altavoces ni auriculares vinculados, toque el botón "Buscar" para que el equipo busque los dispositivos disponibles. Antes de iniciar la búsqueda, asegúrese de que el altavoz o los auriculares están encendidos y en modo visible. Consulte la documentación del altavoz o los auriculares para averiguar cómo poner el dispositivo en modo visible. Para vincular el altavoz o los auriculares, haga un toque en el nombre del dispositivo e introduzca el código pin si es necesario. Consulte el código pin del dispositivo en el manual correspondiente. Una vez que el dispositivo esté vinculado, para conectarlo, haga un toque en el dispositivo. se le preguntará si desea conectar o ignorar el dispositivo. Toque el botón "Conectar" para establecer la conexión.

Para indicar que un dispositivo está conectado, éste presentará una marca de verificación y se mostrará de color azul.

Para desvincular / ignorar un dispositivo, toque el botón "Desvincular". El dispositivo se eliminará de la lista de dispositivos vinculados.

Nota: Solo es posible trabajar con auriculares y altavoces Bluetooth versión 4.0 o superior

Línea

Este elemento de menú permite cambiar la posición de la línea guía seleccionando una de las seis posiciones disponibles: horizontal arriba, horizontal centro, horizontal abajo, vertical izquierda, vertical centro y vertical derecha. De forma predeterminada, la línea guía está en horizontal y se sitúa en el centro de la pantalla.

Botones

Este elemento de menú permite situar la barra de botones en dos posiciones diferentes: abajo o lateral. Cada usuario puede situar la barra de botones donde le resulte más cómodo, en la parte inferior o en el lateral de la pantalla. La opción predeterminada es "Abajo".

Tema

Este elemento de menú permite seleccionar un tema claro u oscuro para los botones y menús.



Columnas (sólo Compact 10 HD Speech)

Este elemento de menú permite activar si se desea que Compact 10 HD Speech lea únicamente las columnas completas o también las incompletas. De forma predeterminada está seleccionada la opción Leer solo columnas completas. tenga en cuenta que si decide que el dispositivo lea también las columnas incompletas, pueden aparecer incoherencias en el texto, ya que se leerán fragmentos en los que no se han capturado todos los caracteres.

Luces

Este elemento de menú permite activar o desactivar las luces en los modos Ampliación y Vista general. Las luces de Ampliación se encuentran situadas a izquierda y derecha de la cámara de ampliación. De forma predeterminada, las luces de lectura están activadas para obtener una imagen de calidad óptima.

La luz de Vista general se encuentra junto a la cámara de vista general. De forma predeterminada la luz de vista general está desactivada.

Sonido

Este elemento de menú permite subir y bajar el volumen, silenciar la respuesta de voz y activar o desactivar los avisos de vibración del equipo. De forma predeterminada, el sonido está activado y la vibración está desactivada.

Standby

Este elemento de menú permite ajustar el tiempo de suspensión. El tiempo de standby define el tiempo tras el cual Compact 10 HD entrará en modo suspensión para ahorrar energía. El modo suspensión se desactivará cuando se pulse un botón. De forma predeterminada, el tiempo de espera es de 5 minutos sin que se pulse ningún botón o Compact 10 HD detecte ningún movimiento.

Idioma (solo Compact 10 HD)

Este elemento de menú permite seleccionar el idioma de Compact 10 HD. Toque para seleccionar el idioma del menú.

Restaurar

Toque este elemento de menú si desea restaurar la configuración predeterminada. Verá un mensaje de confirmación. Para restaurar la configuración, seleccione "Sí". Para cancelar, seleccione "No".

6. Transferir documentos al PC

Para transferir capturas y documentos a un PC, necesitará un ordenador con Windows 10 y el cable USB que se suministra con Compact 10. Siga estos pasos:

1. Encienda Compact 10 HD y el PC.
2. Conecte Compact 10 HD al PC con el cable mencionado. Compact 10 HD mostrará brevemente el icono "Conectado al PC".
3. La primera vez que conecte Compact 10 HD deberá esperar a que Windows termine de configurar el dispositivo.
4. Si está dispuesto así en la configuración de Windows, el Explorador de Windows abrirá el dispositivo "CP10" y mostrará la carpeta "Internal Shared Storage".
5. Si Windows 10 no muestra automáticamente el dispositivo Compact 10 HD, abra el Explorador de Windows y seleccione "CP10".
6. Haga clic en "Internal Shared Storage" y a continuación en la carpeta "DCIM".
7. la carpeta "DCIM" contiene subcarpetas cuyo nombre es la hora y la fecha de las fotos que se han tomado. En las subcarpetas encontrará la foto y, si trabaja con Compact 10 HD Speech, un archivo .txt con el texto de la misma. Además, la carpeta contendrá dos archivos de sistema, uno con extensión JSON y otro con la foto procesada.
8. Para copiar los archivos al PC, utilice copiar y pegar.

Compact 10 HD Compact 10 HD Speech

Erweiterte Ausstattungsmerkmale und Funktionen



Optelec
Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 678 3555
E-Mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Compact 10 HD oder des Compact 10 HD Speech!

Mit seinem großen 25,4cm (10-Zoll)-Bildschirm, den anpassbaren Funktionen und der intuitiven Bedienung bietet der Compact 10 HD alle Vorteile eines Bildschirmlesegerätes, jedoch in einem viel kleineren, faltbaren und tragbaren Design. Mit ausgeklapptem Arm können Sie problemlos Fotos ansehen, Ihre Unterschrift setzen, Arzneimittelverpackungen anzeigen und sogar Texte auf runden Dosen lesen, ohne in Ihren Bewegungen eingeschränkt zu sein. Beim Compact 10 HD Speech können Sie mit dem ausschwenkbaren Arm ganze Textseiten scannen und vorlesen lassen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder die Optelec GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuches. Ihre Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Compact 10 HD!

1.1. Über dieses Handbuch

Hier bei Optelec entwickeln wir unsere Produkte und deren Funktionen permanent weiter. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass dieses Handbuch nicht die aktuellste Ausgabe ist. Bitte laden Sie sich bei Bedarf eine aktuellere Ausgabe dieses Handbuchs von www.optelec.com und dort aus dem Supportbereich herunter.

Dieses Handbuch wird Sie mit den Eigenschaften und den grundlegenden Funktionen des Compact 10 HD und des Compact 10 HD Speech vertraut machen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. Sofern nicht anders angegeben, gelten alle Referenzen zum Compact 10 HD auch für den Compact 10 HD Speech. Funktionalitäten, die sich nur auf den Compact 10 HD Speech beziehen, sind mit diesem Sprachlogo gekennzeichnet. In diesem Handbuch wird die Bezeichnung “Text to Speech” benutzt. “Text to Speech” ist das Erfassen eines gedruckten Textes mit nachfolgender Sprachausgabe.



1.2. Was gehört zum Lieferumfang?

Das finden Sie in der Verpackung des Compact 10 HD:

- Compact 10 HD oder Compact 10 HD Speech
- Eine Schutztasche
- Ein USB-Netzteil mit USB-C-Kabel
- 4 länderspezifische Netzteiladapter (EU, US, UK und AU)
- Ein Bildschirmreinigungstuch
- Einrichtung und Benutzung
- Sicherheit und Pflege

Sollte einer dieser Artikel in Ihrem Paket fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1.3. Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Auf dem Touchscreen des Compact 10 werden Symbole verwendet, um die Produktfunktionen darzustellen. Verwenden Sie diesen Abschnitt als Referenz, um die Grafiken auf dem Bildschirm zu verstehen.

Einige Grafiken erscheinen nur, wenn Sie einen Compact 10 Speech besitzen. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wenn Funktionen nur in der Speech Version verfügbar sind. Ein blaues Symbol in der Dokumentation zeigt außerdem an, dass es nur in der Speech Version verfügbar ist.




Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Die Vergrößerung des Bildes auf dem Bildschirm verringern.	Immer	Einfacher und Erweiterter Modus
	Schnappschuss eines Bildes aufnehmen, ohne den Text in Sprache umzuwandeln.	Immer	Einfacher und Erweiterter Modus
	Schnappschuss eines Bildes aufnehmen, Text erkennen und vorlesen.	Nur Speech	Erweiterter Modus

Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Ändert die Farbkombination, die für die Anzeige der Live-Ansicht verwendet wird.	Immer	Einfacher und Erweiterter Modus
	Die Vergrößerung des Bildes auf dem Bildschirm erhöhen.	Immer	Einfacher und Erweiterter Modus
	Öffnet das Hauptmenü, wo Sie Systemeinstellungen ändern können.	Immer	Erweiterter Modus
	Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum.	Immer	Erweiterter Modus
	Setzen Sie die Fokussperre, so dass die Schärfe auf einem Objekt bleibt, während ein anderes Objekt im Kamerabereich bewegt wird.	Immer	Ganzseitenkamera im Einfachen und Erweiterten Modus

Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Antippen, um das Menü für Lautstärke und Lesegeschwindigkeit zu öffnen. Lang drücken, um eine Stimme auszuwählen.	Nur Speech	Nach der Aufnahme -eines Text-zu--Sprache Schnappschusses im Einfachen und Erweiterten Modus
	Den Schnappschuss schließen.	Immer	Nach der Aufnahme eines Schnappschusses im Einfachen und Erweiterten Modus
	Lautstärke anpassen.	Nur Speech	Nach dem Öffnen des Menüs für Lautstärke und Lesegeschwindigkeit im Einfachen und Erweiterten Modus

Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Lesegeschwindigkeit anpassen.	Nur Speech	Nach dem Öffnen des Menüs für Lautstärke und Lesegeschwindigkeit im Einfachen und Erweiterten Modus
	Vorlesen starten und pausieren.	Nur Speech	Nach Text-zu-Sprache
	Antippen, um den Ansichtsmodus zu ändern. Lang drücken, um zwischen Einfachen und Erweiterten Modus zu wechseln.	Immer	Einfacher und Erweiterter Modus
	Hinzufügen, Entfernen und Auswählen der Lesestimme und -sprache sowie der Menüstimme und -sprache.	Nur Speech	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus

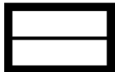Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Legen Sie fest, ob Hervorhebungen, Unterstreichungen oder Umrandungen verwendet werden, um die aktuelle Position im erfassten Text anzuzeigen.	Nur Speech	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus
	Verwenden Sie Miracast, um sich mit einem Fernseher oder Monitor via WiFi zu verbinden.	Immer	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus
	Verwenden Sie Bluetooth, um sich mit Lautsprechern oder Kopfhörern via WiFi zu koppeln.	Nur Speech	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus
	Legen Sie fest, ob eine Leselinie auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.	Immer	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus

Symbol	Beschreibung	Immer oder nur Speech	Vorkommen
	Ändern Sie die Position der Schaltflächenleiste.	Immer	Beim Ändern der Menüeinstellungen im Erweiterten Modus
	Zeigt den Akkustatus. Ein Blitzsymbol bedeutet, dass der Akku geladen wird.	Immer	Im Hauptmenü des Erweiterten Modus
	Helligkeitsregler.	Immer	Im Hauptmenü des Erweiterten Modus
	Zeigt ein Menü an, in dem Sie Einstellungen ändern können, wie etwa Bilder auf dem Bildschirm angezeigt werden oder Einstellungen für die Soundausgabe.	Immer	Im Hauptmenü des Erweiterten Modus

2. Erste Schritte

Der Compact 10 HD ist korrekt vor Ihnen platziert, wenn der Bildschirm nach oben und in Ihre Richtung zeigt. Das Optelec-Logo befindet sich unterhalb des Bildschirms.

2.1. Aufladen des Akkus

Der Compact 10 HD wird mit einem Netzteil und vier länderspezifischen Netzsteckern in den Ausführungen EU, US, UK und AU geliefert. Schieben Sie den für Ihre Region passenden Stecker auf das Netzgerät, bis er einrastet.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Um den Compact 10 HD aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Netzteil und den blauen USB-Anschluss mit der linken Seite des Geräts. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose.



*Akku voll geladen**Akku wird geladen**Akku fast leer*

Das Laden des Compact 10 HD dauert etwa 3,5 Stunden. Ein vollständig aufgeladener Compact 10 HD verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden, je nach Produkteinstellungen und Verwendung. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen zum Aufladen des Geräteakkus nur das Netzteil und das USB-Kabel, die mit dem Compact 10 HD geliefert wurden.

Akkuwarnung

Der Compact 10 HD zeigt kurz ein Warnsymbol mit einer leeren Batterie an, um anzuzeigen, dass der Akku geladen werden muss. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät aufladen. Ist der Akku leer, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wenn sich der Compact 10 HD nicht einschalten lässt, vergewissern Sie sich, dass er aufgeladen ist.

2.2. Ein- und Ausschalten



Um den Compact 10 HD zum ersten Mal einzuschalten, muss das Gerät aufgeladen werden. Halten Sie nach dem Aufladen den orangefarbenen Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt. Um den Compact 10 HD auszuschalten, drücken Sie den orangefarbenen Schalter erneut für drei Sekunden. Nach dem Einschalten des Compact 10 HD dauert es etwa 20 Sekunden, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint.

Bereitschaft (Standby)



Drücken Sie kurz den orangenen Ein/Aus-Schalter, um den Compact 10 HD in den Standby-Modus zu versetzen. Der Compact 10 schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn für eine vom Anwender festgelegte Zeitspanne keine Taste gedrückt und keine Bewegung erkannt wird. Durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters wird das Gerät wieder eingeschaltet. Sie können die Standby-Zeit im Menü des Compact 10 HD anpassen oder deaktivieren. Lesen Sie für weitere Informationen das Kapitel 5.4.

2.3. Öffnen und schließen des Compact 10 HD Leseständers

Beim Aufklappen des Compact 10 HD wird der Bildschirm in einem ergonomischen Winkel zum Lesen eingestellt und die Lesekamera aktiviert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Compact 10 HD zu **öffnen**:

1. Stellen Sie den Compact 10 HD so vor sich, so dass der Bildschirm nach oben zeigt und sich das Optelec-Logo unter dem Bildschirm befindet.
2. Halten Sie den Compact 10 HD aufrecht. Ihre Finger halten die Füße des Leseständers, während Ihre Daumen die Seite des Compact 10 HD halten.
3. Greifen Sie mit den Fingern nach der Kante der Füße des Leseständers in der Aussparung auf der Rückseite des Geräts.
4. Klappen Sie die Füße des Ständers heraus, bis sie einrasten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Compact 10 HD zu **schließen**:

1. Stellen Sie den Compact 10 HD so vor sich, so dass der Bildschirm in Ihre Richtung zeigt.
2. Halten Sie den Compact 10 HD an den Seiten und legen Sie Ihre Finger auf die Stützen zwischen den Füßen und dem Gerät.
3. Drücken Sie die Fußstützen vorsichtig in Ihre Richtung, damit sie sich biegen.
4. Kippen Sie den Bildschirm nach unten, bis er einrastet.

2.4. Reinigung der Kameralinsen


Für ein einwandfreies Bild empfehlen wir, sicherzustellen, dass das Fenster mit den Kameralinsen und den LED-Lichtern sauber bleibt. Durch eine verschmutzte Kameralinse können unscharfe Bilder entstehen und der Autofokus für die Entfernungseinstellung wird möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Zur Reinigung der Kamerafenster benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein anderes weiches und flusenfreies Reinigungstuch.

Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung der Kamerafenster kein Wasser oder Reinigungsmittel.



2.5. Tastenbelegung

Der Compact 10 HD verfügt über folgende Tasten:

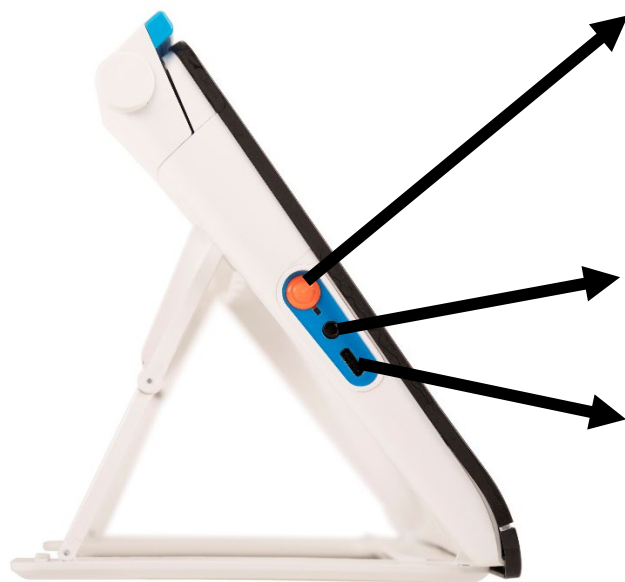

Ein / Aus-Taste

Ein kurzer Druck auf die orangefarbene Ein / Aus-Taste versetzt den Compact 10 HD in den Standbymodus oder aktiviert das Gerät wieder. Ein 6 Sekunden langer Druck auf diese Taste schaltet das Gerät aus oder wieder ein.

Audio-Buchse

Verwenden Sie die Audio-Buchse, um ein Headset an den Compact 10 HD anzuschließen.

USB-C-Anschluss

Verwenden Sie den USB-C-Anschluss, um den Compact 10 HD aufzuladen. Das mitgelieferte USB-Kabel wird an diesen USB-Anschluss und das Netzteil angeschlossen. Verwenden Sie nur das mit dem Compact 10 HD gelieferte Netzteil, um das Gerät mit Strom zu versorgen und aufzuladen.

3. Kameras

Der Compact 10 HD ist mit drei Kameras ausgestattet, die jeweils eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Alle Kameras können im einfachen Modus und im erweiterten Modus verwendet werden. Wenn das angezeigte Bild unscharf ist, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Kamera neu zu fokussieren und damit ein scharfes Bild zu erhalten.

3.1. Lesekamera

Die Lesekamera wird verwendet, wenn sich der Compact 10 HD bei aufgeklapptem Leseständer in der geöffneten Position befindet. Die Lesekamera wird zum Lesen auf einem Schreibtisch oder Tisch verwendet. Der Compact 10 HD wird auf die Lesevorlage gestellt.

3.2. Ganzseitenkamera

Die Ganzseitenkamera wird verwendet, wenn der ausschwenkbare Kameraarm geöffnet wird. Mit der Ganzseitenkamera können Sie Fotos und Objekte bequemer darstellen oder Ihre Unterschrift setzen, ohne dass Ihr Bewegungsfreiraum eingeschränkt wird.



Autofokus ausschalten

Der Autofokus kann für das Schreiben oder Anzeigen von Objekten in einem festgelegten Abstand ausgeschaltet werden. Verwenden Sie das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um den Fokus auszuschalten oder wieder einzuschalten.



Wenn Sie einen Compact 10 HD Speech besitzen, wird die Ganzseitenkamera auch zum Scannen und Vorlesen ganzseitiger Dokumente verwendet. Legen Sie das Dokument, das Sie lesen möchten, unter die Kamera, und richten Sie die linke untere Ecke des Dokuments an der blauen Markierung rechts an dem unteren Teil des Leseständers des Compact 10 HD Speech aus.

3.3. Objektkamera

Die Objektkamera wird verwendet, wenn Sie den Compact 10 HD einschalten, während der Leseständer des Compact 10 HD geschlossen ist. Um von der Lesekamera zur Objektkamera zu wechseln, schließen Sie den Leseständer und drücken Sie die Ein- / Aus-Taste. Die Objektkamera ist so optimiert, dass sie Objekte (z.B. Fahrpläne, Dosen oder ähnliches) in kurzem Abstand scharf darstellen kann.



4. Texte erkennen und Vorlesen lassen

Wenn Sie einen Compact 10 HD Speech besitzen, können Sie einen Schnappschuss zur Umwandlung von angezeigten Text zu gesprochenen Text erstellen. Der Compact 10 HD Speech erkennt Text in einem Bild und wird diesen Text vorlesen.



4.1 Die Sprache aktivieren

Zum Aufnehmen eines Text-zu-Speech Schnappschusses und Aktivieren der Sprache:

- Positionieren Sie den Text oder einen Teil des Textes in der Kameraansicht und drücken Sie die Text-zu-Speech Schnappschuss-Taste. Verwenden Sie zum Aufnehmen eines Schnappschusses einer ganzen Seite die Ganzseitenkamera und achten Sie beim Erstellen eines Schnappschusses einer ganzen Seite darauf, dass Sie die linke untere Ecke des Dokuments an der blauen Markierung rechts an dem unteren Teil des Leseständers des Compact 10 HD Speech ausrichten.

Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung ausreichend ist, verhindern Sie Abschattungen und beschränken Sie den Text auf den Bereich des Dokuments, den Sie lesen möchten. Wenn der Text in der Ansicht zu klein erscheint, dann verliert die Erkennung die Genauigkeit und kann fehlschlagen.

- Eine Fortschrittsanzeige erscheint. Der Compact 10 HD Speech startet das Vorlesen, sobald der Erkennungsvorgang abgeschlossen ist.
- Mit der Vorlese/Pause-Schaltfläche starten oder unterbrechen Sie das Vorlesen.
- Drücken und halten Sie den Finger etwas länger auf einer Textstelle um von dieser aus neu vorlesen zu lassen.
- Tippen Sie auf die Modus-Schaltfläche um den erfassten Text in Ihrer gewünschten, kontrastreichen Lesefarbe anzuzeigen. Tippen Sie wiederholt auf diese Schaltfläche um zur nächsten Lesefarbe zu gelangen. Weitere Informationen zum Einstellen der Modusfunktionen und der kontrastreichen Lesefarben finden Sie in Kapitel 5.4 “Darstellung” und Kapitel 5.4 “Farben”.
- Sollte kein Text gefunden worden sein, dann erscheint nach antippen der Vorlesetaste die Meldung “Kein Text gefunden”.

4.2 Einstellen von Lautstärke und Vorlesegeschwindigkeit

Zur Einstellung der Lautstärke oder der Vorlesegeschwindigkeit aktivieren Sie das Tastenfeld mit einer einfachen Bildschirmberührung. Tippen Sie auf das Audiosymbol um die Lautstärke- und Geschwindigkeitsregler anzuzeigen. Beide sind nur in der Schnappschussanzeige dargestellt.

4.3 Einstellen von Landessprache und Vorlesestimme

Zur Einstellung der Landessprache und Vorlesestimme im einfachen Modus berühren und halten Sie das Audiosymbol und erreichen so das Sprachmenü.

Zur Einstellung der Landessprache und Vorlesestimme im erweiterten Modus tippen Sie auf das "Menü" Symbol und tippen dann auf das Symbol "Sprachmenü".

Für mehr Informationen wie man das "Sprachmenü" benutzt lesen Sie bitte Kapitel 5.3.

4.4 Tabellenmodus

Der normale Vorlesemodus liest Spalten vor, ideal für Zeitungen und Zeitschriften.

Möglicherweise möchten Sie jedoch gelegentlich ein Menü, eine Quittung, eine Tabelle oder einen anderen Text in einer Tabellendarstellung vorlesen lassen. Wenn Sie die Text-zu-Speech Schnappschuss- Schaltfläche gedrückt halten, liest der Compact 10 HD Speech den gesamten von links nach rechts erfassten Text einer Zeile und wechselt dann zur nächsten Zeile. Wenn Sie den Schnappschuss beenden und einen weiteren Schnappschuss aufnehmen, wechseln Sie automatisch wieder in den normalen Vorlesemodus.

5. Einfacher und erweiterter Modus


Um zwischen dem einfachen und dem erweiterten Modus umzuschalten berühren und halten Sie das Modussymbol und tippen dann auf “Einfach“ oder “Erweitert“.

Im einfachen Modus haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen


- Einstellung der Vergrößerung
- Auswahl eines Anzeigemodus
- Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD)
- Schnappschuss machen und Text anhören (Compact 10 HD Speech)
- Umschalten zwischen Lese- und Objektkamera

Im erweiterten Modus haben Sie dieselben Funktionen wie im einfachen Modus sowie einige zusätzliche Funktionen:


- Zeit und Datum
- Zugang zum Menü mit den Optionen zu
 - Speichern und öffnen von Schnappschüssen
 - Ändern der Landessprache sowie der Vorlesestimme
 - Lesefarben ändern
 - Leselinie aktivieren
 - Bluetooth-Audio und Miracast
 - Andere erweiterte Einstellungen
 - Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD)

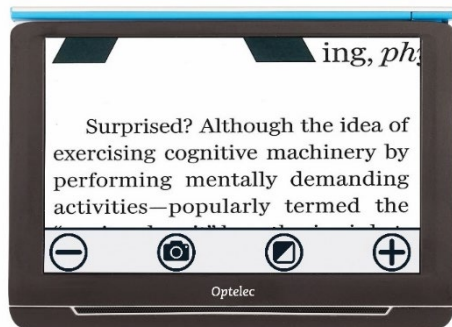


Compact 10 HD Einfacher Modus

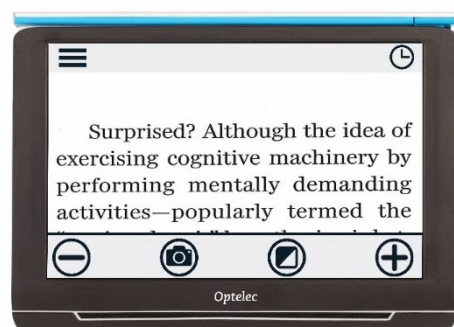

Compact 10 HD Erweiterter Modus

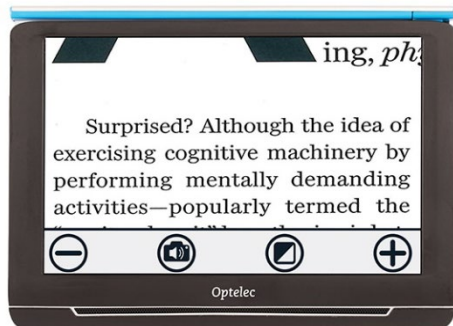

Compact 10 HD Speech Einfacher Modus

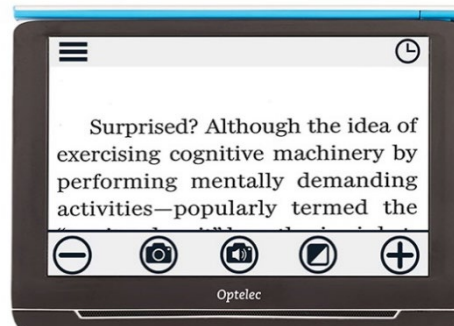

Compact 10 HD Speech Erweiterter Modus

5.1. Einfacher Modus

Einstellen der Vergrößerung



Um die Vergrößerungseinstellung zu ändern, tippen Sie einfach auf den Bildschirm. Ein Displaytastenfeld wird am unteren Rand des Bildschirms oder am rechten Rand des Bildschirms angezeigt, abhängig davon, welche Position für das Displaytastenfeld ausgewählt wurde. Die Position des Displaytastenfelds kann im Menü ausgewählt werden. Lesen Sie im Kapitel 5 weitere Informationen zum Ändern der Displaytastenfeld-Position.



Tippen Sie im Displaytastenfeld auf die “+” - Schaltfläche, um die Vergrößerung zu erhöhen, oder die “-” - Schaltfläche, um sie zu verringern. Verwenden Sie alternativ die Zweifinger-Geste (Spreizen; Zusammenziehen) um die Vergrößerung zu ändern. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Displaytastenfeld wieder auszublenden. Das Displaytastenfeld wird automatisch ausgeblendet, wenn der Bildschirm 10 Sekunden lang nicht berührt wurde.

Auswahl des Darstellungsmodus



Das Tippen auf die Modus- Schaltfläche in der Mitte des Displaytastenfelds ermöglicht die Auswahl einer der nachfolgend beschriebenen Darstellungsmodi:

Foto-Modus: Darstellung der Texte und Fotos mit Echtfarben

Negativ-Modus: Lesen mit hohem Kontrast, weiß auf schwarz

Positiv-Modus: Lesen mit hohem Kontrast, schwarz auf weiß

Hoher Kontrast **Farbkombination 1**

Hoher Kontrast **Farbkombination 2**

Einen Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD)



Wenn Sie einen Compact 10 HD besitzen, drücken Sie für die Aufnahme einer Vorlage die Schnappschuss-Taste. Sie können die Vergrößerung und den Ansichtsmodus der aufgenommenen Vorlage verändern. Drücken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke, um den Schnappschuss zu schließen und zur Livebilddarstellung zurückzukehren.

Einen Schnappschuss machen und Text anhören (Compact 10 HD Speech)



Wenn Sie einen Compact 10 HD Speech besitzen, drücken Sie für die Aufnahme einer Vorlage die Text-zu-Speech Schnappschuss-Taste um diese vorlesen zu lassen. Verwenden Sie die Vorlese/Pause-Schaltfläche, um den Lesevorgang zu starten oder zu stoppen. Sie können die Vergrößerung und den Ansichtsmodus, die Lautstärke und die Lesegeschwindigkeit und die Stimme zum



Vorlesen ändern. Drücken Sie das X in der oberen rechten Ecke, um den Text-zu-Speech-Schnappschuss zu schließen und zum Echtzeit-Videomodus zurückzukehren. Weitere Informationen zur Verwendung von Text-to-Speech finden Sie in Kapitel 4.

Kontrasteinstellung

Wenn Buchstaben oder andere Teile im ausgewählten kontrastreichen Farbmodus nicht deutlich sichtbar sind, können Sie das Bild verbessern und die Schärfe erhöhen. Um den Kontrast anzupassen, halten Sie den Touchscreen ungefähr drei Sekunden lang mit drei Fingern gedrückt. Daraufhin wird ein Schieberegler angezeigt. Schieben Sie diesen nach links oder rechts, um den Kontrast anzupassen. Drücken Sie die Reset-Taste, um zur Standardeinstellung zurückzukehren. Tippen Sie zum Beenden auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

5.2. Erweiterter Modus

Im erweiterten Modus haben Sie dieselben Funktionen wie im einfachen Modus sowie einige zusätzliche Funktionen.

Zeit und Datum

Tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf das Symbol der Uhr in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Benutzen Sie die Leiste mit dem Rückwärtspfeil um das Menü für Zeit und Datum wieder zu verlassen.

Um Zeit und Datum einzustellen tippen Sie auf die Zeit oder Datum. Um die Werte zu ändern tippen Sie auf die gewünschten Einstellfelder mit den Pfeilen hoch und runter. Benutzen Sie die Leiste mit dem Rückwärtspfeil um das Menü für Zeit und Datum wieder zu verlassen.


Einen Schnappschuss eines Bildes machen (Compact 10 HD Speech)



Wenn Sie einen Compact 10 HD Speech besitzen und nur einen Schnappschuss eines Bildes ohne Verwendung von Text-to-Speech aufnehmen möchten, drücken Sie die Schnappschuss-Taste. Sie können die Vergrößerung und den Ansichtsmodus der aufgenommenen Vorlage verändern. Drücken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke, um den Schnappschuss zu schließen und zur Livebilddarstellung zurückzukehren.

5.3 Menü

Um das Menü zu öffnen, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf das Symbol "Menü" auf der linken Seite des Bildschirms. Das Hauptmenü wird geöffnet. Um das Menü zu schließen, tippen Sie auf die Leiste mit dem Rückwärtspfeil.

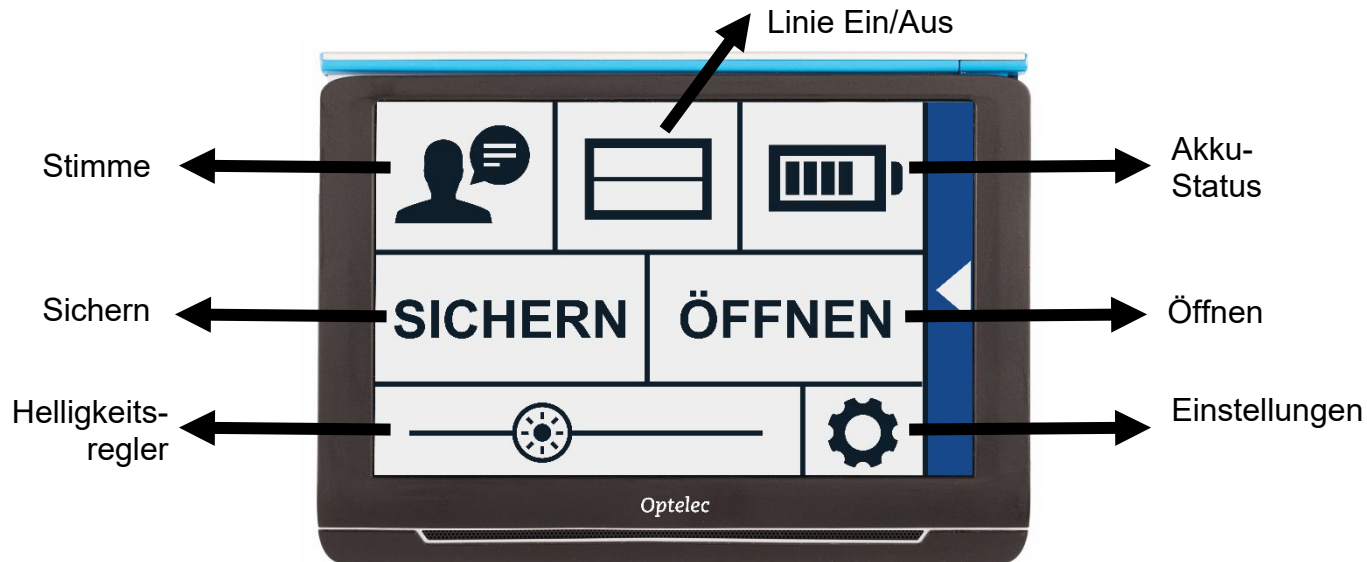

Die genauen Elemente im Menü hängen davon ab, ob Sie einen Compact 10 HD oder 10 HD Speech besitzen. Um eine Schaltfläche zu aktivieren, tippen Sie einmal darauf. Durch Aktivieren einer Schaltfläche wird eine neue Menüdarstellung oder eine neue Liste angezeigt. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf die Leiste mit dem Rückwärtspfeil. Berühren Sie den

Schieberegler und lassen Sie den Finger darauf damit Sie ihn nach rechts oder links schieben können.

Das Hauptmenü enthält die folgenden Untermenüs:

- Stimme (nur bei Compact 10 HD Speech)
- Linie Ein/Aus
- Akkuanzeige
- Speichern
- Öffnen
- Helligkeitsregler
- Einstellungen



Stimmen und Landessprachen (nur Compact 10 HD Speech)

Um eine Stimme, eine Landessprache und eine Menülandessprache auszuwählen, oder um Stimmen oder Landessprachen hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf die "Stimme"- Schaltfläche.

Auswählen einer Stimme, Landesprache und Menülandessprache

Anhand dieses Menüpunktes können Sie eine Vorlesestimme und Landessprache auswählen. Um eine andere Vorlesestimme auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Stimme" in der linken oberen Ecke des Hauptmenüs, um eine Liste der vorinstallierten Stimmen zu öffnen. Jede Stimme

steht auch für eine Landessprache. Tippen Sie auf eine Stimme, um die Stimme auszuwählen. Wenn ein Stimmenwechsel auch gleichzeitig die Landessprache ändert, wird das Menü automatisch an die gleiche Landessprache angepasst.

Eine Stimme oder Landessprache hinzufügen oder entfernen

Um eine Stimme oder Landessprache hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Stimme" in der linken oberen Ecke des Hauptmenüs. In der Liste der vorinstallierten Stimmen tippen Sie auf die Schaltfläche "Hinzu/Entfernen". Um eine Vorlesestimme hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie die Landessprache in der Liste, indem Sie auf "Sprache" tippen. Hierdurch wird eine Liste der verfügbaren Stimmen für die ausgewählte Landessprache angezeigt. Um eine Vorlesestimme zu aktivieren, wählen Sie diese in der Liste durch Antippen aus. Ein Häkchen am Anfang der Stimme zeigt Ihnen die Aktivierung an. Erst wenn die Stimme aktiviert ist, ist sie unter dem Menüpunkt "Stimme" im Hauptmenü verfügbar. Wird die Stimme deaktiviert, so wird sie aus den verfügbaren Stimmen herausgenommen. Die Landessprachen der aktivierten Stimmen werden in der Liste mit einem Häkchen zuerst angezeigt.

Einstellung der Landessprache und der Stimme im einfachen Modus

Im "einfachen" Modus können Sie nicht auf dieses Menü zugreifen. Um die Landessprache oder die Stimme im einfachen Modus einzustellen, halten Sie den Finger auf das Audiosymbol, um direkt zum Menü zu gelangen, und führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus.

Linie Ein/Aus

Der Compact 10 HD kann eine Leselinie von links nach rechts anzeigen.

Um die Leselinie zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol "Linie". Tippen Sie erneut auf das Symbol um die Leselinie wieder auszublenden.

Akku-Status

Der Akku-Status wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie das Batterie-Symbol antippen, dann erscheint ein neuer Bildschirm, der ein vergrößertes Batteriesymbol mit dem Akku-Status anzeigt, eine "Info"- Schaltfläche und eine "Pfeil nach links"- Schaltfläche, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Das Blitz-Symbol zeigt an, dass der Akku geladen wird.

Info

Tippen Sie auf die "Info"- Schaltfläche im Akku-Bildschirm, um die Anwendungsversion zu sehen.

Sichern

Diese Option ist nur im erweiterten Modus verfügbar. Um einen Schnappschuss zu speichern, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf die “Sichern“- Schaltfläche.

- Nehmen Sie über die Schnappschuss- Schaltfläche einen Schnappschuss auf
- Öffnen Sie das Menü
- Tippen Sie auf die “Sichern“- Schaltfläche und speichern Sie dadurch den Schnappschuss

Wenn kein Schnappschuss zum Speichern vorhanden ist, dann ist die “Sichern“- Schaltfläche nicht sichtbar.

Öffnen

Um einen Schnappschuss zu öffnen, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf die “Öffnen“- Schaltfläche. Eine Liste mit Miniaturansichten der gespeicherten Schnappschüsse wird angezeigt, wobei der zuletzt gespeicherte Schnappschuss als erstes angezeigt wird. Gibt es mehr Schnappschüsse, als auf den Bildschirm passen, dann können Sie sich durch hoch und runter Streichen auf dem Bildschirm durch die Liste bewegen. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um sie zu öffnen.

Löschen

Um einen Schnappschuss zu löschen, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf die “Öffnen“- Schaltfläche. Im Öffnen-Bildschirm tippen Sie auf die Lösch- Schaltfläche. Eine Liste mit

Miniaturansichten der gespeicherten Schnappschüsse wird angezeigt, wobei der zuletzt gespeicherte Schnappschuss als erstes angezeigt wird. Jeder Schnappschuss hat ein Kontrollfeld in der rechten oberen Ecke. Um einen Schnappschuss zu markieren, aktivieren Sie das Kontrollfeld. Tippen Sie auf die Lösch- Schaltfläche, um die markierten Schnappschüsse zu löschen. Um alle Schnappschüsse zu löschen, tippen Sie auf die Lösch- Schaltfläche, ohne einen Schnappschuss zu markieren. Sie werden aufgefordert, das Löschen aller Schnappschüsse zu bestätigen. Um alle Schnappschüsse zu löschen, wählen Sie "Ja". Um das Löschen aller Schnappschüsse abubrechen, wählen Sie "Nein". Beide Display-Schaltflächen bringen Sie zurück in die Liste der Schnappschüsse. Tippen Sie auf "Pfeil nach links", um zum "Öffnen"-Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie erneut auf "Pfeil nach links", um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Die Helligkeit anpassen

Nutzen Sie den Regler mit dem Sonnensymbol, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen oder zu verringern.

5.4 Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol “Einstellungen”, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Das Symbol “Einstellungen” ist das Symbol mit dem Zahnradsymbol unten rechts. Das Einstellungsmenü enthält folgende Schaltflächen:


- Farben
- Darstellung (nur bei Compact 10 HD Speech)
- Miracast
- Bluetooth (nur bei Compact 10 HD Speech)
- Linie
- Tastensymbole
- Design
- Spalten (nur bei Compact 10 HD Speech)
- Beleuchtung
- Sound
- Standby
- Landessprache (nur bei Compact 10 HD Speech)
- Wiederherstellen

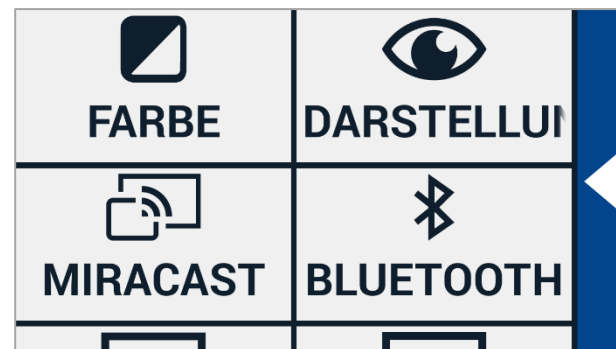

Farben

Tippen Sie im Einstellungen-Menü auf die Schaltfläche "Farben", um die bevorzugten kontrastreichen Farben auszuwählen.

Der Compact 10 HD verfügt über vier kontrastverstärkte Lesefarbenmodi. Für jeden dieser vier Modi können verschiedene Vorder- und Hintergrundfarben ausgewählt werden. Der erste kontrastreiche Modus der Lesefarbenansicht oben links ist erforderlich.

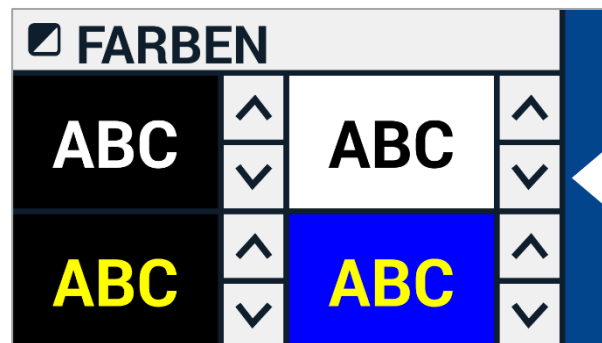

Tippen Sie zum Ändern der Vorder- und Hintergrundfarben auf den Aufwärts- oder Abwärtsfeil neben dem Modus, den Sie ändern möchten. Sie durchlaufen alle verfügbaren Modi und können bei dem gewünschten Anhalten. Wählen Sie das Symbol „X“, um einen kontrastreichen Lesefarbenmodus zu deaktivieren. Tippen Sie auf die Leiste mit dem Rückwärtsfeil um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.




Darstellung (nur bei Compact 10 HD Speech)

Tippen Sie im Einstellungsmenü auf die Schaltfläche „Darstellung“, um zu konfigurieren, wie der erfasste Text bei Verwendung von Text-to-Speech angezeigt werden soll.

Um zu konfigurieren, wie der gesamte erfasste Text angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche „Modus“, um durch die verschiedenen Anzeigemodi zu blättern: „Original“, „Zeile“ und „Spalte“ um.

Um zu konfigurieren, wie das vorgelesene Wort angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche „Hervorheben“, um durch die verschiedenen Hervorhebungsmodi zu blättern: Rahmen und Unterstrichen.

Tippen Sie bei Verwendung von Text-to-Speech in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Modus“, um den erfassten Text im gerade ausgewählten Anzeigemodus anzuzeigen und um die konfigurierten kontrastreichen Lesefarben durchzugehen.

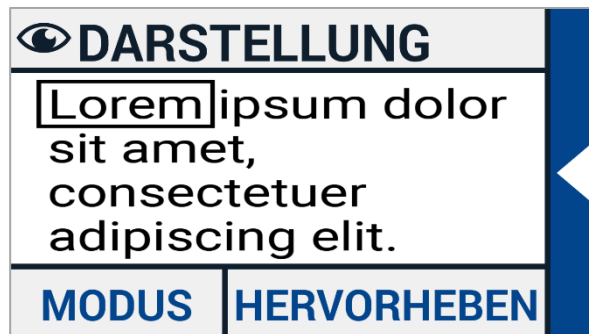

Miracast: Drahtlos mit einem Monitor oder Fernseher verbinden

Miracast ist ein Standard für eine kabellose Verbindung zu einem Monitor. Es kann als HDMI über Wi-Fi bezeichnet werden und ersetzt das Kabel von dem Compact 10 HD zu dem Monitor oder Fernseher. Um die Miracast-Funktion des Compact 10 HD nutzen zu können, muss Ihr Monitor

oder Ihr Fernseh-Gerät Miracast unterstützen. Bitte lesen Sie in Ihrer Monitor- oder Fernsehanleitung nach, ob Ihr Gerät die Miracast-Funktion unterstützt.

Um Ihren Compact 10 HD über Miracast an einen Monitor oder Fernseher anzuschließen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Miracast" und schalten Miracast ein. Eine Liste mit verfügbaren Geräten wird angezeigt. Klicken Sie auf ein Gerät, um eine Verbindung herzustellen. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Tippen Sie erneut auf das Gerät um die Verbindung zu trennen. Wenn eine Miracast-Verbindung hergestellt wurde, werden Audio und Video sowohl an den Fernseher oder Monitor übertragen. Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, darf der Compact 10 HD nur einen Meter vom Monitor oder Fernseher entfernt sein. Abhängig von der Verbindung könnte eine kurze Verzögerung des Videos und / oder des Audios bemerkt werden.



Bluetooth (nur bei Compact 10 HD Speech)

Um einen Lautsprecher oder Kopfhörer über Bluetooth zu verbinden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Bluetooth" und schalten Sie Bluetooth ein. Eine Liste mit gekoppelten Geräten wird angezeigt.

Ist kein Lautsprecher oder Kopfhörer gekoppelt, tippen Sie auf die Schaltfläche "Suche", um nach verfügbaren Geräten zu suchen. Bevor Sie die Bluetooth-Suche starten, stellen Sie bitte sicher, dass der Lautsprecher oder Kopfhörer eingeschaltet und sichtbar ist. Lesen Sie die Anleitung des Lautsprechers oder Kopfhörers, um zu erfahren, wie Sie den Sichtbar-Modus aktivieren. Um den Lautsprecher oder Kopfhörer zu koppeln, tippen Sie auf den Gerätenamen und geben Sie, falls nötig, den Pin-Code ein. Lesen Sie die Anleitung des Lautsprechers oder Kopfhörers, um zu erfahren, welcher Pin-Code für das Gerät vergeben wurde.

Sobald das Gerät gekoppelt ist, tippen Sie in der Liste auf das Gerät, um den Lautsprecher oder Kopfhörer zu verbinden. Sie werden dann gefragt, ob Sie das Gerät verbinden oder entfernen möchten. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Verbinde", um die Verbindung aufzubauen. Um anzuzeigen, dass ein Gerät verbunden ist, erhält das verbundene Gerät ein Häkchen und wird in blau dargestellt. Um ein Gerät zu entkoppeln / entfernen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Entferne". Das Gerät wird aus der Liste der gekoppelten Geräte entfernt.

Anmerkung: Es werden nur Kopfhörer oder Lautsprecher mit Bluetooth Version 4.0 oder höher unterstützt.

Position der Leselinie

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Position der Leselinie in eine ihrer sechs Positionen, horizontal oben, horizontal mittig, horizontal unten, vertikal links, vertikal mittig und vertikal rechts setzen. Standardmäßig ist die Leselinie auf die Mitte des Bildschirms eingestellt. Durch die Änderung der Leselinieposition wird die Leselinie automatisch aktiviert. Die Leselinie kann im Hauptmenü deaktiviert werden.

Tasten

Mit diesem Menüpunkt können Sie von zwei Positionen der Symbolfelder auswählen: unten oder seitlich. Je nach Wunsch können Sie die Position der Symbolfelder am unteren oder seitlichen Rand des Bildschirms ändern. Die Standardeinstellung ist "Unten".

Design

Mit diesem Menüpunkt können Sie ein helles oder dunkles Design für die Symbole und Menüs auswählen.

Spalten (nur bei Compact 10 HD Speech)



Mit diesem Menüpunkt können Sie auswählen, ob der Compact 10 HD Speech nur vollständige oder unvollständige Spalten lesen soll. Standardmäßig ist die Option "Nur vollständige Spalten lesen" ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass beim Lesen unvollständiger Spalten nicht alle Zeichen und Wörter vollständig erfasst werden, was zu fehlerhaftem Text führen kann.

Beleuchtung

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Beleuchtung im Lesemodus und im Objektmodus aktivieren oder deaktivieren. Die Lesebeleuchtung befindet sich links und rechts von der Lesekamera. Standardmäßig ist die Lesebeleuchtung für eine optimale Bildqualität aktiviert. Die Objektbeleuchtung befindet sich neben der Objektkamera. Standardmäßig ist die Objektanzeige deaktiviert.

Sound

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Lautstärke ändern, die Audiosignale stummschalten und das Vibrationssignal aktivieren oder deaktivieren. Als Standard ist der Ton aktiviert und die Vibration deaktiviert.

Bereitschaft (Standby)

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Standby-Zeit einstellen. Die Bereitschafts-Zeit legt die Zeitspanne fest, bis der Compact 10 HD in den Bereitschafts -Modus schaltet, um Energie zu sparen. Das Drücken einer beliebigen Taste beendet den Bereitschafts -Modus wieder. Die Zeit ist standardmäßig auf 4 Minuten festgelegt, bis das Gerät in den Bereitschafts -Modus wechselt, wenn keine Taste gedrückt, oder der Compact 10 HD nicht bewegt wird.



Landessprache (nur bei Compact 10 HD Speech)

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Landessprache des Compact 10 HD Menüs auswählen. Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Menü-Landessprache.

Wiederherstellen

Tippen Sie auf diesen Menüeintrag, wenn Sie die Werkseinstellung zum Zeitpunkt der Auslieferung des Geräts wiederherstellen möchten. Sie werden gefragt, ob Sie sicher sind, dass Sie alle Einstellungen wiederherstellen möchten. Um die Werkseinstellung wieder herzustellen, wählen Sie "Ja". Um das Wiederherstellen der Werkseinstellung abubrechen, wählen Sie "Nein".

6. Dokumente auf den PC übertragen

Um Schnappschüsse und Dokumente auf einen PC zu übertragen, benötigen Sie einen Windows 10-Computer und das mitgelieferte USB-Kabel. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie den Compact 10 HD und Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie den Compact 10 HD mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Windows 10- Computer an. Der Compact 10 HD zeigt kurz das Symbol „Verbunden mit Computer“ an.
3. Wenn Sie den Compact 10 HD zum ersten Mal anschließen, warten Sie bitte, bis Windows die Einrichtung des Geräts abgeschlossen hat.
4. Abhängig von Ihren Windows-Einstellungen öffnet Windows Explorer das Gerät „CP10“ und zeigt ein internes Speichermedium an.
5. Wenn Windows 10 das Compact 10 HD-Gerät nicht automatisch anzeigt, öffnen Sie den Windows-Explorer und wählen Sie das CP10-Gerät aus.
6. Klicken Sie auf das interne Speichermedium und klicken Sie auf den Ordner “DCIM”;
7. Der Ordner „DCIM“ enthält Ordner mit der Uhrzeit und dem Datum der aufgenommenen Bilder. Jeder Ordner enthält das aufgenommene Bild und, wenn Sie einen Compact 10 HD

Speech besitzen, ein TXT-Dokument mit dem im Bild enthaltenen Text. Darüber hinaus enthält der Ordner 2 Systemdateien, eine JSON- und eine verarbeitete Bilddatei.

8. Verwenden Sie Kopieren und Einfügen, um die Dateien auf Ihren PC zu kopieren.

Contact – Optelec Offices Worldwide

Optelec Europe

Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3444
www.optelec.com

Optelec U.S.

17757 US Highway 19 N,
Suite 200, Clearwater,
FL 33764, U.S.A.
T: +1 (800) 444-4443
www.optelec.com

Optelec UK

Unit B Plot 5, Merlin Way
Quarry Hill Industrial Estate,
Ilkeston, DE7 4RA.
WD24 4YY, United Kingdom
T: +44 1923 23 13 13
lowvisionshop.co.uk

Optelec Nederland B.V.

Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3555
www.optelec.nl

Optelec Canada

1832 Boulevard Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (450) 677-1171
ca.optelec.com

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Belgium
T: +32 (0)50 35 75 55
www.optelec.be

Optelec GmbH

Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany
T: +49 669 196 170
www.optelec.de



UDC-000416
Rev. B

© March 2024 Optelec, The Netherlands
All rights reserved

