



Compact 7 HD

Advanced Features and Functions

Geavanceerde eigenschappen en functies

Fonctionnalités et fonctions avancées

Funzioni Avanzate

Características y funciones avanzadas

Erweiterte Ausstattungsmerkmale und Funktionen



COMPACT 7 HD ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS.....	10
1. INTRODUCTION.....	11
About this manual	12
What's in the box?	12
2. GETTING STARTED	13
Using the Compact 7 HD in the closed or open position.....	14
Cleaning the camera lens and mirror.....	15
Buttons	16
Switching the power on and off.....	19
Adjusting the magnification.....	19
Selecting a viewing mode	20
Using the snapshot button	21
3. CHARGING THE BATTERY	22
Charging the Compact 7 HD.....	22
Standby and Auto Power Off	23
Battery warning.....	23
4. THE COMPACT 7 HD MENU	24
Activating the menu	25
Navigating the menu.....	25
Exiting the menu	25
Menu: Information.....	26
Menu: Images.....	26
Menu: Brightness.....	28

Menu: Power.....	29
Menu: Beep	32
Menu: Light.....	33
Menu: Color	33
Menu: Reset	34
COMPACT 7 HD GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES.....	35
1. INLEIDING	36
Over deze handleiding	37
Inhoud van de verpakking.....	37
2. AAN DE SLAG	38
Het gebruik van de Compact 7 HD in de open/gesloten positie.....	39
Het schoonhouden van de camera lens en de spiegel	40
Knoppen	41
Het apparaat aan- en uitzetten	43
Aanpassen van de vergroting	44
Een leesstand selecteren	45
Het gebruik van de snapshot functie.....	45
3. NETSTROOM EN BATTERIJGEBRUIK	47
De Compact 7 HD opladen.....	47
Stand-by en Automatisch Uitschakelen	48
Batterij waarschuwing.....	48
4. HET COMPACT 7 HD MENU	49

Het menu activeren.....	50
Navigeren door het menu	50
Het menu verlaten	50
Menu: Informatie (Information)	51
Menu: Afbeeldingen (Images).....	51
Menu: Helderheid (Brightness)	53
Menu: Stroominstellingen (Power).....	54
Menu: Geluid (Beep).....	59
Menu: Licht (Light).....	59
Menu: Kleuren (Color)	60
Menu: Fabrieksinstellingen (Reset)	61
COMPACT 7 HD FONCTIONNALITES ET FONCTIONS AVANCEES	63
1. INTRODUCTION.....	64
À propos du manuel.....	65
Ce que contient la boîte	65
2. CONNAITRE VOTRE COMPACT 7 HD	66
Utiliser le Compact 7 HD en position ouverte ou fermée	67
Nettoyer la lentille de la caméra et le miroir	68
Les boutons	69
Allumer et éteindre le Compact 7 HD	71
Régler le niveau de grossissement.....	72
Sélectionner le mode de visualisation.....	73

Utiliser le bouton photo instantanée.....	73
3. CHARGEMENT DE LA PILE	75
Charger le Compact 7 HD.....	75
Mise en veille et mise hors tension automatique	76
4. LE MENU DU COMPACT 7 HD	77
Ouvrir le menu	78
Naviguer dans le menu	78
Fermer le menu	78
Menu: Information (Information).....	79
Menu: Images (Images).....	79
Menu: Luminosité (Brightness).....	82
Menu: Alimentation (Power).....	82
Menu: Son (Beep).....	86
Menu: Lumière (Light).....	87
Menu: Couleur (Color)	88
Menu: Configuration par défaut (Reset).....	89
COMPACT 7 HD FUNZIONI AVANZATE	91
1. INTRODUZIONE.....	92
A proposito di questo manuale	93
Contenuto della confezione	93
2. PER INIZIARE	94
Utilizzare Compact 7 HD in posizione chiusa o aperta	95

Come pulire la lente della telecamera e lo specchio.....	96
Pulsanti.....	97
Accensione e spegnimento.....	99
Regolare l'ingrandimento.....	100
Selezionare la modalità di visualizzazione.....	100
Usare il pulsante Foto.....	101
3. RICARICA DELLA BATTERIA.....	102
Come ricaricare Compact 7 HD.....	102
Standby e autospegnimento.....	102
Avviso batteria scarica.....	103
4. IL MENU DI COMPACT 7 HD.....	104
Attivare il Menu.....	105
Navigare nel Menu.....	105
Uscire dal Menu.....	105
Menu: Informazioni (Information).....	106
Menu: Immagini (Images).....	106
Menu: Luminosità.....	109
Menu: Alimentazione (Power).....	109
Menu: Audio (Beep).....	113
Menu: Colore (Color).....	114
Menu: Reset.....	115

COMPACT 7 HD CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS	117
1. INTRODUCCIÓN	118
Acerca de este manual	119
¿Qué contiene la caja?	119
2. CONOCER SU COMPACT 7 HD	120
Utilizar el Compact 7 HD en la posición cerrada o abierta.....	121
Limpiar el lente de la cámara y el espejo.....	122
Los botones	123
Encender y apagar la unidad	125
Ajustar la amplificación	126
Seleccionar un modo de visualización	127
Utilizar el botón de foto instantánea.....	127
3. CARGA DE LA BATERIA	129
Cargar el Compact 7 HD	129
Modo de reposo y función de apagado automático	130
Aviso de batería vacía	130
4. EL MENÚ DEL COMPACT 7 HD	131
Activar el menú	132
Navegar en el menú	132
Salir del menú.....	132
Menú: Información (Information).....	133
Menú: Imágenes (Images).....	133

Menú: Brillo (Brightness)	136
Menú: Alimentación (Power).....	136
Menú: Sonido (Beep).....	140
Menú: Iluminación (Light)	141
Menú: Color (Color)	142
Menú: Restablecer (Reset).....	143
COMPACT 7 HD ERWEITERTE AUSSTATTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN	145
1. EINFÜHRUNG	146
Über dieses Handbuch	147
Lieferumfang.....	147
2. ERSTE SCHRITTE	148
Benutzen des Compact 7 HD geschlossen oder geöffnet	149
Reinigung der Kameralinse und des Spiegels	151
Tastenbelegung.....	152
Compact 7 HD ein- und ausschalten	154
Einstellen der Vergrößerung	155
Auswahl des Darstellungsmodus.....	156
Schnappschuss-Funktion	156
3. AUFLADEN DES AKKUS	158
Aufladen des Compact 7 HD	158
Standby und automatisches Ausschalten	159
Akkuwarnung.....	159

4. DAS COMPACT 7 HD MENÜ	160
Das Menü aktivieren	161
Navigieren im Menü	161
Verlassen des Menüs	161
Menü: Information	162
Menü: Images → Bilder	162
Menü: Brightness → Helligkeit	165
Menü: Power → Ein-und Ausschalten.....	165
Menü: Beep → Signalton	169
Menü: Light → Objektbeleuchtung	170
Menü: Color → Farbe.....	171
Menü: Reset → Zurücksetzen.....	172

OPTELEC OFFICES WORLDWIDE OPTELEC KANTOREN WERELDWIJD OPTELEC DANS LE MONDE SEDI OPTELEC NEL MONDO OPTELEC EN EL MUNDO OPTELEC WELTWEIT	173
--	------------

Compact 7 HD

Advanced Features and Functions



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands
Phone: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introduction

Congratulations on choosing the Compact 7 HD!

Optelec's unique auto-focus electronic video magnifier enables you to view and magnify printed text and images in high resolution HD quality in full color or one of the high contrast modes. The Compact 7 HD 7-inch display, combined with its low magnification of 2.5 times, gives you maximum overview while providing up to 30 times magnification for a higher zoom level.

With its multifunctional design, unique lighting concept, autofocus, and integrated reading stand, the Compact 7 HD can be used for reading, viewing images, price tags, displays and much more while at home or on the go.

If you have questions or suggestions concerning the use of this product, please contact your distributor or Optelec's headquarters, using the contact information on the last page of this manual. Your feedback is greatly appreciated. We hope you enjoy working with your Compact 7 HD!

About this manual

At Optelec, we are constantly improving our products and their functionalities. Therefore, it is possible that this manual is not the latest version. Please download the most up-to-date manual on www.optelec.com at the Support section.

This manual will familiarize you with the features and basic operation of the Compact 7 HD. Please read this manual carefully before using your device.

What's in the box?


The Compact 7 HD packaging contains the following:

- The Compact 7 HD video magnifier
- A protective pouch
- A wrist strap
- A power supply⁴ country-specific power plugs (EU, US, UK, and AU)
- A screen cleaning cloth
- *Compact 7 HD Setup and Use*
- *Compact 7 HD Safety and Care*

If any of these items are missing from your package, please contact your distributor.


2. Getting started

The Compact 7 HD is placed correctly in front of you when the screen is facing up, and the large white button and orange on / off switch are at the bottom of the screen.

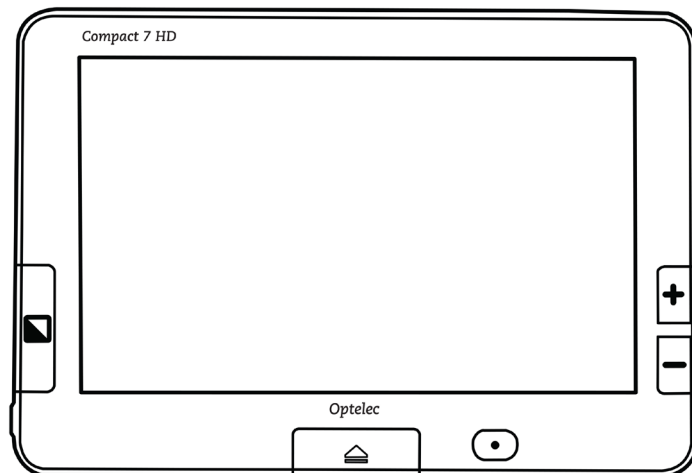


Using the Compact 7 HD in the closed or open position

The Compact 7 HD can be used in two ways: in the closed or open position. In the closed position, hold the unit in your hand and point the camera (located at the back of the unit) to the object or text you wish to view or read. The closed position is ideal for quickly scanning and viewing objects or documents.

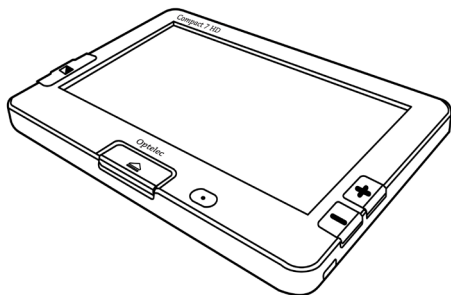

Compact 7 HD closed

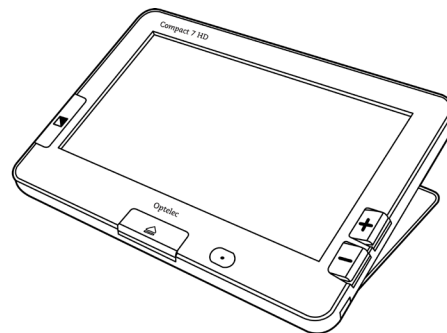


Compact 7 HD open

In the open position, the screen will be set at an ergonomic angle for reading, and the camera will point downward. The open position enables you to read longer texts thanks to the integrated reading stand.

To open the unit, follow these steps:

1. Place the Compact 7 HD in front of you so that the screen is facing up, and the large white button and orange on / off switch are at the bottom of the screen.
2. Press the white-colored button located in the centre at the bottom of the screen. The screen will open, and the Compact 7 HD will switch on.

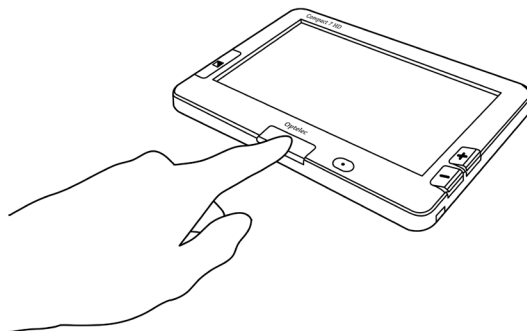


Cleaning the camera lens and mirror

For an optimal quality image, it is recommended to ensure that the camera lens and object light mirror are kept clean. A dirty lens will result in a fuzzy image and may cause the auto-focus camera to incorrectly focus. A clean object light mirror is important for preventing dark or light spots and for ensuring an evenly lit image. To clean the camera lens and mirror, use the provided cleaning cloth or another soft lens cleaning cloth.

Note: Do not use water or cleaning agents to clean the lens and mirror.

Buttons

The Compact 7 HD has the following buttons:

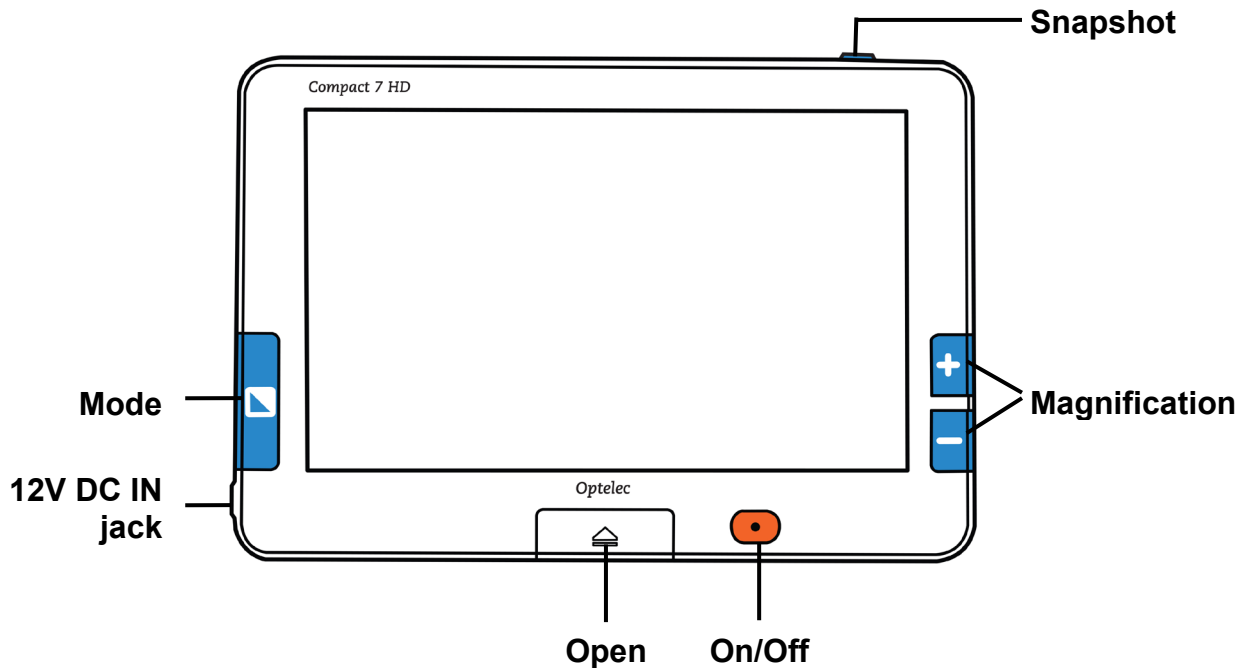

Open

Pressing the white button in the centre at the bottom of the screen will open the Compact 7 HD and switch the unit on.

Mode

Pressing the Mode button to the left of the screen allows you to select one of the viewing modes. Pressing this button for three seconds will turn off the object lighting. Pressing this button for three seconds again, will turn back on the object lighting.

Magnification

Pressing the + or – button to the right of the screen allows you to increase or decrease the magnification. Pressing the + and – buttons simultaneously for one second will allow you to enter or exit the Compact 7 HD menu.

Snapshot button


The snapshot button located on the top right of the unit allows you to take a temporary picture of a distant text or image, enabling you to bring the image closer to your eyes.

On/Off switch

Pressing the oval orange button, located right of the white Open button in the centre at the bottom of the screen, for one second, will switch the unit on and off.

12V DC IN jack

The 12V DC IN jack is located on the left side at the bottom corner of the Compact 7 HD. The power supply cable connects to this jack. Use only the indicated power supply that comes with the Compact 7 HD to power and charge the unit.

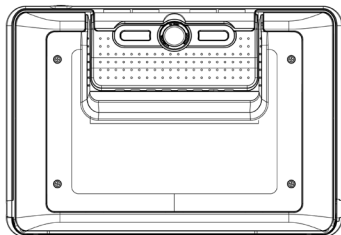

The camera of the Compact 7 HD is located at the back of the unit. To the left and right of the camera are two object lights that are used when the unit is in the closed position.

Switching the power on and off

To switch on the Compact 7 HD for the first time, the unit needs to be charged. Once charged, press the orange oval on / off switch located on the right of the white Open button in the centre at the bottom of the screen for one second. The unit will start up in the mode in which it was switched off. To switch off the Compact 7 HD, press the orange oval button again for one second.

When switching on the Compact 7 HD, it will take approximately 3 seconds before an image displays on screen.

The unit can also be switched on by opening the Compact 7 HD as described earlier. This is a default setting. Closing the unit will automatically turn it off. The turn-on-upon-opening and turn-off-upon-closing functions can be enabled or disabled in the menu. Refer to [Chapter 4](#) for more information on how to change these settings.

Adjusting the magnification

To change the magnification settings of the unit, simply press the + or – button located on the right side of the screen. Press the + button to increase or the – button to decrease the magnification. In the open position, when placed on a document, the magnification level starts at 2.5 times and can be increased to 30 times. The Compact 7 HD is equipped with an auto-focus camera. This allows you to use the unit while holding it in your hands in the

closed position. This will provide more overview, but this will decrease the minimum and maximum magnification levels.

Selecting a viewing mode

Pressing the Mode button on the left side of the screen allows you to select one of the following viewing modes:

Photo mode: Viewing full color texts and photos

Negative mode: Reading in high contrast, white on black

Positive mode: Reading in high contrast, black on white

High contrast **color combination 1**

High contrast **color combination 2**

Pressing the Mode button for 3 seconds will toggle the object lighting on or off. Switching modes will automatically turn the object lighting back on.

Using the snapshot button

The snapshot button allows you to take a temporary picture of a text or an image.

- Hold or place the Compact 7 HD over the text or image you wish to capture.
- Press the snapshot button located on the top right side of the unit to take the snapshot.
- Bringing the Compact 7 HD closer to your eyes will enable you to view the object or text closely.
- Press the Mode button to change the viewing mode.
- Use the magnification buttons located to the right side of the screen to change the magnification of the displayed image.
- While viewing the taken image, press the snapshot button for 2 seconds to save the image and return to the live video mode. A short beep and the onscreen indicator will confirm that the image has been saved. A maximum of 75 images can be stored inside the Compact 7 HD memory. A new image will replace the oldest image in memory.

OR

- Press the snapshot button again to and return to the live video mode. It is now possible to take a new snapshot.

Note: If the snapshot button is released before you hear the two beeps, the snapshot will not be saved.

To view or delete snapshots, refer to [chapter 4](#).

3. Charging the battery

Charging the Compact 7 HD

The Compact 7 HD is delivered with a power supply and four country-specific power plugs in EU, US, UK, and AU types. Select the power plug that corresponds to your country and plug it to the power supply.

To charge the Compact 7 HD, connect the power supply to the 12V DC IN jack located on the left side of the unit. Plug the other end of the power supply into a power outlet. The orange LED indicator next to the 12V DC IN jack will glow continuously while the Compact 7 HD is charging. Once the unit is fully charged, the LED indicator will turn green. If the LED indicator flashes, there is a charging problem. In this case, disconnect the power supply and try again.

Charging the Compact 7 HD takes approximately 3.5 hours. A fully charged Compact 7 HD can operate for an average time of 5 hours, depending on the power settings. Please note that, for safety reasons, only the power supply that was delivered with the Compact 7 HD can be used to charge the unit's battery.

Standby and Auto Power Off

The Compact 7 HD will automatically go into standby mode after two minutes if no button is pressed or no image change is detected. Pressing any button will wake up the unit. Four minutes after the Compact 7 HD goes into standby mode, the unit will automatically switch off. Pressing the orange on / off button will switch it back on. The standby time and power-off time can be changed or disabled in the Compact 7 HD menu. Refer to the next chapter on how to change these settings.









Battery warning



When the battery charge reaches below 5% of its total capacity, the unit will issue a battery warning every minute by displaying the battery-empty icon for 2 seconds and by sounding a beep. When this occurs, make sure to charge your unit as soon as possible. When the battery is empty, the unit will automatically switch off.

If a unit does not switch on, please make sure it is charged.

4. The Compact 7 HD Menu

Shows the battery status and firmware version.	
Allows you to view or delete the saved images	
Allows you to adjust the screen brightness.	
Allows you to configure the power settings.	
Allows you to switch the sound on or off.	
Allows you to enable or disable the object lighting settings.	
Allows you to change colors of the 4 high contrast modes.	
Allows you to reset all factory settings to default.	

Activating the menu



To enter the menu, press the + and – buttons simultaneously for two seconds.



Navigating the menu



Use the + and – buttons to navigate between the menu items. The Mode button located to the left of the screen will activate the chosen menu item or confirm the selection. To change a selection, use the + or – button.



Exiting the menu



To exit the menu, press the + and – buttons simultaneously for two seconds.



Menu: Information

This menu item displays the unit's battery status and current firmware version. No changes can be made in this menu.

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- The first option in the menu is Information.
- To exit the menu, press the Mode button or the + and – buttons simultaneously for two seconds.

Menu: Images

This menu contains 3 submenus:

- View: To view saved images
- Delete: To delete saved images
- Delete all: To delete all saved images

Submenu View:

To view the taken images:

- Activate the menu by pressing the + and - buttons for two seconds.
- Select the menu option Images and activate this menu by pressing the Mode button.
- Select the View option. Press the Mode button to confirm your choice.
- Select the image you wish to view by using the + button to move up the list with images, and the - button to move down the list with images.
- Press the Mode button to return to live video mode.

**Submenu Delete**

To delete the taken images:

- Activate the menu by pressing the + and - buttons for two seconds.
- Use the + button to move up and the - button to move down within the menu. Select the menu option Images and activate this menu by pressing the Mode button.
- Select the Delete option. Press the Mode button to confirm your choice.
- Select the image you wish to delete.
- Press the Mode button to delete the image.
- Press the - button to delete the image.
- Press the + button to cancel.
- Press the Mode button to return to live video mode.



Submenu Delete all

To delete all images:

- Activate the menu by pressing the + and - buttons for two seconds.
- Use the + button to move up and the - button to move down within the menu. Select the menu option Images and activate this menu by pressing the Mode button.
- Select the Delete all option. Press the Mode button to confirm your choice.
- Press the - button to delete all images.
- Press the + button to cancel.
- Press the Mode button to return to live video mode.

**Menu: Brightness**

This menu item allows you to adjust the brightness of the display.

- Activate the menu by pressing the + and - buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the - button to move down within the menu. Select the menu option Brightness and activate this menu by pressing the Mode button.
- Select the brightness level by using the - button to decrease or the + button to increase the brightness level. There are 5 brightness levels to choose from. The default brightness level is set to 4.
- Press the Mode button to confirm your choice and exit the menu.

Menu: Power


This menu item contains four submenus:

**Standby**


Sets the time after which the Compact 7 HD goes into standby mode to conserve power. Pressing any button will take the unit out of standby mode. By default, the standby time is set to 2 minutes.

**Power off**

Sets the time after which the Compact 7 HD is automatically switched off. By default, the power-off time is set to 4 minutes. These 4 minutes are activated once the default standby time of 2 minutes has expired. By default, the unit is therefore automatically switched off after 6 minutes.

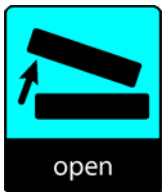**Open**

Enables or disables the automatic power-on function upon opening the Compact 7 HD. By default, the Compact 7 HD will power on upon opening the unit.

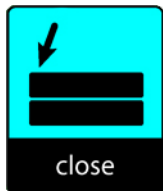**Close**

Enables or disables the automatic power-off function upon closing the Compact 7 HD. By default, the Compact 7 HD will power off upon closing the unit.

Submenu Standby

By default, the standby time is set to 2 minutes. To adjust the standby time of the Compact 7 HD:

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Power and activate this menu option by pressing the Mode button.
- Select the Standby option by using the + or – button. Press the Mode button to confirm your choice.
- Select the time after which the unit will go into standby mode by using the – button to decrease or the + button to increase the time. Selecting DISABLED will disable the automatic standby function.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Submenu Power off

To activate the Compact 7 HD power-off time:

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Power and activate this menu option by pressing the Mode button.
- Select the Power off option by using the + or – button. Press the Mode button to confirm your choice.
- Select the time after which the unit will power off by using the – button to decrease or the + button to increase the time. Selecting DISABLED will disable the automatic power off function.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Submenu Open

To enable or disable the power-on function upon opening the Compact 7 HD:

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Power and activate this menu option by pressing the Mode button.
- Select the Open option by using the + or – button. Press the Mode button to confirm your choice.
- To enable the power-on function upon opening the unit, select the value POWER ON by using the + or – button. Selecting NO ACTION will disable the power-on function upon opening the unit.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Submenu Close

To enable or disable the power-off function upon closing the Compact 7 HD:

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Power and activate this menu option by pressing the Mode button.
- Select the Close option by using the + or – button. Press the Mode button to confirm your choice.
- To enable the power-off function upon closing the unit, select the value POWER OFF by using the + or – button. Selecting NO ACTION will disable the power-off function upon closing the unit.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Menu: Beep



This menu item allows you to enable or disable the feedback tones. By default, the tones are enabled.

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Beep and activate this menu option by pressing the Mode button.
- To enable the sounds, select the value ON by using the + or – button. Selecting OFF will disable the sounds.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Menu: Light

This menu item allows you to enable or disable the object lights - located to the left and right of the camera - for distant viewing. By default, the object lights are enabled.

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Light and activate this menu option by pressing the Mode button.
- To enable the object lights, select the value ON by using the + or – button. Selecting OFF will disable the object lights.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Menu: Color

The Compact 7 HD supports four high contrast modes. For each of these four modes, the foreground and background colors can be selected. Three of the high contrast modes can be disabled if just one high contrast mode is required.

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Color and activate this menu option by pressing the Mode button.
- Select the high contrast mode with the + button to move up or the – button to move down in the submenu Color. Press the Mode button to confirm your choice.

- To select new high contrast colors for the foreground and background, use the + button to move up or the – button to move down within the list of color combinations.
- High contrast modes 2, 3 and 4 can be disabled by selecting the DISABLED value.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Menu: Reset



The Compact 7 HD can be reset to the factory default settings. Any settings that have been adjusted will be restored to factory defaults.

- Activate the menu by pressing the + and – buttons simultaneously for two seconds.
- Use the + button to move up or the – button to move down within the menu. Select the menu option Reset and activate this menu option by pressing the Mode button.
- To restore the factory defaults, select YES by using the + or – button. Choosing NO will leave all settings as they are.
- Press the Mode button to confirm your choice and return to live video mode.

Compact 7 HD

Geavanceerde eigenschappen en functies



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands
Phone: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Compact 7 HD!

Optelec's unieke autofocus elektronische beeldschermloep laat u gedrukte teksten en afbeeldingen bekijken en vergroten in hoge resolutie HD kwaliteit, volledig in kleur of in één van de hoog contrast standen. Het 7" scherm van de Compact 7 HD, gecombineerd met de lage vergroting van 2.5 keer, geeft u maximaal overzicht en biedt tegelijkertijd tot 30 keer vergroting voor gebruikers die een hogere vergroting wensen.

Met zijn multifunctionele ontwerp, unieke verlichting, auto focus en geïntegreerde leesstand, kan de Compact 7 HD gebruikt worden voor lezen, het bekijken van afbeeldingen, prijskaartjes, displays en nog veel meer, zowel thuis als onderweg.

Mocht u vragen of suggesties hebben betreffende het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw leverancier of direct met het Optelec hoofdkantoor (zie gegevens op de laatste pagina van deze handleiding). Uw reactie stellen wij op prijs. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van uw Compact 7 HD

Over deze handleiding

Optelec verbetert continue haar producten en de functionaliteit ervan. Het kan daarom voorkomen dat deze handleiding niet de meest recente versie is. Kijk daarom op onze website www.optelec.com onder Support om te zien of er een recentere versie beschikbaar is.

Deze handleiding geeft u een overzicht van de mogelijkheden en het gebruik van de Compact 7 HD. Wij raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen alvorens u het product gaat gebruiken.

Inhoud van de verpakking


De Compact 7 HD verpakking bevat de volgende items:

- De Compact 7 HD beeldschermloop
- Een beschermende tas
- Een adapter met netsnoer
- 4 landspecifieke adapter opzetstukken (EU, US, UK en AU)
- Een reinigingsdoekje voor het scherm en de spiegel
- *Compact 7 HD Installatie en gebruik*
- *Compact 7 HD Veiligheid en verzorging*

Indien één of meerdere items ontbreken, neem dan contact op met uw leverancier.

2. Aan de slag


De Compact 7 HD is op de juiste wijze voor u geplaatst wanneer het beeldscherm naar boven wijst en de grote witte knop en oranje aan/uit knop onderaan het scherm zitten.

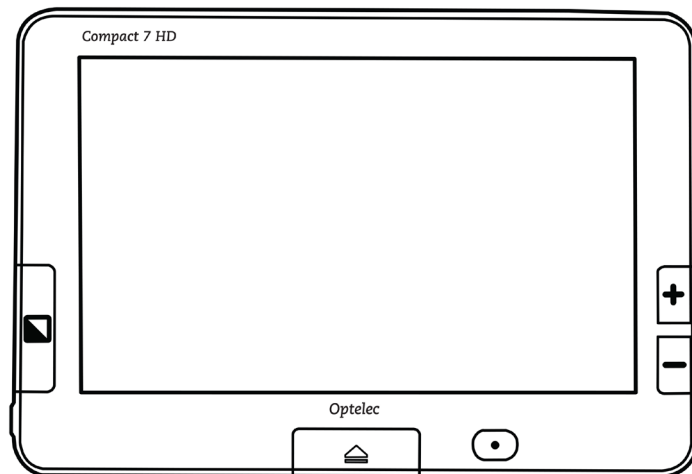


Het gebruik van de Compact 7 HD in de open/gesloten positie

De Compact 7 HD kan op twee manieren worden gebruikt: open of in de gesloten positie. In de gesloten positie houdt u het apparaat in uw hand en wijst u met de camera (die zich aan de achterzijde van het apparaat bevindt) richting het object of de tekst die u wenst te bekijken.

De gesloten positie is ideaal om snel objecten en documenten te bekijken..

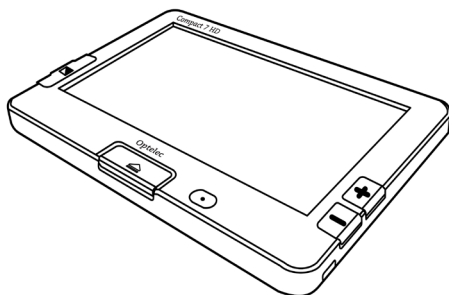

Compact 7 HD dicht

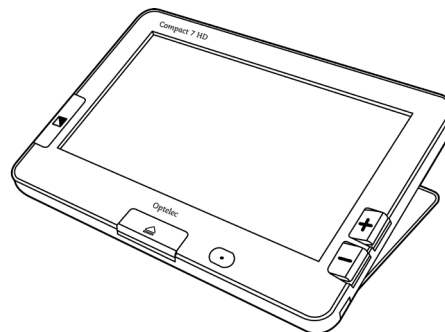


Compact 7 HD open

In de open positie is het scherm ingesteld in een ergonomische hoek voor lezen en wijst de camera naar beneden. De open positie maakt het mogelijk om langere teksten te lezen, dankzij de geïntegreerde leesstand.

Om het apparaat te openen, volgt u de volgende stappen:

1. Leg de Compact 7 HD voor u, met de grote witte knop en oranje aan/uit knop naar u toe.
2. Druk op de grote witte knop, in het midden onderaan. Het scherm gaat nu omhoog en de Compact 7 HD gaat aan.

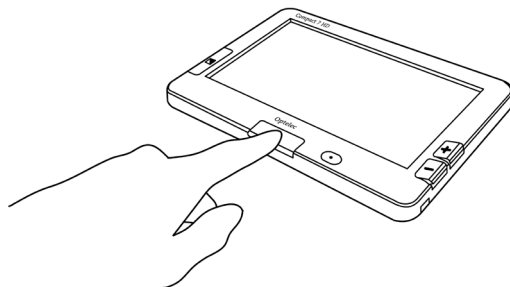


Het schoonhouden van de camera lens en de spiegel

Voor een optimaal beeld, is het aanbevolen om de camera lens en de spiegel van het apparaat schoon te. Een vieze lens resulteert in een troebel beeld en kan ervoor zorgen dat de autofocus camera niet goed kan scherpstellen. Een schone spiegel is belangrijk om donkere en lichte vlekken te voorkomen en om een egaal verlicht beeld te krijgen. Om de camera lens en de spiegel te reinigen, gebruikt u het meegeleverde reinigingsdoekje of een andere zachte doek die geschikt is voor camera lenzen.

Let op: Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om de camera lens en spiegel te reinigen.

Knoppen

De Compact 7 HD heeft de volgende knoppen:

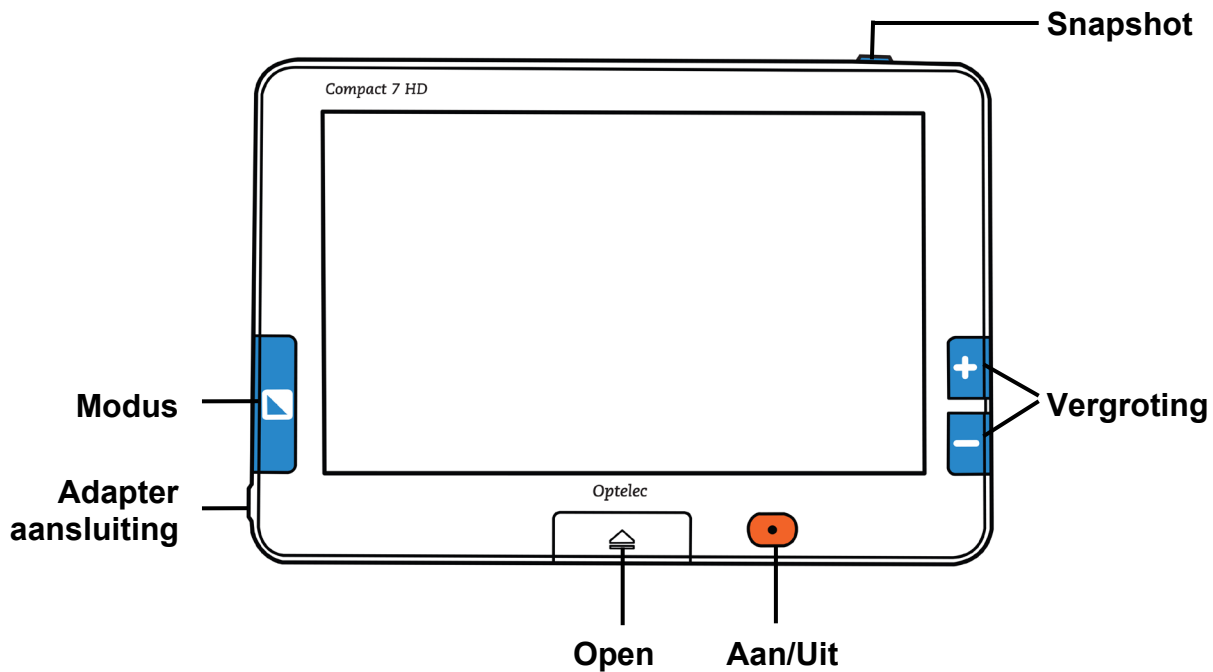

Open

Door op witte knop in het midden onderaan. Het scherm gaat omhoog en de Compact 7 HD gaat aan.

Modus

Door op de modus knop links op het scherm te drukken kunt u één van de verschillende leesstanden selecteren. Door deze knop drie seconden ingedrukt te houden kunt u de objectverlichting uitschakelen. Druk nogmaals 3 seconden op de modus knop om de verlichting in te schakelen.

Vergroting

Door de + of – knop rechts van het scherm ingedrukt te houden kunt u de vergroting verhogen of verlagen. Door deze knoppen 1 seconde tegelijkertijd ingedrukt te houden opent of sluit u het menu van de Compact 7 HD.

Snapshot knop


Met de snapshotknop rechts boven op het apparaat kunt u een tijdelijke foto maken van een tekst of object, waarna u deze dichterbij u ogen kunt brengen en kunt inzoomen.

Aan/Uit knop

Door één seconde op de ovale oranje knop (rechts van de grote witte knop) te drukken, kunt u het apparaat aan- en uitzetten.

**Adapter aansluiting
(12V)**

De adapter aansluiting bevindt zich aan de linker zijde, onderaan. De adapter connector past in deze aansluiting. Gebruik alleen de meegeleverde adapter om uw Compact 7 HD op te laden.

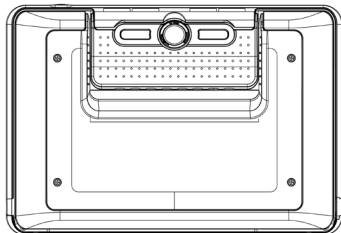

De camera van de Compact 7 HD bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Links en rechts van de camera bevinden zich twee lampjes, die gebruikt worden wanneer het apparaat in de gesloten positie wordt gebruikt.

Het apparaat aan- en uitzetten

Om de Compact 7 HD aan te kunnen zetten, dient het apparaat opgeladen te zijn. Als het apparaat is opgeladen, drukt u één seconde op de ovale oranje aan/uit knop rechts van de grote witte knop. Het apparaat start in de modus waarin deze is uitgezet. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u nogmaals één seconde op de ovale oranje knop.

Wanneer u de Compact 7 HD aanzet, duurt het ongeveer 3 seconden voordat het camerabeeld wordt getoond op het scherm.

Het apparaat kan ook aangezet worden door het apparaat te openen zoals eerder omschreven (dit is de standaard instelling). Door het apparaat te sluiten wordt deze automatisch uitgezet. De “uitzetten bij sluiting” of “aanlaten bij sluiting” functie is in te schakelen in het menu. Kijk daarvoor in [hoofdstuk 4](#) voor meer informatie over het aanpassen van deze instellingen.

Aanpassen van de vergroting

Om de vergrotingsinstellingen van het apparaat aan te passen, drukt u op de + of – knop die zich rechts van het scherm bevinden. Druk de + knop om de vergroting te verhogen of de – knop om de vergroting te verlagen. In de open stand, wanneer het apparaat op een document geplaatst is, begint de vergroting bij 2.5 keer vergroting en kan deze worden verhoogd tot 30 keer vergroting. De Compact 7 HD is voorzien van een autofocus camera. Deze maakt het mogelijk om het apparaat te gebruiken in uw handen in de gesloten positie. Dit geeft u meer overzicht, maar zal de minimale en maximale vergroting verlagen.

Een leesstand selecteren

Door op de modus knop links van het scherm te drukken, kunt u een keuze maken uit één van onderstaande leesstanden:

Foto: voor het bekijken van kleuren foto's of teksten

Negatief: voor het lezen in hoog contrast wit op zwart

Positief: voor het lezen in hoog contrast zwart op wit

Hoog contrast **kleurencombinatie 1**

Hoog contrast **kleurencombinatie 2**

Door de modus knop 3 seconden ingedrukt te houden kunt u de objectverlichting in- of uitschakelen. Bij het veranderen van een leesstand zal de objectverlichting automatisch inschakelen.

Het gebruik van de snapshot functie

De snapshot functie maakt het mogelijk om een tijdelijke foto te maken van een afbeelding of tekst.

- Plaats of houd de Compact 7 HD op of voor de afbeelding of tekst die u wenst te zien.
- Druk op de snapshot knop (rechts op de unit)

- Door de Compact 7 HD dicht bij uw ogen te brengen, kunt u de afbeelding of tekst van dichtbij bekijken.
- Gebruik de + of – knop om de vergroting van het getoonde beeld aan te passen.
- Druk op de modus knop om de leesstand aan te passen.
- Terwijl u de snapshot bekijkt kunt u nogmaals op de snapshot knop drukken om deze in te bewaren en terug te keren naar het normale camera beeld. Met een kort piepje en een melding op het scherm krijgt u de bevestiging dat het beeld is opgeslagen. Er kunnen tot 75 beelden opgeslagen worden in het geheugen. Een nieuw opgeslagen beeld zal het oudste opgeslagen beeld vervangen als het geheugen al 75 beelden bevat.

OF

- Druk nogmaals op de snapshot knop om terug te keren naar het normale camera beeld. Het is nu mogelijk om een nieuwe snapshot te maken.

Let op: als de snapshot knop wordt losgelaten voordat deze twee piepjes heeft gegeven, is de foto niet opgeslagen.

Lees meer over het opslaan en verwijderen van de foto's in [hoofdstuk 4](#).

3. Netstroom en batterijgebruik

De Compact 7 HD opladen

De Compact 7 HD wordt geleverd met een adapter met netwerksnoer en 4 landspecifieke adapter opzetstukken voor EU, US, UK en AU stopcontacten. Kies het opzetstuk dat geschikt is voor uw land en koppel deze aan de adapter.

Om de Compact 7 HD op te laden dient u de adapter aan te sluiten op de adapter ingang aan de linkerkant van het apparaat. Steek de andere kant van de adapter in het stopcontact. De oranje LED lamp naast de 12V DC IN aansluiting zal continu branden gedurende de tijd dat de Compact 7 HD oplaadt. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, zal de LED lamp groen branden. Wanneer de LED lamp knippert betekent het dat er een probleem is met het opladen. In dit geval dient u de adapter los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

Het opladen van de Compact 7 HD duurt ongeveer 3.5 uur. Een volledig opgeladen Compact 7 HD kan ongeveer 5 uur werken, afhankelijk van de stroominstellingen. In verband met uw veiligheid wijzen wij u erop dat alleen de adapter die meegeleverd is met uw Compact 7 HD gebruikt mag worden voor het opladen van het apparaat.

Stand-by en Automatisch Uitschakelen

De Compact 7 HD zal automatisch naar de stand-by modus gaan indien er gedurende twee minuten geen knoppen zijn ingedrukt of indien er geen verandering van het beeld geweest is. Door op een willekeurige knop te drukken zal het apparaat weer worden ingeschakeld. Vier minuten nadat de Compact 7 HD in stand-by modus is gegaan, zal deze automatisch worden uitgeschakeld. Door op de oranje aan/uit knop te drukken zal het apparaat weer ingeschakeld worden. De stand-by tijd en de automatisch tijd voor uitschakelen kunnen beiden worden aan- of uitgezet in het menu van de Compact 7 HD. In het volgende hoofdstuk kunt u meer informatie vinden over het wijzigen van deze instellingen.

Batterij waarschuwing



Wanneer de capaciteit van de batterij lager dan 5% van de totale capaciteit is, zal er iedere minuut een batterij waarschuwing worden gegeven middels een batterij icoontje in het beeldscherm en een piepgeluid. Wanneer dit gebeurt, dient u het apparaat zo snel mogelijk op te laden. Wanneer de batterij leeg is, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

Controleer altijd, als het apparaat niet aangaat, of de batterij is opgeladen.

4. Het Compact 7 HD Menu

Toont de batterij status en de firmware versie.	
Bekijk of verwijderen de opgeslagen shapshot beelden.	
Aanpassen van de helderheid van het beeldscherm.	
Aanpassen van de stroominstellingen.	
In- of uitschakelen van het geluid.	
In- of uitschakelen van de objectverlichting.	
Aanpassen van de kleuren van de 4 hoogcontrast standen.	
Terugzetten van de standaard fabrieksinstellingen.	

Let op: het menu van de Compact 7 HD is in het Engels. Voor uw gemak zullen wij in deze handleiding alle menu opties vertalen naar het Nederlands

Het menu activeren



Om het menu te activeren, drukt u tegelijkertijd op de + en – knop gedurende twee seconden.



Navigeren door het menu



Gebruik de + of – knop om te navigeren tussen de verschillende menu opties. De modus knop aan de linkerkant van het beeldscherm zal de gekozen menu optie activeren of de keuze bevestigen. Gebruik de + of – knop om een keuze te wijzigen.



Het menu verlaten



Om het menu te verlaten, drukt u de + en – knop tegelijkertijd in gedurende twee seconden.



Menu: Informatie (Information)

Deze menukeuze toont de status van de batterij en de huidige firmware versie van uw apparaat. In deze menu optie kunt u geen wijzigingen aanbrengen.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- De eerste menu optie is Informatie.
- Om het menu te verlaten, druk de modus knop of tegelijkertijd op de + en – knop gedurende twee seconden.

Menu: Afbeeldingen (Images)

Dit menu bevat 3 submenu's:

- View (Bekijken): Bekijk opgeslagen beelden
- Delete (Verwijderen): Verwijder opgeslagen beelden
- Delete all (Alles verwijderen): Verwijder alle opgeslagen beelden

Submenu View (Bekijken):

Om opgeslagen beelden te bekijken:

- Activeer het menu: druk tegelijkertijd op de + en – knop gedurende twee seconden.
- Gebruik de + knop om omhoog en de – knop om naar beneden te gaan in het menu. Kies het menu Images en activeer deze met de modus knop.
- Selecteer het View submenu (met de + en – knop kan door de opties worden gelopen). Gebruik de modus knop om de keuze te bevestigen.
- Selecteer het gewenste beeld om te bekijken met de + knop (volgend beeld) of de – knop (vorige beeld).
- Druk op de modus knop om terug te gaan naar het camerabeeld.

**Submenu Delete (Verwijderen)**

Om beelden te verwijderen:

- Activeer het menu: druk tegelijkertijd op de + en – knop gedurende twee seconden.
- Gebruik de + knop om omhoog en de – knop om naar beneden te gaan in het menu. Kies het menu Images en activeer deze met de modus knop.
- Selecteer het Delete submenu (met de + en – knop kan door de opties worden gelopen). Gebruik de modus knop om de keuze te bevestigen.
- Selecteer het gewenste beeld om te wissen met de + knop (volgend beeld) of de – knop (vorige beeld). Druk op de modus knop om een beeld te verwijderen.
- Druk op de – knop om het beeld te verwijderen.



- Druk op de + knop om te annuleren.
- Druk op de modus knop om terug te gaan naar het camerabeeld.

Submenu Delete all (Alles verwijderen)

Om alle beelden te verwijderen:

- Activeer het menu: druk tegelijkertijd op de + en – knop gedurende twee seconden.
- Gebruik de + knop om omhoog en de – knop om naar beneden te gaan in het menu. Kies het menu Images en activeer deze met de modus knop.
- Selecteer het Delete all submenu (met de + en – knop kan door de opties worden gelopen). Gebruik de modus knop om de keuze te bevestigen.
- Druk op de – knop om alle beelden te verwijderen.
- Druk op de + knop om te annuleren.
- Druk op de modus knop om terug te gaan naar het camerabeeld.



Menu: Helderheid (Brightness)



Deze menukeuze geeft u de mogelijkheid om de helderheid van het beeldscherm in te stellen.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.

- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Helderheid en activeer uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Kies de helderheid van het beeldscherm door te drukken op de + of – knop om respectievelijk de helderheid te verhogen of verlagen. Er zijn 5 helderheidsniveaus om uit kiezen. De standaard instelling is niveau 4.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Menu: Stroominstellingen (Power)



Deze menukeuze bevat vier submenu's:



Stand-by (Standby)


Stelt de tijd in waarop de Compact 7 HD in stand-by modus gaat om stroom te besparen. Door op een willekeurige knop te drukken wordt het apparaat uit stand-by gehaald. Standaard is de stand-by tijd ingesteld op 2 minuten.



Power off Stelt de tijd in waarop de Compact 7 HD automatisch uitschakelt. Standaard is deze ingesteld op 4 minuten. Deze 4 minuten worden geactiveerd na de standaard stand-by tijd van 2 minuten. Dit betekent dat het apparaat standaard automatisch uitschakelt na 6 minuten.



Openen (Open) Stelt het automatisch aanzetten van het apparaat in bij het openen van de Compact 7 HD. Standaard is het apparaat ingesteld om aangezet te worden wanneer het apparaat wordt geopend.

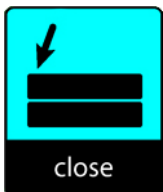

Sluiten (Close) Stelt het automatisch uitschakelen van het apparaat in bij het sluiten van de Compact 7 HD. Standaard is het apparaat ingesteld om uitgeschakeld te worden wanneer deze wordt gesloten.

Submenu Stand-by (Standby)

Standaard is de stand-by tijd ingesteld op 2 minuten. Om deze stand-by tijd aan te passen:

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Power en activeer uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Kies voor het submenu Standby door middel van de + en – knop en activeer uw keuze nogmaals door op de modus knop te drukken.
- Kies de tijd waarop het apparaat automatisch in de stand-by modus schakelt door op de + of – knop te drukken om respectievelijk de tijd te verhogen of verlagen. Kies voor Disabled (uitschakelen) om de automatische stand-by functie te deactiveren.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Submenu Uitschakelen (Power Off)

Om de tijd waarop de Compact 7 HD automatisch wordt uitgeschakeld in te stellen (staat standaard op 4 minuten):

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Power Off en activeer uw keuze door op de modus knop te drukken.

- Kies de uitschakeloctie door te drukken op de + of – knop om door de opties te scrollen. Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen.
- Kies de tijd waarop het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld door op de + of – knop te drukken om respectievelijk de tijd te verhogen of verlagen. Door voor Disabled (uitschakelen) te kiezen zal de automatische uitschakeltijd worden gedeactiveerd.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Submenu Openen (Open)

Om automatische inschakeling van het apparaat bij het openen hiervan in te stellen:

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Power en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Kies voor het submenu Open door middel van de + en – knop en activeer uw keuze door nogmaals op de modus knop te drukken.
- Om het apparaat automatisch te laten inschakelen bij het openen hiervan, selecteert u de keuze 'POWER ON' met de + en – knop. Door voor 'NO ACTION' te kiezen zal het apparaat niet automatisch worden ingeschakeld als deze wordt geopend.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Submenu Sluiten (Close)

Om het automatisch uitschakelen van het apparaat bij het sluiten hiervan in te stellen:

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Power en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Kies voor het submenu Close door middel van de + en – knop en activeer uw keuze door
- nogmaals op de modus knop te drukken.
- Om het apparaat automatisch te laten uitschakelen bij het sluiten hiervan, selecteert u de keuze 'POWER OFF' met de + en – knop. Door voor 'NO ACTION' te kiezen zal het apparaat niet automatisch worden uitgeschakeld als deze wordt gesloten.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Menu: Geluid (Beep)

Deze menukeuze geeft u de mogelijkheid om de feedback geluiden in- of uit te schakelen. Standaard zijn de geluiden ingeschakeld.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Beep en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Om de geluiden in te schakelen, kies voor ‘ON’ door middels de + en – knop te scrollen. Door ‘OFF’ te kiezen zullen de geluiden worden uitgeschakeld.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Menu: Licht (Light)

Deze menukeuze geeft u de mogelijkheid om de objectverlichting (die te vinden zijn links en rechts van de camera) in- of uit te schakelen. Standaard is de objectverlichting ingeschakeld.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.

- Gebruik de **+** of **-** knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Light en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Om de verlichting in te schakelen, kies voor 'ON' met de **+** en **-** knop. Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen. Door 'OFF' te kiezen zal de verlichting worden uitgeschakeld.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Menu: Kleuren (Color)



De Compact 7 HD ondersteunt vier hoogcontrast standen. Voor elk van deze vier standen worden de voorgrond en de achtergrond kleuren worden ingesteld. Drie van de vier hoogcontrast standen kunnen worden uitgeschakeld indien er slechts één stand nodig is.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de **+** en **-** knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de **+** of **-** knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Color en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Selecteer de hoog contrast stand die u in wenst te stellen door met de **+** en **-** knop in het menu te navigeren. Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen.

- Om een nieuwe hoogcontrast kleur in te stellen voor de voor- en achtergrond gebruikt u de + en – knop om te navigeren door de lijst met kleurcombinaties.
- Hoogcontrast stand 2, 3 en 4 kunnen worden uitgeschakeld door OFF te kiezen.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Menu: Fabrieksinstellingen (Reset)



De Compact 7HD kan worden teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen. Alle opties die zijn aangepast worden hiermee teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

- Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende twee seconden.
- Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Reset en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
- Om de fabrieksinstellingen terug te zetten, kiest u ‘YES’ door middel van de + en – knop. Door ‘NO’ te kiezen blijven alle instellingen ongewijzigd.
- Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het normale camera beeld.

Compact 7 HD

Fonctionnalités et fonctions avancées



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
Pays-Bas
Tel.: +31 (0)88 678 34 44
Courriel: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introduction

Nous vous félicitons d'avoir choisi le Compact 7 HD !

Unique au monde, le Compact 7 HD d'Optelec est un téléagrandisseur électronique doté d'une fonction de mise au point automatique qui vous permet de grossir des textes imprimés et de visualiser des images en mode couleur ou en mode à contraste élevé sur un moniteur HD haut de gamme. Son écran de grand angle de 7 pouces vous offre un niveau de grossissement allant de 2.5 fois pour une plus grande visualisation jusqu'à 30 fois pour un niveau de grossissement plus puissant.

Son design unique et polyvalent, sa conception d'éclairage unique, sa mise au point automatique, ainsi que son support de lecture intégré, font du Compact 7 HD un outil essentiel pour lire, regarder des photos, voir les prix en magasin et bien plus encore. Il peut être employé à la maison ou être apporté avec vous à la bibliothèque, au centre commercial, en voyage, etc.

Si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez communiquer avec votre distributeur ou avec le siège social d'Optelec, en consultant la liste des coordonnées des différents bureaux d'Optelec, présentée à la dernière page de ce manuel. Vos commentaires sont grandement appréciés. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Compact 7 HD !

À propos du manuel

Chez Optelec, nous cherchons constamment à améliorer nos produits et leurs fonctions. Par conséquent, il est possible que ce manuel ne soit pas la dernière version disponible. Vous pouvez toujours télécharger le manuel le plus à jour sur www.optelec.com dans le volet Assistance.

Ce manuel vous permettra de vous familiariser avec les caractéristiques et le fonctionnement du Compact 7 HD. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

Ce que contient la boîte


Le matériel du Compact 7 HD comprend les éléments suivants :

- Le téléagrandisseur Compact 7 HD
- Un étui de protection
- Une dragonne
- Un câble d'alimentation
- 4 adaptateurs régionaux (Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie)
- Un linge de nettoyage d'écran
- *Compact 7 HD Configuration et utilisation*
- *Compact 7 HD Sécurité et entretien*

Si vous constatez que l'un des éléments mentionnés ci-haut est manquant, veuillez communiquer avec votre distributeur.


2. Connaître votre Compact 7 HD

Vous êtes certain que le Compact 7 HD est dans la bonne position devant vous lorsque l'écran est orienté vers le haut et que le bouton de couleur blanc ainsi que l'interrupteur orange marche / arrêt se trouvent au bas de l'écran.

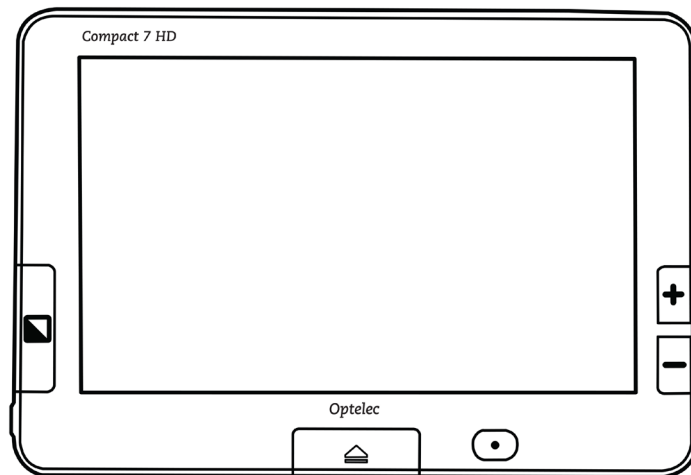


Utiliser le Compact 7 HD en position ouverte ou fermée

Vous pouvez utiliser le Compact 7 HD de deux façons, soit dans la position ouverte ou dans la position fermée. Pour l'utiliser dans la position fermée, tenez l'unité dans votre main et pointez la camera située à l'arrière de l'unité vers l'objet ou le texte que vous désirez visualiser ou lire. La position fermée est idéale pour visualiser des objets et pour parcourir rapidement des documents.

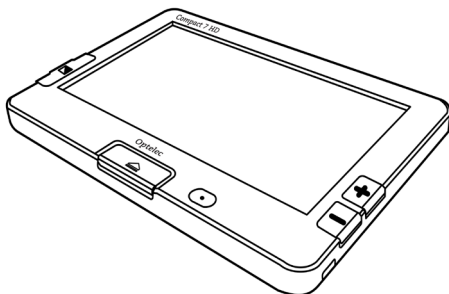

La position fermée

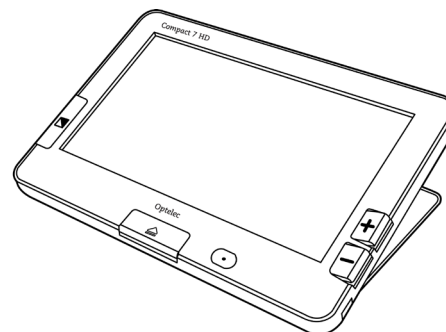


La position ouverte

Lorsque l'appareil est en position ouverte, l'écran se retrouve dans un angle ergonomique pour la lecture et la caméra pointe vers le bas. La position ouverte vous permet de lire des textes plus longs, grâce au support de lecture intégré.

Pour ouvrir l'unité, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le Compact 7 HD devant vous de façon à ce que l'écran soit orienté vers le haut et que le bouton blanc et l'interrupteur orange marche/arrêt se trouvent au bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche blanche située au centre en bas de l'écran. L'écran devrait alors s'ouvrir et votre appareil se mettre en marche.

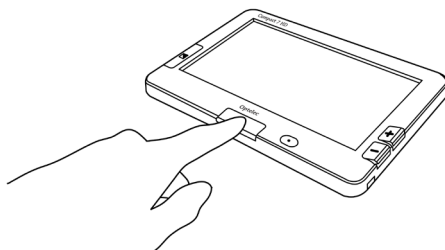


Nettoyer la lentille de la caméra et le miroir

Pour une meilleure qualité d'image, nous vous suggérons de maintenir la lentille de la caméra et le miroir de l'objectif propres. Une lentille sale pourrait produire des images floues et affecter le bon fonctionnement de la mise au point automatique. La propreté du miroir de l'objectif est importante, afin de prévenir des taches sombres ou claires et garantir une image d'une clarté égale. Pour nettoyer la lentille de la caméra et le miroir, utilisez le linge de nettoyage fourni ou un autre chiffon à nettoyage de lentille.

Nota : Ne pas utiliser d'eau ou d'agent nettoyant lors du nettoyage de la lentille et du miroir.

Les boutons

Le Compact 7 HD comprend les boutons suivants:

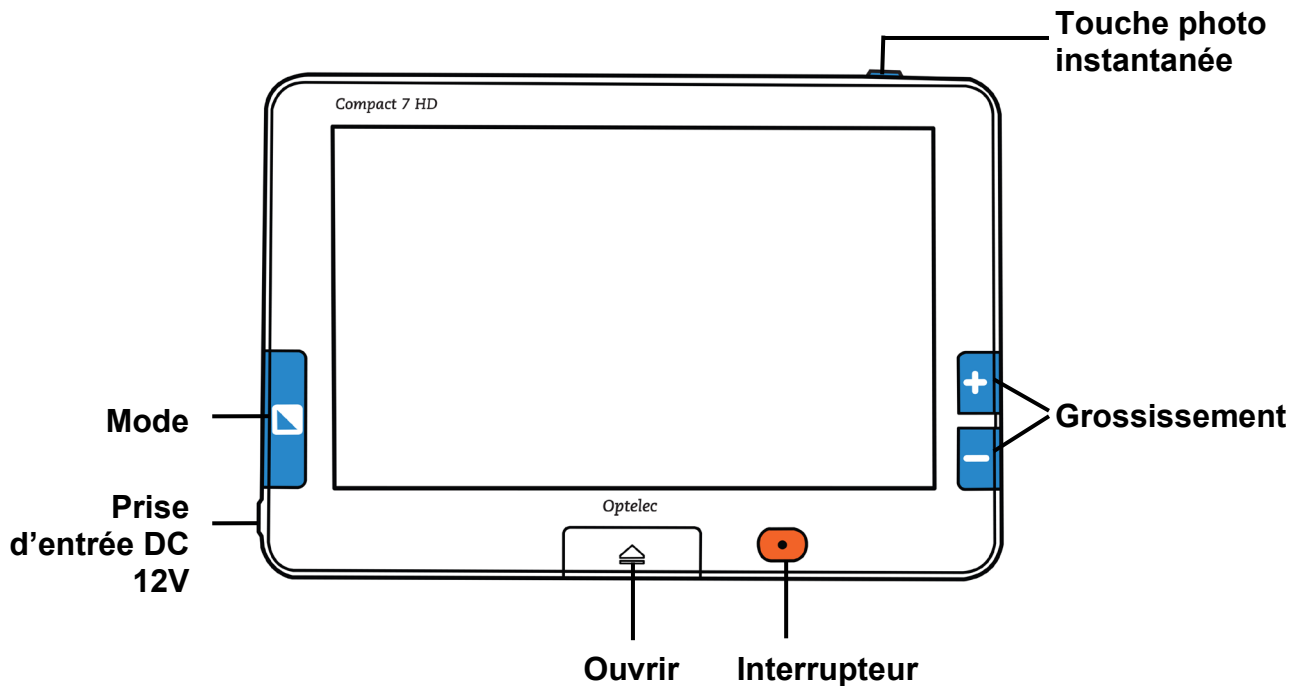

Ouvrir

Appuyer sur le bouton blanc situé en bas de l'écran au centre pour ouvrir votre Compact 7 HD.

Mode

Le bouton Mode situé sur le côté gauche de l'écran vous permet de sélectionner l'un des modes de visualisation. Appuyer sur ce bouton pendant environ trois secondes, éteint les deux lumières d'objet.

Grossissement

Les touches + et – situées sur le côté droit de l'écran vous permet d'augmenter ou de réduire le niveau de grossissement. Appuyer sur ces deux boutons simultanément vous permettra d'ouvrir ou de fermer le menu du compact 7 HD.

Touche photo instantanée


La touche photo instantanée située sur le côté supérieur droit de l'unité vous permet de prendre une photo temporaire d'un texte ou d'une image éloignée pour une visualisation plus rapprochée.

Interrupteur

L'interrupteur est le bouton ovale de couleur orange, qui est situé à droite de la touche Ouvrir qui elle est au centre du bas de l'écran. Maintenir l'interrupteur appuyé pendant une seconde pour allumer ou éteindre votre Compact 7 HD.

**Prise d'entrée DC
12V**

Compact 7 HD. Le câble d'alimentation doit être branché dans cette prise. Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre Compact 7 HD pour alimenter l'unité et recharger sa pile.

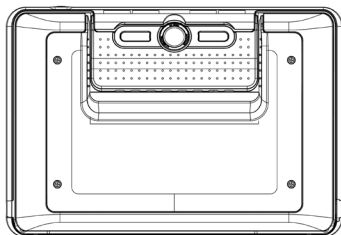

La caméra du Compact 7 HD se trouve à l'arrière de l'unité. À la gauche et à la droite de la caméra, il y a deux lumières d'objet qui s'allument lorsque l'unité est utilisée dans la position fermée.

Allumer et éteindre le Compact 7 HD

Lorsque vous allumerez le Compact 7 HD pour la première fois, assurez-vous que la pile est chargée à pleine capacité. Une fois chargée, appuyez pendant une seconde sur le bouton orange de l'interrupteur qui est situé à droite du bouton blanc Ouvrir qui est au centre en bas de l'écran. L'unité s'allumera et reviendra au réglage dans lequel vous l'aviez éteinte. Pour éteindre le Compact 7 HD, appuyez de nouveau sur le bouton orange de l'interrupteur pendant une seconde.

Le Compact 7 HD prendra environ trois secondes pour afficher une image à l'écran suivant sa mise en marche.

Vous pouvez aussi allumer l'unité en l'ouvrant (fonction par défaut), tel que décrit dans les paragraphes précédents. Fermer l'unité permet d'éteindre l'appareil. Vous pouvez également le fermer en appuyant sur le bouton de l'interrupteur pendant une seconde ou activez la mise hors tension automatique lors de la fermeture en passant par le menu du Compact 7 HD. Ces fonctions par défaut peuvent être activées ou désactivées dans le menu du Compact 7 HD. Veuillez lire le [chapitre 4](#) pour plus de renseignements sur les procédures à suivre.

Régler le niveau de grossissement

Pour régler le niveau de grossissement, appuyez sur les boutons + ou – qui se trouvent sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton + pour augmenter le niveau de grossissement ou sur le bouton – pour le réduire. Dans la position ouverte et lorsque l'unité est placée sur un document, le niveau de grossissement commence à 2.5 fois et peut être augmenté jusqu'à un maximum de 30 fois.

Le Compact 7 HD est muni d'une caméra à mise au point automatique, ce qui vous permet d'utiliser l'unité en la tenant en position fermée dans votre main. Cette caractéristique vous permet d'obtenir une meilleure vue d'ensemble, mais les niveaux de grossissement minimum et maximum s'en trouvent diminués.

Sélectionner le mode de visualisation

Appuyez sur le bouton Mode qui se trouve sur le côté gauche de l'unité pour choisir l'un des modes de visualisation suivants :

Mode photo: visualisation de textes et d'images en couleur

Mode négatif : lecture à contraste élevé, blanc sur noir

Mode positif: lecture à contraste élevé, noir sur blanc

Combinaison de couleurs 1 à contraste élevé

Combinaison de couleurs 2 à contraste élevé

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes pour allumer ou éteindre les lumières d'objet. Les lumières d'objet se rallumeront automatiquement lorsque vous changerez de mode.

Utiliser le bouton photo instantanée

Le bouton capture instantanée permet de prendre une capture temporaire d'un texte ou d'une image.

- Tenez ou placez le Compact 7 HD au-dessus du texte ou de l'image que vous souhaitez capturer.
- Appuyez sur le bouton capture instantanée, situé sur le côté droit de l'appareil et vers le haut.

- Vous pouvez ensuite approcher le Compact 7 HD vers vous pour mieux voir l'image ou le texte capturé.
- Appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode de visualisation.
- Utilisez les boutons de grossissement à droite de l'écran pour changer le grossissement de l'image affichée.
- Pour sauvegarder l'image et revenir en mode vidéo, appuyez sur le bouton capture instantanée pendant 2 secondes. Un court bip sonore et un indicateur à l'écran confirmera que l'image a été sauvegardée. La mémoire du Compact 7 HD peut conserver jusqu'à 75 images. Chaque nouvelle capture remplacera la plus vieille image en mémoire.

OU

- Appuyez de nouveau sur le bouton capture instantanée pour revenir en mode vidéo. Vous pouvez maintenant faire une nouvelle capture d'image.

Nota: Si vous relâchez le bouton photo instantanée avant l'émission des deux bips sonores, la photo n'est pas sauvegardée.

Lire plus sur visualiser en supprimer les images capturées dans le [chapitre 4](#).

3. Chargement de la pile

Charger le Compact 7 HD

Le Compact 7 HD est livré avec un câble d'alimentation ainsi que quatre adaptateurs régionaux (Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie). Choisissez l'adaptateur qui convient à votre pays et connectez-le au câble d'alimentation.

Pour recharger la pile du Compact 7 HD, vous n'avez qu'à connecter le câble d'alimentation à la prise femelle DC 12V, qui se trouve du côté gauche de l'unité. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise de courant électrique. L'indicateur d'alimentation situé à côté de la prise DC 12V se mettra à briller d'une couleur orange continue pour vous indiquer que le chargement de la pile est en cours. Une fois le chargement terminé, l'indicateur d'alimentation se mettra à briller d'une couleur verte. Si l'indicateur d'alimentation se met à clignoter, cela indique un problème avec le chargement. Débranchez le câble d'alimentation de l'unité, puis recommencez la procédure de nouveau.

La recharge de la pile du Compact 7 HD peut durer environ 3,5 heures. La durée d'utilisation du Compact 7 HD lorsque pleinement chargée est d'environ 5 heures, selon les paramètres d'alimentation. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation qui vous a été fourni avec votre Compact 7 HD pour recharger la pile.

Mise en veille et mise hors tension automatique

La mise en veille s'active automatiquement lorsque votre Compact 7 HD cesse d'être utilisé, ou si aucun changement d'image n'est détecté depuis plus de deux minutes. Pour remettre votre Compact 7 HD en fonction, appuyez sur n'importe quel bouton. Si le Compact 7 HD reste en mode veille plus de quatre minutes, il s'éteindra automatiquement. Pour le rallumer, il faudra appuyer sur le bouton orange de l'interrupteur qui se trouve du côté droit de l'unité. En passant par le menu du Compact 7 HD, vous pourrez régler le temps des fonctions de la mise en veille et de la mise hors tension automatique, ou désactiver ces fonctions. Veuillez consulter le chapitre suivant pour connaître la procédure à suivre.









Avis de pile faible



Lorsque la pile est à moins de 5% de sa capacité totale, le Compact 7 HD émettra un avertissement à cet effet à toutes les minutes, en affichant l'icône de pile faible pendant deux secondes et en émettant un bip sonore. Vous devez alors brancher l'unité dans une prise de courant électrique pour recharger votre unité le plus rapidement possible. Lorsque la pile est complètement épuisée, l'unité s'éteint automatiquement.

Si votre unité ne s'allume pas, assurez-vous que la pile est bien chargée.

4. Le menu du Compact 7 HD

Indique l'état de la pile et la version courante du logiciel.	
Pour visualiser ou supprimer les images capturées.	
Vous permet de régler la luminosité de l'écran.	
Vous permet de définir les paramètres d'alimentation.	
Vous permet d'activer ou de désactiver les signaux sonores.	
Vous permet d'activer ou de désactiver les lumières d'objet.	
Vous permet de sélectionner l'une des quatre combinaisons de couleurs à contraste élevé.	
Vous permet de modifier la configuration par défaut.	

Ouvrir le menu



Pour ouvrir le menu, appuyez sur les boutons + et - simultanément pendant deux secondes.



Naviguer dans le menu



Utilisez les boutons + ou - pour naviguer parmi les options du menu. Le bouton Mode à la gauche de l'écran vous permet d'activer l'option choisie ou de confirmer la sélection. Pour modifier une sélection, utilisez les boutons + ou -.



Fermer le menu



Pour fermer le menu, appuyez sur les boutons + et - simultanément pendant deux secondes.



Menu: Information (Information)

Cette option du menu indique l'état de la pile et la version courante du logiciel du Compact 7 HD. Il n'est pas possible d'effectuer des changements dans ce menu.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- La première option dans le menu est Information.
- Fermez le menu en appuyant sur le bouton Mode ou sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.

Menu: Images (Images)

Ce menu contient 3 sous-menus:

- Affichage (View): Pour visualiser les images capturées
- Supprimer (Delete): Pour supprimer les images
- Tout supprimer (Delete all): Pour supprimer toutes les images capturées

Sous-menu Affichage (View):

Pour afficher les images capturées:

- Activez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour vous déplacer vers le haut et le bouton – pour vous déplacer vers le bas à l'intérieur du menu. Sélectionnez l'option de menu et activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Affichage en appuyant sur les boutons + et – pour vous déplacer parmi les options. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez l'image que vous souhaitez visualiser en utilisant le bouton + pour passer à l'image suivante et le bouton – pour revenir à l'image précédente.
- Appuyez sur le bouton Mode pour revenir en mode vidéo.

**Sous-menu Supprimer (Delete):**

Pour supprimer les images capturées:

- Activez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour vous déplacer vers le haut et le bouton – pour vous déplacer vers le bas à l'intérieur du menu. Sélectionnez l'option de menu Images et activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Supprimer en utilisant les boutons + et – pour vous déplacer parmi les options. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.



- Sélectionnez l'image que vous désirez supprimer en utilisant le bouton + pour avancer à l'image suivante et le bouton – pour revenir à l'image précédente.
- Appuyez sur le bouton Mode pour supprimer l'image.
- Appuyez sur le bouton – pour supprimer l'image.
- Appuyez sur le bouton + pour annuler.
- Appuyez sur le bouton Mode pour revenir en mode vidéo.

Sous-menu Tout supprimer (Delete all):

Pour supprimer toutes les images capturées:

- Activez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour vous déplacer vers le haut et le bouton – pour vous déplacer vers le bas à l'intérieur du menu. Sélectionnez l'option de menu Images et activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Tout supprimer en utilisant les boutons + et – pour vous déplacer parmi les options. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur le bouton – pour supprimer toutes les images.
- Appuyez sur le bouton + pour annuler.
- Appuyez sur le bouton Mode pour revenir en mode vidéo.



Menu: Luminosité (Brightness)

Cette option de menu vous permet de régler la luminosité de l'écran.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas du menu. Sélectionnez l'option Luminosité dans le menu, puis activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez le niveau de luminosité en utilisant le bouton + pour l'augmenter ou le bouton – pour le diminuer. Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité. Par défaut, le niveau de luminosité est réglé à 4.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et revenir en mode vidéo.

Menu: Alimentation (Power)


Cette option de menu comprend quatre sous-menus:

**Mise en
veille
(Standby)**


Pour régler le temps de la mise en veille automatique du Compact 7 HD afin d'économiser l'énergie de la batterie. Pour annuler la mise en veille, appuyez sur n'importe quel bouton. Par défaut, le temps requis pour que la mise en veille automatique se mette en marche est réglé à deux minutes.

**Éteindre
(Power
off)**

Pour régler le temps de la mise hors tension automatique du Compact 7 HD. Par défaut, il est réglé à quatre minutes. Ces quatre minutes prennent effet après que les deux minutes (valeur par défaut) de la mise en veille automatique soient expirées. Par défaut, l'unité s'éteindra donc automatiquement après six minutes d'inactivité.

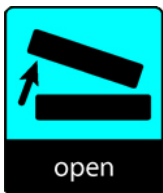**Ouvrir
(Open)**

Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique lors de l'ouverture du Compact 7 HD. Par défaut, le Compact 7 HD s'allume lorsqu'il est ouvert.

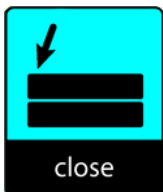**Fermer
(Close)**

Pour activer ou désactiver la mise hors tension automatique lors de la fermeture du Compact 7 HD. Par défaut, le Compact 7 HD s'éteint lorsqu'il est fermé.

Sous-menu Mise en veille (Standby)

Par défaut, le temps d'inactivité requis pour activer la mise en veille automatique est réglé à deux minutes. Pour régler le temps de cette fonction:

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons **+** et **-** simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton **+** pour naviguer vers le haut et le bouton **-** pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Alimentation dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Mise en veille en naviguant le menu avec les boutons **+** ou **-**, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Réglez le temps pour activer la mise en veille en utilisant le bouton **+** pour l'augmenter ou le bouton **-** pour le réduire. Pour désactiver la fonction de mise en veille automatique, choisissez l'option Disabled.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Sous-menu Éteindre (Power off)

Pour régler le temps avant la mise hors tension automatique du Compact 7 HD:

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons **+** et **-** simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton **+** pour naviguer vers le haut et le bouton **-** pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Alimentation dans le menu, puis activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.

- Sélectionnez l'option Éteindre dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Réglez le temps de la mise hors tension automatique en utilisant le bouton + pour l'augmenter et le bouton – pour le réduire. Pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique, choisissez l'option Disabled.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Sous-menu Ouvrir (Open)

Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique lors de l'ouverture du Compact 7 HD:

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Alimentation dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Ouvrir en naviguant le menu avec les boutons + ou -, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour activer la fonction de mise en marche automatique lors de l'ouverture de l'unité, sélectionnez l'option Power on en utilisant les boutons + ou -. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez l'option No action.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Sous-menu Fermer (Close)

Pour activer ou désactiver la mise hors tension automatique lors de la fermeture du Compact 7 HD :

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Naviguez dans le menu en appuyant sur le bouton + pour vous déplacer vers le haut et sur le bouton – pour vous déplacer vers le bas. Sélectionnez l’option Alimentation puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option Fermer en naviguant à l’aide des boutons + ou -, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour activer la fonction de mise hors tension automatique à la fermeture de l’unité, choisissez l’option Power off en vous aidant des boutons + ou -. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez l’option No action.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Menu: Son (Beep)

Cette option de menu vous permet d’activer ou de désactiver les sons (signaux sonores). Par défaut, les sons sont activés.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas

dans le menu. Sélectionnez l'option Son dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.

- Pour activer les sons, sélectionnez l'option On en utilisant les boutons + ou -. Pour désactiver les sons, sélectionnez l'option Off.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Menu: Lumière (Light)



Cette option de menu vous permet d'activer ou de désactiver les lumières d'objet situées à la gauche et à la droite de la camera. L'éclairage fourni par les lumières d'objet favorise la visualisation à distance. Par défaut, les lumières d'objet sont activées.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + ou – simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Lumière dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Pour activer les lumières d'objet, sélectionnez l'option On en utilisant les boutons + ou -. Pour désactiver les lumières d'objet, sélectionnez l'option Off.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Menu: Couleur (Color)

Le Compact 7 HD offre quatre combinaisons de couleurs à contraste élevé. Pour chacune de ces quatre combinaisons, vous pouvez sélectionner les couleurs de l'avant et de l'arrière-plan. Il est possible de désactiver trois des quatre combinaisons si une seule combinaison de couleurs est requise.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons **+** et **-** simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton **+** pour naviguer vers le haut et le bouton **-** pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Couleur dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez un mode de visualisation à contraste élevé en utilisant le bouton **+** pour naviguer vers le haut ou le bouton **-** pour naviguer vers le bas dans le sous-menu Couleur, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour sélectionner une nouvelle combinaison de couleurs à contraste élevé pour l'avant et l'arrière-plan, utilisez le bouton **+** pour naviguer vers le haut ou le bouton **-** pour naviguer vers le bas dans la liste de combinaisons de couleurs.
- Les modes de visualisation à contraste élevé 2, 3 et 4 peuvent être désactivés en sélectionnant l'option Off.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Menu: Configuration par défaut (Reset)



Vous pouvez restaurer la configuration par défaut du Compact 7 HD. Tous les paramètres ayant subi une modification reviendront alors à la configuration d'origine du fabricant.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et - simultanément pendant deux secondes.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton - pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Rétablir, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Pour restaurer la configuration par défaut du fabricant, sélectionnez Yes en appuyant sur les boutons + ou -. Pour annuler cette action et garder la configuration tel quel, sélectionnez No.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour revenir en mode vidéo.

Compact 7 HD

Funzioni Avanzate



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands
Phone: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introduzione

Grazie per aver scelto Optelec Compact 7 HD!

Questo videoingranditore Optelec è unico nel suo genere, in quanto possiede una messa a fuoco elettronica automatica che consente di visualizzare e ingrandire testi e immagini stampate ad alta qualità con risoluzione HD a colori o in una delle modalità ad alto contrasto. Compact 7 HD è dotato di un display da 7 pollici, con ingrandimento minimo da 2.5 volte, per consentire una visione d'insieme, raggiungendo un ingrandimento fino a 30 volte, per chi necessita di un ingrandimento più elevato.

Con il suo design multifunzionale, l'innovativo concetto di illuminazione, la funzione di messa a fuoco automatica e il leggio integrato, Compact 7 HD può essere utilizzato per la lettura di testi, la visualizzazione di immagini, la lettura di prezzi e molto altro, mentre si è a casa o in viaggio.

Se avete domande o suggerimenti riguardanti l'utilizzo di questo prodotto, contattate il vostro distributore o la sede Optelec, consultando le informazioni nell'ultima pagina di questo manuale. Il vostro riscontro sarà molto apprezzato.

A proposito di questo manuale

Optelec lavora costantemente per migliorare i suoi prodotti e la loro funzionalità. Potrebbe essere che questo manuale non sia l'ultima versione rilasciata. Per cortesia verificate la versione del manuale aggiornata nella sezione "Support" sul sito www.optelec.com.

Questo manuale vi aiuta a familiarizzare con le caratteristiche e il funzionamento di base di Compact 7 HD. Si prega di leggerlo attentamente prima di utilizzare il dispositivo.

Contenuto della confezione


La confezione di Compact 7 HD contiene:

- Il videoingranditore Compact 7 HD
- Una custodia protettiva
- Un cordino da polso
- Un alimentatore
- 4 spine intercambiabili per l'alimentatore (Europa, America, Regno Unito e Australia)
- Un panno morbido per pulire lo schermo
- *Compact 7 HD Installazione ed uso*
- *Compact 7 HD Sicurezza e cura*

Se alcuni elementi fossero mancanti, contattate il vostro distributore.

2. Per iniziare

Per permettervi di seguire correttamente le indicazioni contenute in questo manuale, posizionate il Compact 7 HD di fronte a voi, con lo schermo rivolto verso l'alto e il pulsante bianco e l'interruttore arancione on/off nella parte inferiore dello schermo.

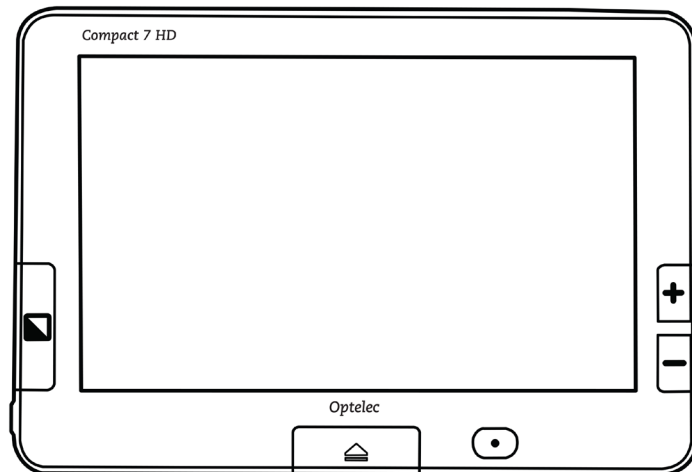


Utilizzare Compact 7 HD in posizione chiusa o aperta


Compact 7 HD può essere utilizzato in 2 modi: in posizione chiusa o aperta.

In posizione chiusa, tenete l'apparecchio in mano e orientate la telecamera (si trova sul retro dell'apparecchio) sull'oggetto o sul testo che desiderate vedere o leggere.

La posizione chiusa è ideale per visualizzare rapidamente oggetti o documenti.

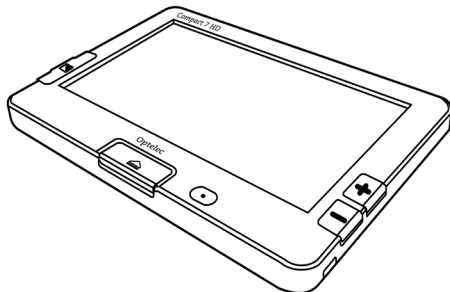

Compact 7 HD in posizione chiusa

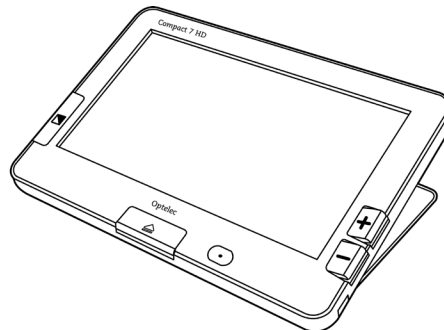


Compact 7 HD in posizione aperta

In posizione aperta, lo schermo sarà inclinato con un angolo di visione adatto per la lettura, con la telecamera rivolta verso il basso. La posizione aperta permette di leggere testi più lunghi, grazie al supporto di lettura integrato.

Per aprire l'unità, seguire questi passaggi:

1. Posizionare il Compact 7 HD di fronte a voi con lo schermo verso l'alto e l'interruttore arancione on/off nella parte inferiore dello schermo.
2. Premere il pulsante bianco centrale, posizionato nella parte inferiore dello schermo. Lo schermo si solleverà e il Compact 7 HD si accenderà.

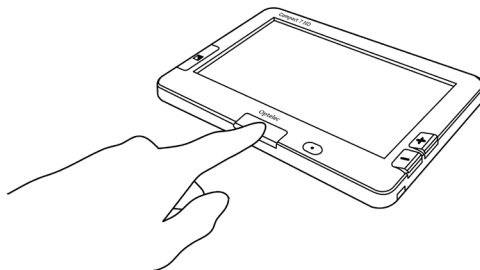


Come pulire la lente della telecamera e lo specchio

Per un'immagine di qualità ottimale, si raccomanda di mantenere puliti l'obiettivo della telecamera e lo specchio della luce. Una lente non pulita può visualizzare un'immagine non a fuoco e potrebbe causare problemi al sistema autofocus. Un specchio della luce pulito è importante per prevenire macchie scure o luminose e per garantire un'immagine uniformemente illuminata. Per pulire la lente della telecamera e lo specchio, usare il panno incluso nella confezione o altro panno morbido adatto alla pulizia delle lenti.

Attenzione: Non utilizzare acqua o detersivi per pulire la lente e lo specchio.

Pulsanti

Il Compact 7 HD ha i seguenti pulsanti:

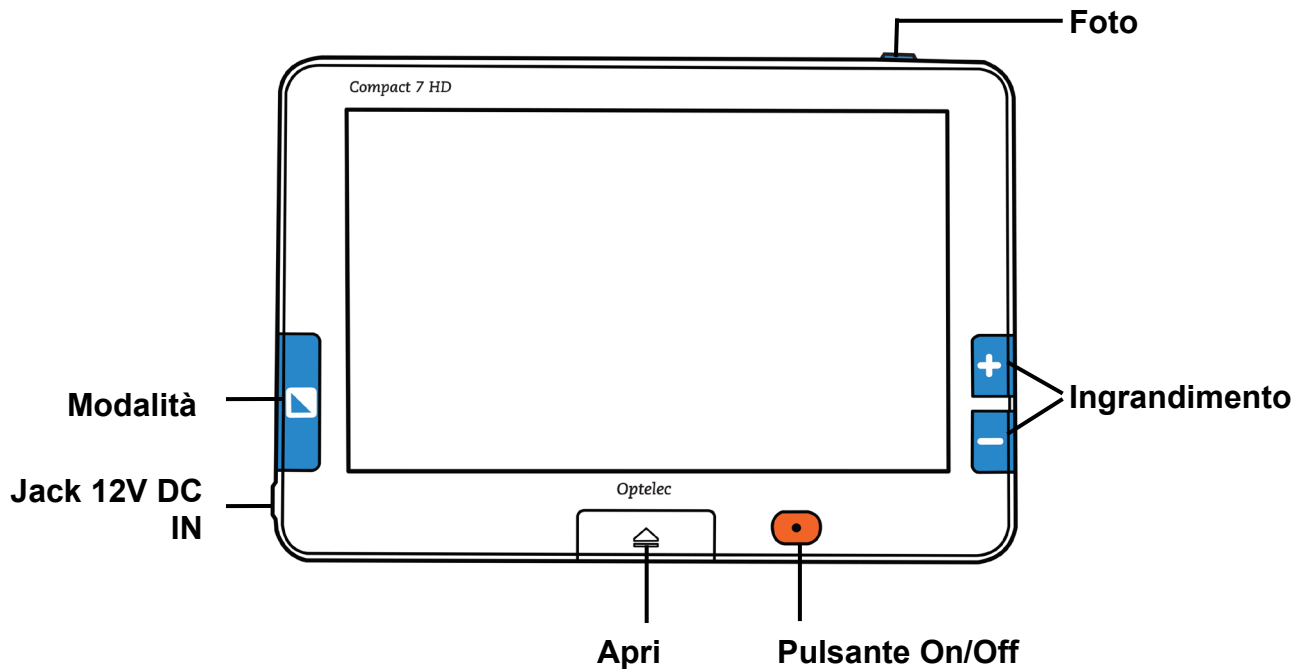

Apri

Premendo il pulsante bianco centrale, Compact 7 HD si apre e si accende.

Modalità

Premendo il pulsante Modalità alla sinistra dello schermo, è possibile selezionare una delle modalità di visualizzazione. Premendolo per tre secondi, si spegnerà la luce sull'oggetto, tenendolo premuto per altri tre secondi, la luce si riaccenderà.

Ingrandimento

Premendo per un secondo il pulsante + o - alla destra dello schermo, è possibile aumentare o diminuire l'ingrandimento. Premendo insieme i tasti + e - è possibile entrare o uscire dal menu di Compact 7 HD.

Foto


Il pulsante Foto è posizionato in alto a destra e permette di scattare foto temporanee di un'immagine, per permettervi di portarla più vicino agli occhi.

Pulsante On/Off

Premendo per un secondo il pulsante ovale arancione, si accende e spegne l'apparecchio.

Jack 12V DC IN

Il jack 12V DC IN si trova sull'angolo in basso a sinistra di Compact 7 HD. Il cavo dell'alimentatore si collega a questo jack. Utilizzare solo l'alimentatore fornito nell'imballo per ricaricare l'apparecchio.

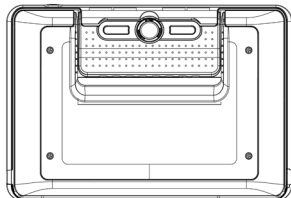

La telecamera di Compact 7 HD è posizionata sul retro dell'unità. Alla destra e alla sinistra della telecamera ci sono due luci che vengono utilizzate quando l'unità è nella posizione chiusa.

Accensione e spegnimento

Prima di accendere il Compact 7 HD per la prima volta, occorre caricare le batterie. Quando è carico, premere per un secondo il pulsante arancione on/off, posizionato alla destra del pulsante bianco centrale utilizzato per l'apertura. L'apparecchio si accenderà nella stessa modalità in cui è stato spento l'ultima volta. Per spegnere il Compact 7 HD, premere ancora il pulsante arancione on/off per un secondo.

Quando si accende Compact 7 HD, ci vorranno circa 3 secondi prima che l'immagine sia visualizzata sullo schermo.

L'unità può anche essere accesa aprendo l'apparecchio come descritto in precedenza (questa è una impostazione di default). Quando si chiude l'unità, questa si spegne

automaticamente. Questa funzione di 'spegnimento alla chiusura' può essere abilitata o disabilitata dal menu di Compact 7 HD. Si prega di fare riferimento al [capitolo 4](#) per maggiori informazioni su come modificare queste impostazioni.

Regolare l'ingrandimento

Per modificare l'ingrandimento è sufficiente premere i tasti + o - che si trovano sulla destra dello schermo. Premete il pulsante + per aumentare, o il pulsante - per diminuire l'ingrandimento. In posizione aperta, quando è posizionato su un documento, l'ingrandimento minimo è di 2.5 volte e può essere aumentato fino a 30 volte. Compact 7 HD è dotato di una telecamera autofocus. Questa consente di utilizzare l'apparecchio tenendolo in mano in posizione chiusa. Avrete così una visione panoramica, ma diminuirà l'ingrandimento minimo e massimo.

Selezionare la modalità di visualizzazione

Premendo il pulsante Modalità sul lato sinistro dello schermo, si può selezionare una delle seguenti modalità di visualizzazione:

Foto: visualizzazione fotografica di testi e immagini

Negativa: lettura ad alto contrasto bianco su nero

Positiva: lettura ad alto contrasto nero su bianco

Alto Contrasto **combinazione colore 1**

Alto Contrasto **combinazione colore 2**

La pressione del pulsante Modalità per 3 secondi, spegne o accende le lampade per l'illuminazione dell'oggetto. Cambiando la modalità di visualizzazione, le lampade verranno riattivate automaticamente.

Usare il pulsante Foto

Il pulsante Foto permette di scattare una fotografia temporanea di un testo o di un'immagine.

- Posizionare Compact 7 HD sul testo o sull'immagine che si desidera visualizzare.
- Premere il pulsante di scatto sul lato superiore destro del dispositivo per fare una foto.
- Tenere Compact 7 HD vicino agli occhi per vedere oggetti o immagini più da vicino.
- Premere il pulsante modalità per cambiare modalità di visualizzazione.
- Usare i pulsanti di ingrandimento posizionati sul lato destro dello schermo per cambiare l'ingrandimento dell'immagine visualizzata.
- Durante la visualizzazione dell'immagine catturata, premere il pulsante Foto per 2 secondi per salvare l'immagine e ritornare alla modalità dal vivo. Un breve segnale acustico e l'indicatore sullo schermo confermeranno che l'immagine è stata salvata. Un massimo di 75 immagini possono essere memorizzate nella memoria di Compact 7 HD. Una nuova immagine sostituirà la più vecchia nella memoria.

O

- Premere nuovamente il pulsante Foto per ritornare alla modalità dal vivo. E' ora possibile fare un'altra foto.

Nota: se il pulsante Foto viene rilasciato prima dei due segnali acustici, non verrà salvata nessuna immagine.

3. Ricarica della batteria

Come ricaricare Compact 7 HD

Compact 7 HD è fornito con un alimentatore e quattro spine. Le spine sono disponibili per UE, USA, UK e AU. Scegliete la spina adatta e montatela sull'alimentatore.

Per caricare Compact 7 HD, collegate l'alimentatore alla presa DC 12V, situata sul lato sinistro dell'unità. Collegate l'altro lato dell'alimentazione alla presa di corrente. L'indicatore LED arancione accanto alla presa DC 12V rimane illuminato finché Compact 7 HD è in carica. Quando l'unità è completamente carica, il LED diventa verde. Se il LED lampeggia, c'è un problema di ricarica. In questo caso, scollegare l'alimentazione e riprovare.

La ricarica di Compact 7HD richiede circa 3,5 ore. A piena carica, Compact 7 HD è in grado di operare per un tempo medio di 5 ore, a seconda delle impostazioni per l'alimentazione. Per ragioni di sicurezza, solo l'alimentatore in dotazione può essere usato per ricaricare la batteria dell'unità.

Standby e autospegnimento

Compact 7 HD passa automaticamente in modalità di standby dopo due minuti di inattività sui tasti e sulle immagini. Premendo un qualsiasi pulsante, si riattiverà nuovamente l'unità. Quattro minuti dopo che Compact 7 HD è andato in modalità standby, l'unità si spegnerà

automaticamente. Premendo il pulsante arancione On / Off potrà essere riacceso. Il tempo di standby e di spegnimento può essere modificato e disattivato nel menu di Compact 7 HD. Consultate il capitolo successivo per modificare queste impostazioni.

Avviso batteria scarica



Quando la carica della batteria è inferiore al 5% della sua capacità totale, ogni minuto verrà emesso un segnale acustico e verrà mostrata l'icona della batteria scarica per 2 secondi. In tal caso, assicurarsi di caricare l'unità il più presto possibile. Quando la batteria è scarica, l'unità si spegnerà automaticamente.

Se l'unità non si accende, assicurarsi che la batteria sia carica.

4. Il Menu di Compact 7 HD

Stato di carica della batteria e versione del firmware.	
Consente di visualizzare o eliminare le immagini scattate	
Consente di regolare la luminosità dello schermo.	
Consente di configurare le impostazioni di alimentazione.	
Consente di attivare/disattivare l'audio.	
Consente di attivare/disattivare le impostazioni di illuminazione.	
Consente di cambiare i colori delle 4 modalità ad alto contrasto.	
Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.	

Attivare il Menu



Per accedere al menu, premere i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.



Navigare nel Menu



Utilizzare i tasti + e - per spostarsi tra le voci del menu. Il pulsante Modalità, situato a sinistra dello schermo, attiva la voce di menu selezionata o conferma la selezione. Per modificare una selezione, utilizzare i tasti + e -.



Uscire dal Menu



Per uscire dal menu, premere i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.



Menu: Informazioni (Information)

Questo menu mostra lo stato della batteria e la versione del firmware del dispositivo. In questo menu, non è possibile fare alcuna modifica.

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** contemporaneamente per due secondi.
- La prima opzione nel menu è Informazioni.
- Per uscire dal menu, premere il pulsante Modalità o il tasti **+** e **-** contemporaneamente per due secondi.

Menu: Immagini (Images)

Questo menu contiene tre sottomenu:

- Visualizza (View): Per visualizzare immagini salvate
- Cancella (Delete): Per cancellare immagini
- Cancella Tutto (Delete all): Per cancellare tutte le immagini

Sottomenu Visualizza (View)

Per visualizzare le immagini catturate:

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** simultaneamente per due secondi.
- Utilizzare il tasto **+** per spostarsi in alto e il tasto **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Immagini e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Visualizza usando i tasti **+** e **-** per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionare l'immagine che vorresti visualizzare usando il tasto **+** per andare all'immagine seguente, o il tasto **-** per andare all'immagine precedente.
- Usare il pulsante Modalità per tornare alla modalità Video.

**Sottomenu Cancella (Delete)**

Per cancellare le immagini catturate:

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** simultaneamente per due secondi.
- Utilizzare il tasto **+** per spostarsi in alto e il tasto **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Immagini e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Cancella usando i tasti **+** e **-** per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Selezionare l'immagine che vorresti cancellare usando il tasto **+** per andare all'immagine seguente, o il tasto **-** per andare all'immagine precedente.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.



- Premere il pulsante – per cancellare l'immagine.
- Premere il pulsante + per annullare.
- Usare il pulsante Modalità per tornare alla modalità Video.

Sottomenu Cancella Tutto (Delete all)

Per cancellare tutte le immagini:

- Attivare il menu premendo i tasti + e – simultaneamente per due secondi.
- Utilizzare il tasto + per spostarsi in alto e il tasto – per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Immagini e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Cancella Tutto usando i tasti + e – per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Premere il pulsante – per cancellare tutte le immagini.
- Premere il pulsante + per annullare.
- Usare il pulsante Modalità per tornare alla modalità Video.



Menu: Luminosità

Questa voce di menu consente di regolare la luminosità del display.

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante **+** per spostarsi in alto e il pulsante **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione di menu Luminosità e attivarla premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare il livello di luminosità utilizzando il pulsante **+** per aumentarla e il pulsante **-** per diminuirla. Ci sono 5 livelli di luminosità tra cui scegliere. Il livello di luminosità di base è 4.
- Usare il pulsante Modalità per tornare alla modalità Video.

Menu: Alimentazione (Power)


Questo menu contiene 4 sottomenù:

**Standby**


Consente di impostare il tempo dopo il quale Compact 7 HD entra in modalità standby per risparmiare energia. Premendo un qualsiasi pulsante si riattiverà l'unità. Per impostazione predefinita, il tempo di standby è impostato a 2 minuti.

**Spegnimento
(Power off)**

Consente di impostare il tempo prima che Compact 7 HD si spenga automaticamente. Come impostazione predefinita, il tempo di spegnimento è impostato a 4 minuti. Questi 4 minuti decorrono dal tempo di standby di 2 minuti. Quindi, per impostazione predefinita, l'unità si spegne automaticamente dopo 6 minuti.

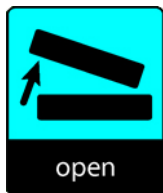**Apri
(Open)**

Attiva o disattiva l'accensione automatica all'apertura di Compact 7 HD. Per impostazione predefinita, Compact 7 HD si accende al momento dell'apertura.

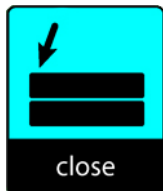**Chiudi
(Close)**

Attiva o disattiva lo spegnimento automatico alla chiusura di Compact 7 HD. Per impostazione predefinita, Compact 7 HD si spegne al momento della chiusura.

Sottomenu Standby

Il tempo di standby predefinito è impostato a 2 minuti. Per regolare il tempo di standby di Compact 7 HD:

- Attivare il menu premendo i pulsanti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Standby utilizzando i pulsanti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Impostare il tempo per la modalità standby utilizzando il pulsante + per aumentare e il pulsante - per diminuire il tempo. Selezionando DISABLED si disabilita la funzione di Standby automatica.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Sottomenu Spegnimento (Power off)

Per attivare il menu Spegnimento di Compact 7 HD:

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Spegni utilizzando i pulsanti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.

- Selezionare il tempo che si desidera tramite il pulsante + per aumentarlo e il pulsante - per diminuirlo. Selezionando No ACTION si disabiliterà lo spegnimento automatico.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Sottomenu Apri (Open)

Per attivare o disattivare l'alimentazione dopo l'apertura di Compact 7 HD:

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare l'opzione Apri utilizzando i pulsanti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Per abilitare la funzione di accensione all'apertura dell'apparecchio, selezionare il valore POWER ON utilizzando i pulsanti + e -. Selezionando NO ACTION si disabilita la funzione di accensione all'apertura.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Sottomenu Chiudi (Close)

Per attivare o disattivare l'alimentazione alla chiusura di Compact 7 HD:

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare l'opzione Alimentazione e attivare questo menu premendo il pulsante Modalità.

- Selezionare l'opzione Chiudi utilizzando i pulsanti + e - per scorrere le opzioni. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.
- Per abilitare la funzione di spegnimento alla chiusura, selezionare il valore OFF utilizzando i pulsanti + e -. Selezionando NO ACTION disabilita la funzione di spegnimento alla chiusura.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Menu: Audio (Beep)



Questo menu consente di attivare o disattivare i segnali acustici (segnali di feedback). Per impostazione predefinita, i segnali acustici sono abilitati.

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Audio e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Per attivare i suoni, selezionare il valore ON utilizzando i pulsanti + e -. Selezionando OFF disabilerete i suoni.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Menu: Luce (Light)

Questo menu consente di attivare o disattivare le luci sull'oggetto, che si trovano a sinistra e a destra della telecamera. Per impostazione predefinita, le luci sono abilitate.

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante **+** per spostarsi in alto e il pulsante **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Luce e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Per attivare le luci, selezionare il valore ON utilizzando i pulsanti **+** e **-**. Selezionando OFF disabilitate le luci sull'oggetto.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Menu: Colore (Color)

Compact 7 HD supporta quattro modalità ad alto contrasto. Per ognuna di esse, i colori in primo piano e i colori di sfondo possono essere selezionati. Tre delle modalità ad alto contrasto possono essere disabilitate se solo una modalità ad alto contrasto è richiesta.

- Attivare il menu premendo i tasti **+** e **-** contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante **+** per spostarsi in alto e il pulsante **-** per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Colore e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Selezionare la modalità ad alto contrasto con il pulsante **+** per spostarsi in alto e il pulsante **-** per spostarsi verso il basso nel sottomenu colore. Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta.

- Per selezionare un nuovo colore di contrasto elevato per il primo piano e lo sfondo, usare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso nella lista delle combinazioni di colori.
- Le modalità ad alto contrasto 2, 3 e 4 possono essere disattivate selezionando il valore DISABLED.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Menu: Reset



In Compact 7 HD possono essere ripristinate le impostazioni predefinite in fabbrica. Con il Reset, tutte le impostazioni che sono state modificate, saranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

- Attivare il menu premendo i tasti + e - contemporaneamente per due secondi.
- Utilizzare il pulsante + per spostarsi in alto e il pulsante - per spostarsi in basso all'interno del menu. Selezionare il menu Reset (Ripristino) e attivarlo premendo il pulsante Modalità.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare YES utilizzando i pulsanti + e -. Scegliendo NO, si lasceranno tutte le impostazioni invariate.
- Premere il pulsante Modalità per confermare la scelta e tornare alla modalità Video.

Compact 7 HD

Características y funciones avanzadas



Optelec
C.P. 399
2990 AJ Barendrecht
Países Bajos
Teléfono: +31 (0)88 678 34 44
Correo-E: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Introducción

¡Felicitaciones por la compra de su Compact 7 HD!

Este sistema electrónico de amplificación con auto-foco por Optelec le permite de visualizar y ampliar textos imprimados y fotos a todo color o en uno de los modos de alto contraste en su monitor HD de alta calidad y resolución. La pantalla de 7" del Compact 7 HD proporciona una amplificación mínima de 2.5 veces para una visualización más completa de la pantalla hasta un máximo de 30 veces para un nivel de zoom más poderoso.

Con su diseño multifuncional, su concepto de iluminación original, su visualización de distancia y su soporte de lectura integrado, se puede utilizar el Compact 7 HD para leer, mirar fotos, ampliar etiquetas de precios, visualizar muestras y mucho más, dentro o fuera del domicilio.

Si tiene preguntas o sugerencias con respecto al uso de este producto, por favor contacte a su proveedor o a la oficina central de Optelec, utilizando la información en contacto que aparece al final de este manual. Sus opiniones serán altamente apreciadas. ¡Esperamos que disfruten trabajar con su Compact 7 HD!

Acerca de este manual

Debido a que estamos constantemente mejorando nuestros productos y sus funcionalidades, es posible que no sea la versión más reciente de este manual. Por favor, descargue la última versión de este manual en la página de www.optelec.com.

El siguiente manual le permite familiarizarse con las características y el funcionamiento sencillo del Compact 7 HD. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar su sistema.

¿Qué contiene la caja?


El empaque del Compact 7 HD contiene los elementos siguientes:

- El sistema de amplificación Compact 7 HD
- Un estuche de protección
- Una correa de muñeca
- Un cable de alimentación
- 4 adaptadores regionales (Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Australia)
- Un paño limpiador
- *Compact 7 HD Primeros pasos y funcionamiento*
- *Compact 7 HD Seguridad y mantenimiento*

En caso de notar que dentro del empaque falta alguno de los elementos arriba mencionados, por favor, póngase en contacto con su proveedor.


2. Conocer su Compact 7 HD

El Compact 7 HD está puesto correctamente delante de usted cuando la pantalla mira hacia arriba, y el botón naranjado del interruptor y el gran botón blanco están ubicados en la parte inferior de la pantalla.

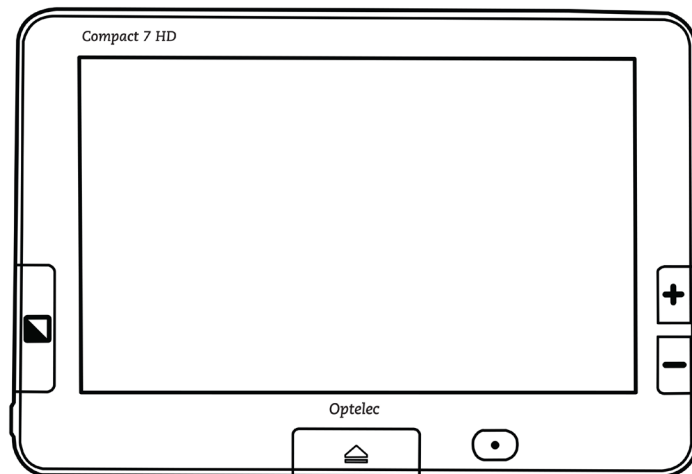


Utilizar el Compact 7 HD en la posición cerrada o abierta

Se puede usar el Compact 7 HD de dos maneras: en la posición cerrada o en la posición abierta. En la posición cerrada, sujete la unidad en la mano y dirija el foco de la cámara (ubicada atrás de la unidad) al objeto o texto que desea visualizar o leer en la pantalla. La posición cerrada es ideal para numerisar y visualizar objetos o documentos rápidamente.

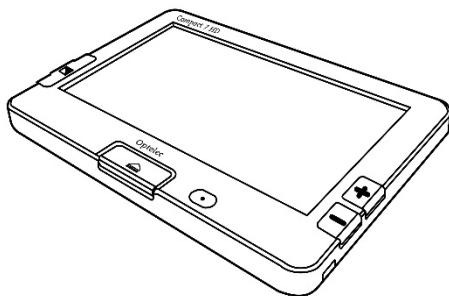

Compact 7 HD cerrado

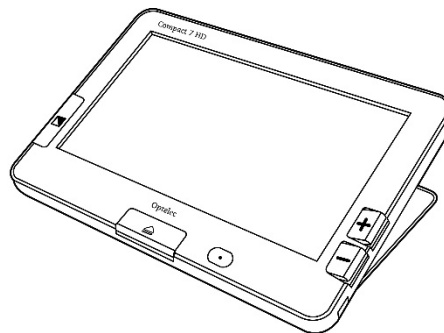


Compact 7 HD abierto

En la posición abierta, la pantalla se inclina de manera ergonómica y la cámara se dirige hacia abajo para facilitar la lectura. La posición abierta le permite de leer textos más largos debido a su soporte de lectura integrado.

Para abrir la unidad, siga estos pasos:

1. Coloque el Compact 7 HD delante de usted para que la pantalla mire hacia arriba y el botón naranjado del interruptor y el gran botón blanco estén ubicados en la parte inferior de la pantalla.
2. Presione el gran botón blanco ubicado en el centro de la parte inferior de la pantalla para abrir y encender el Compact 7 HD.

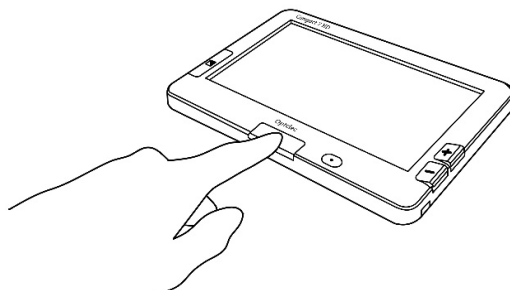


Limpiar el lente de la cámara y el espejo

Para una mayor calidad de imagen, le recomendamos de mantener el lente de la cámara y el espejo de las luces del objeto limpios. Un lente sucio sacará fotos nubladas y podrá causar el uso incorrecto del auto-foco. Un espejo limpio es importante para prevenir imágenes con manchas oscuras o claras y para obtener un brillo de foto ideal. Para limpiar el lente de la cámara y el espejo, utilice el paño limpiador proporcionado u otro paño limpiador de lente.

Nota: No utilice agua o agentes de limpieza para limpiar el lente y el espejo.

Los botones

El Compact 7 HD tiene los botones siguientes:

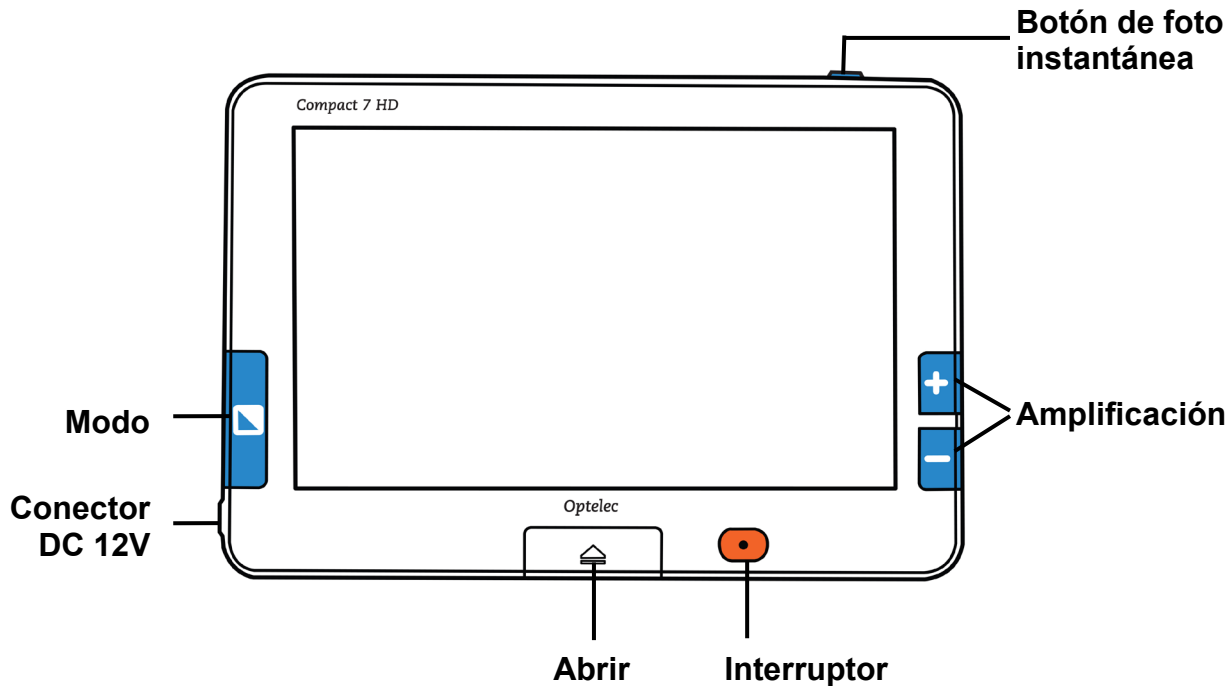

Abrir

Al presionar el botón blanco ubicado en el centro de la parte inferior de la pantalla, abrirá el Compact 7 HD y encenderá la unidad.

Modo

Al presionar el botón Modo ubicado a la izquierda de la pantalla, podrá seleccionar uno de los modos de visualización. Al presionar este botón durante tres segundos, apagará las luces del objeto. Al presionar este botón de nuevo durante 3 segundos más, volverá a encender las luces del objeto.

Amplificación

Al oprimir durante un segundo los botones + o - ubicados a la derecha de la pantalla, podrá aumentar o reducir la amplificación. Al presionar los botones + y - simultáneamente durante un segundo, podrá entrar o salir del menú del Compact 7 HD.

Botón de foto instantánea


El botón de foto instantánea ubicado en la parte superior derecha de la unidad le permitirá de sacar una foto temporaria de un texto o de una imagen alejada para acercarlos a sus ojos.

Interruptor

Al presionar durante un segundo el botón oval naranjado ubicado a la derecha del botón blanco en el centro de la parte inferior de la pantalla, podrá encender y apagar la unidad.

Conector DC 12V

El conector DC 12V está ubicado al lado izquierdo en la parte inferior del Compact 7 HD. Debe conectar el cable de alimentación a este conector. Solo el cable de alimentación proporcionado con el Compact 7 HD por Optelec se debe usar para alimentar la unidad y cargar su batería.

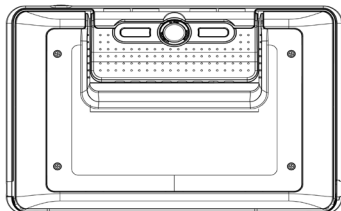

La cámara del Compact 7 HD está puesta atrás de la unidad. A la izquierda y a la derecha de la cámara están dos luces del objeto. Se usan estas luces cuando la unidad está en la posición cerrada.

Encender y apagar la unidad

Es necesario cargar el Compact 7 HD al usarlo por primera vez. Una vez cargado, presione durante un segundo el botón oval naranjado localizado a la derecha del gran botón blanco en el centro de la parte inferior de la pantalla. La unidad se encenderá en el modo de la última inicialización. Para apagar el Compact 7 HD, presione de nuevo el botón oval naranjado durante un segundo.

Al encender el Compact 7 HD, el proceso de inicialización tomará unos 3 segundos antes de desplegar alguna imagen en la pantalla.

También, se puede encender el Compact 7 HD al abrir la unidad (función de defecto), tal como descrito en los párrafos anteriores. Al cerrar la unidad, el Compact 7 HD se apagará automáticamente. Se puede activar o desactivar estos parámetros de defecto en el menú del Compact 7 HD. Por favor, lea el [capítulo 4](#) para obtener más información sobre cómo cambiar estos parámetros.

Ajustar la amplificación

Para ajustar la amplificación de la unidad, presione los botones **+** o **-** ubicados al lado derecho de la pantalla. Presione el botón **+** para aumentar la amplificación o el botón **-** para reducirla. Cuando la unidad está colocada sobre un documento en la posición abierta, el nivel de la amplificación empieza a 2.5 veces y puede ser aumentado hasta 30 veces. El Compact 7 HD incluye una cámara con auto-foco que le permite de tener la unidad en la mano mientras la usa en la posición cerrada. Esta posición le ofrece una visualización más completa de la pantalla, pero reduce el nivel mínimo y máximo de la amplificación.

Seleccionar un modo de visualización

Al presionar el botón **Modo** al lado izquierdo de la pantalla, podrá seleccionar uno de los modos de visualización siguientes:

Modo de foto: visualización de textos y fotos a todo color

Modo negativo: lectura en alto contraste, blanco sobre negro

Modo positivo: lectura en alto contraste, negro sobre blanco

Combinación de colores en alto contraste 1

Combinación de colores en alto contraste 2

Al presionar el botón **Modo** durante 3 segundos, podrá activar o desactivar las luces del objeto. Al cambiar el modo de visualización, encenderá las luces del objeto.

Utilizar el botón de foto instantánea

Este botón le permite tomar una captura temporaria de un texto o un objeto.

- Sujete o coloque el Compact 7 HD por encima del texto u objeto que desea capturar.
- Presione y mantenga presionado el botón de foto instantánea ubicado en la parte superior derecha de la unidad.
- Al acercar el Compact 7 HD a sus ojos le permitirá mirar el objeto o texto de cerca.
- Presione el botón **Modo** para seleccionar otro modo de visualización.

- Utilice los botones a la derecha de la pantalla para regular la amplificación de la imagen.
 - Mientras la imagen está desplegada en la pantalla, presione el botón de foto instantánea durante 2 segundos para guardarla y volver al modo video. El Compact 7 HD emitirá un corte bip y mostrara un indicador para confirmar que la imagen se ha guardado. La memoria del Compact 7 HD puede guardar hasta un máximo de 75 capturas de imagen. Al tomar una nueva captura, sustituirá la imagen más antigua en la memoria.
- O
- Presione de nuevo el botón de foto instantánea para volver al modo video. Ahora está listo para tomar otra captura.

Nota: Si suelta el botón de foto instantánea antes de oír los dos bips, el Compact 7 HD no guardará ninguna foto.

3. Carga de la batería

Cargar el Compact 7 HD

El Compact 7 HD incluye un cable de alimentación y cuatro adaptadores regionales (Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Australia). Seleccione el adaptador apropiado a su país y conéctelo al cable de alimentación.

Para recargar el Compact 7 HD, conecte el cable de alimentación al conector DC 5V ubicado al lado izquierdo de la unidad. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en una toma de corriente. El indicador naranjado al lado del conector DC 5V brillará de manera continua mientras la recarga del Compact 7 HD. Una vez recargado, el indicador brillará una luz verde. Si el indicador se pone a parpadear, esto indica un problema con el procedimiento de recarga. Si es el caso, desconecte el cable de alimentación y vuelva a intentarlo de nuevo.

La carga del Compact 7 HD toma aproximadamente 3.5 horas. El Compact 7 HD cargado puede funcionar durante unas 5 horas, depende de sus parámetros de alimentación. Tenga en cuenta que por razones de seguridad, solo el cable de alimentación proporcionado por Optelec se debe usar para cargar la batería del Compact 7 HD.

Modo de reposo y función de apagado automático

El Compact 7 HD se pondrá en modo de reposo automáticamente si no detecta ninguna presión de botón o ningún cambio de imagen durante dos minutos. Para anular el modo de reposo, toque cualquier botón. Después de cuatro minutos de reposo, la unidad se apagará automáticamente. Presione el botón naranjado ubicado al lado derecho de la unidad para encenderla de nuevo. Se puede regular el tiempo del modo de reposo y del apagado automático o desactivar estas funciones en el menú del Compact 7 HD. Por favor, consulte el siguiente capítulo para conocer cómo regular estos parámetros.









Aviso de batería vacía



Cuando la batería baja a 5% de su capacidad total, la unidad emite una notificación cada minuto, desplegando el icono de batería vacía durante dos segundos y emitiendo un bip. Asegúrese de cargar la unidad lo más pronto posible. Cuando se descarga la batería, la unidad se apaga automáticamente.

Si la unidad no se enciende, asegúrese que la batería está cargada.

4. El menú del Compact 7 HD

Muestra el estado de la batería y la versión del firmware	
Le permite visualizar o borrar las capturas de imágenes	
Le permite de ajustar el brillo de la pantalla	
Le permite de regular los parámetros de alimentación	
Le permite de activar o desactivar los sonidos	
Le permite de activar o desactivar los parámetros de las luces del objeto	
Le permite de cambiar los colores del los 4 modos de alto contraste	
Le permite de restablecer los parámetros de defecto del fabricante	

Activar el menú



Para entrar en el menú, presione los botones + y – simultáneamente durante dos segundos.



Navegar en el menú



Utilice los botones + o – para navegar entre las opciones del menú. El botón **Modo** ubicado a la izquierda de la pantalla le permite de activar la opción del menú seleccionada y de confirmar la selección. Utilice los botones + o – para cambiar la selección.



Salir del menú



Para salir del menú, presione los botones + y – simultáneamente durante dos segundos.



Menú: Información (Information)

Esta opción de menú indica el estado de la batería y la versión del firmware actual de la unidad. Ningún cambio es posible en este menú.

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- La primera opción en el menú es **Information** (Información).
- Para salir del menú, presione el botón **Modo** o los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos.

Menú: Imágenes (Images)

Este menú contiene tres submenús:

- Ver (View): Para ver las imágenes guardadas
- Borrar (Delete): Para borrar las imágenes guardadas
- Borrar todas (Delete all): Para borrar todas las imágenes guardadas

Submenú: Ver (View)

Para ver las imágenes guardadas:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar



hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Imágenes** y presione el botón **Modo** para activar esta opción.

- Utilice el botón **+** o el botón **-** para seleccionar el submenú **Ver** y para recorrer las opciones en el submenú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Utilice el botón **+** para navegar a la siguiente imagen o el botón **-** para navegar a la imagen precedente.
- Utilice el botón **Modo** para volver al modo video.

Submenú: **Borrar (Delete)**

Para borrar las imágenes guardadas:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Imágenes** y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice el botón **+** o el botón **-** para seleccionar el submenú **Borrar** y para recorrer las opciones en el submenú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Utilice el botón **+** para navegar a la siguiente imagen o el botón **-** para navegar a la imagen precedente. Presione el botón **Modo** para seleccionar la imagen que desea borrar.
- Pulse el botón **-** para borrar la imagen.



- Pulse el botón **+** para cancelar.
- Utilice el botón **Modo** para volver al modo video.

Submenú: **Borrar todas (Delete all)**

Para borrar todas las imágenes guardadas:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Imágenes** y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice el botón **+** o el botón **-** para seleccionar el submenú **Borrar todas** y para recorrer las opciones en el submenú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Pulse el botón **-** para borrar todas las imágenes.
- Pulse el botón **+** para cancelar.
- Utilice el botón **Modo** para volver al modo video.



Menú: Brillo (Brightness)

Esta opción de menú le permite de regular el brillo de la pantalla.

- Presione los botones + y – simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón + para navegar hacia arriba o el botón – para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Brightness** y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice el botón + para aumentar el brillo o el botón – para reducirlo. Se puede seleccionar entre cinco niveles de brillo en este menú. Por defecto, el brillo está regulado a 4.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Menú: Alimentación (Power)

Esta opción de menú contiene cuatro submenús:

**Reposo
(Standby)**


Le permite de regular el tiempo del modo de reposo automático del Compact 7 HD para conservar energía. Para anular el modo de reposo, toque cualquier botón. Por defecto, el tiempo de reposo está regulado a dos minutos.

**Apagar
(Power off)**

Le permite de regular el tiempo de la función del apagado automático del Compact 7 HD. Por defecto, el tiempo del apagado automático está regulado a 4 minutos. Después de estos 4 minutos, el Compact 7 HD se apagará automáticamente después de dos minutos. Por defecto, el tiempo total del apagado automático de la unidad es de 6 minutos.

**Abrir
(Open)**

Le permite de activar o desactivar el encendido automático al abrir el Compact 7 HD. Por defecto, el Compact 7 HD se encenderá al abrirlo.

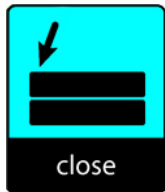**Cerrar
(Close)**

Le permite de activar y desactivar el apagado automático al cerrar el Compact 7 HD. Por defecto, el Compact 7 HD se apagará automáticamente al cerrarlo.

Submenú Reposo (Standby)

Por defecto, el tiempo de reposo automático está regulado a dos minutos. Para regular el tiempo del modo de reposo automático del Compact 7 HD:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Power** (Alimentación) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice los botones **+** o **-** para seleccionar la opción **Standby** (Reposo) en el menú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Seleccione el tiempo del modo de reposo automático de la unidad utilizando el botón **+** para aumentarlo o el botón **-** para reducirlo. Al seleccionar el valor **NO ACTION** (Ninguna acción) desactivará esta función.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Submenú Apagar (Power off)

Para activar el tiempo del apagado automático del Compact 7 HD:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Power** (Alimentación) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.

- Utilice los botones **+** o **-** para seleccionar la opción Power off (Apagar) en el menú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Seleccione el tiempo de apagado automático de la unidad utilizando el botón **+** para aumentarlo o el botón **-** para reducirlo. Al seleccionar el valor **NO ACTION** (Ninguna acción) desactivará la función del apagado automático.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Submenú Abrir (Open)

Para activar o desactivar el encendido automático al abrir el Compact 7 HD:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Power** (Alimentación) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice los botones **+** o **-** para seleccionar la opción **Open** (Abrir) en el menú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Seleccione el valor **POWER ON** (Activar) utilizando los botones **+** o **-** para activar el encendido automático al abrir la unidad. Al seleccionar el valor **NO ACTION** (Ninguna acción) desactivará esta función.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Submenú Cerrar (Close)

Para activar o desactivar el apago automático al cerrar el Compact 7 HD:

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Power** (Alimentación) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Utilice los botones **+** o **-** para seleccionar la opción **Close** (Cerrar) en el menú. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Seleccione el valor **POWER OFF** (Desactivar) utilizando los botones **+** o **-** para activar el apago automático al cerrar la unidad. Al seleccionar el valor **NO ACTION** (Ninguna acción) desactivará esta función.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Menú: Sonido (Beep)



Esta opción de menú le permite de activar o desactivar los sonidos (sonidos de respuestas). Por defecto, los sonidos están activados.

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el

menú. Seleccione la opción de menú **Beep** (Sonido) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.

- Seleccione el valor **ON** (Activar) utilizando los botones **+** y **-** para activar los sonidos. Al seleccionar el valor **OFF** (Desactivar), desactivará los sonidos.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Menú: Iluminación (Light)



Esta opción de menú le permite de activar o desactivar las luces del objeto ubicadas a la izquierda y a la derecha de la cámara. Por defecto, las luces del objeto están activadas.

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Light** (Iluminación) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Seleccione el valor **ON** (Activar) utilizando los botones **+** y **-** para activar las luces del objeto. Al seleccionar el valor **OFF** (Desactivar) desactivará las luces del objeto.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Menú: Color (Color)

El Compact 7 HD suporta cuatro modos de visualización en alto contraste. Para cada uno de los modos, se puede seleccionar los colores del primer plano y del fondo. Se puede desactivar tres de los modos de visualización en alto contraste, si solo un modo es necesario.

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Color** y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Seleccione un de los modos en alto contraste utilizando el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el submenú **Color**. Presione el botón **Modo** para confirmar la selección.
- Para seleccionar una nueva combinación de colores en alto contraste para el primer plano y el fondo, utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en la lista de las opciones de colores.
- Se puede desactivar las combinaciones de colores en alto contraste 2, 3 y 4, al seleccionar el valor **DISABLED** (Desactivar).
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Menú: Restablecer (Reset)

Es posible de restablecer la configuración de defecto del Compact 7 HD. Cualquier cambio que ha hecho a los parámetros del Compact 7 HD se restablecerá a el valor de defecto del fabricante.

- Presione los botones **+** y **-** simultáneamente durante dos segundos para activar el menú.
- Utilice el botón **+** para navegar hacia arriba o el botón **-** para navegar hacia abajo en el menú. Seleccione la opción de menú **Reset** (Restablecer) y presione el botón **Modo** para activar esta opción.
- Para restablecer la configuración de defecto del fabricante, utilice los botones **+** y **-** para seleccionar el valor **Yes** (Sí). Al seleccionar **NO**, la configuración seguirá siendo igual.
- Presione el botón **Modo** para confirmar la selección y volver al modo video.

Compact 7 HD

Erweiterte Ausstattungsmerkmale und Funktionen



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
The Netherlands
Phone: +31 (0)88 678 34 44
E-mail: info@optelec.nl
Internet: www.optelec.com

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Compact 7 HD!

Optelecs einzigartige, elektronische Autofokus-Video-Lupe ermöglicht Ihnen, gedruckte Texte und Bilder in hoher Auflösung, in HD-Qualität, in Echtfarben oder in einem der hohen Kontrast-Modi anzusehen. Der Compact 7 HD Bildschirm mit einer Diagonale von 17,8 cm (7 Zoll), kombiniert mit einer geringen Vergrößerungsstufe von 2.5fach, bietet Ihnen eine maximale Übersicht und ermöglicht gleichzeitig eine 30fache Darstellung, wenn Sie eine höhere Vergrößerung benötigen.

Mit seinem multifunktionalen Design, dem einzigartigen Lichtkonzept, Betrachtung im Abstand und integriertem Leseständer, kann der Compact 7 HD zum Lesen, Anschauen von Bildern, Anzeigen von Preisschildern, Anzeigetafeln und vieles mehr, zu Hause oder unterwegs genutzt werden.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Verwendung des Compact 7 HD haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder die Optelec GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuches. Ihre Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Compact 7 HD!

Über dieses Handbuch

Hier bei Optelec entwickeln wir unsere Produkte und Funktionen permanent weiter. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass dieses Handbuch nicht die neuste Ausgabe ist. Bitte laden Sie sich bei Bedarf eine aktuellere Ausgabe dieses Handbuchs von www.optelec.com und dort aus dem Supportbereich herunter.

Dieses Handbuch wird Sie mit den Eigenschaften und den grundlegenden Funktionen des Compact 7 HD vertraut machen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Lieferumfang


Das finden Sie in der Verpackung des Compact 7 HD:

- Die Compact 7 HD-Video-Lupe
- Eine Schutztasche
- Einen Trageriemen
- Ein Netzteil
- Vier Netzteiladapter unterschiedlicher Länder (EU, US, UK und AU).
- Ein Reinigungstuch für den Bildschirm
- *Compact 7 HD Vorbereitung und Verwendung*
- *Compact 7 HD Sicherheit und Pflege*

Sollte einer dieser Artikel fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

2. Erste Schritte

Der Compact 7 HD ist korrekt vor Ihnen platziert, wenn der Bildschirm nach oben zeigt und die große weiße Taste sowie die orange farbene Taste zum Ein- und Ausschalten sich unterhalb des Bildschirms befindet.

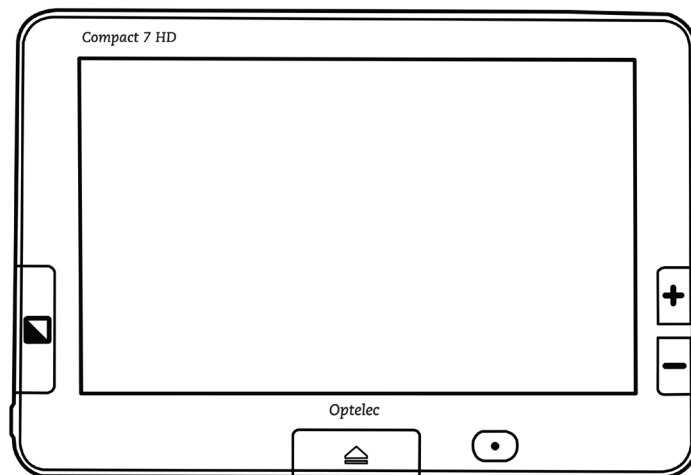


Benutzen des Compact 7 HD geschlossen oder geöffnet


Sie haben zwei Möglichkeiten, den Compact 7 HD einzusetzen: Mit geschlossenem oder aufgestelltem Bildschirm.

Nehmen Sie das Gerät mit dem geschlossenen Bildschirm in die Hand und halten Sie das Gerät auf den gewünschten Text oder das Bild (die Kamera befindet sich auf der Rückseite des Compact 7 HD).

Der Compact 7 HD mit geschlossenem Bildschirm zum Lesen aus der Distanz oder zum schnellen Aufnehmen von Objekten oder Dokumenten.

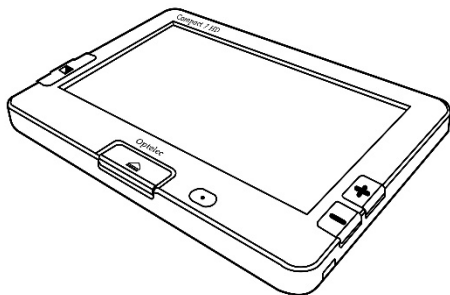

Compact 7 HD geschlossen

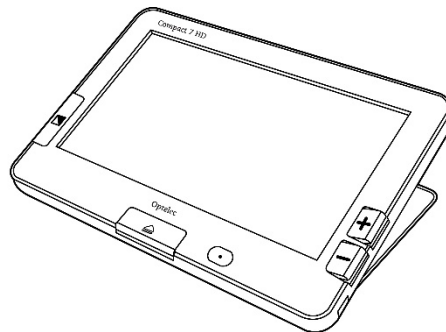


Compact 7 HD geöffnet

In der aufgestellten Position des Bildschirms, zeigt die Kamera nach unten und Sie können mit der ergonomischen Schrägstellung bequem lesen. Der aufgestellte Bildschirm ermöglicht Ihnen dank des integrierten Leseständers auch das Lesen von längeren Texten.

Zum Öffnen des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

1. Platzieren Sie den Compact 7 HD vor sich, so dass der Bildschirm nach oben zeigt und die große weiße Taste sowie der orange farbene Ein-/Ausrichter unter dem Bildschirm zu sehen sind.
2. Drücken Sie die weiße Taste in der Mitte unter dem Bildschirm. Der Bildschirm öffnet sich dadurch und das Gerät startet.

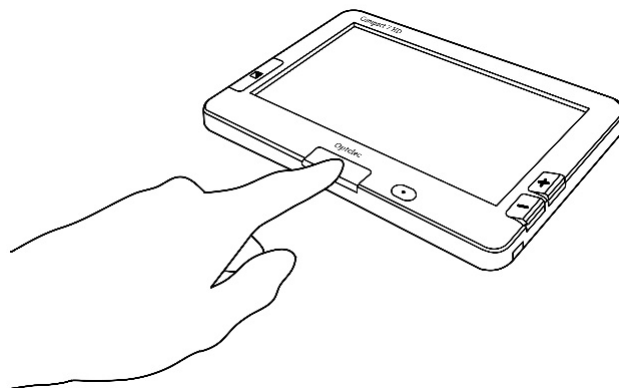


Reinigung der Kameralinse und des Spiegels

Für ein einwandfreies Bild empfehlen wir, die Kameralinse und den Spiegel der indirekten Beleuchtung regelmäßig zu reinigen. Durch eine verschmutzte Kameralinse können unscharfe Bilder entstehen. Außerdem kann Verschmutzung dazu führen, dass der Autofokus die Entfernungseinstellung nicht richtig ausführt. Ein sauberes Objektiv verhindert Flecken im Bild und gewährleistet eine korrekte Ausleuchtung. Zur Reinigung der Kameralinse und des Spiegels benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein anderes weiches und flusenfreies Reinigungstuch.

Hinweis! Verwenden Sie zur Reinigung der Kameralinse oder des Spiegels kein Wasser oder Reinigungsmittel.

Tastenbelegung

Der Compact 7 HD verfügt über folgende Tasten:

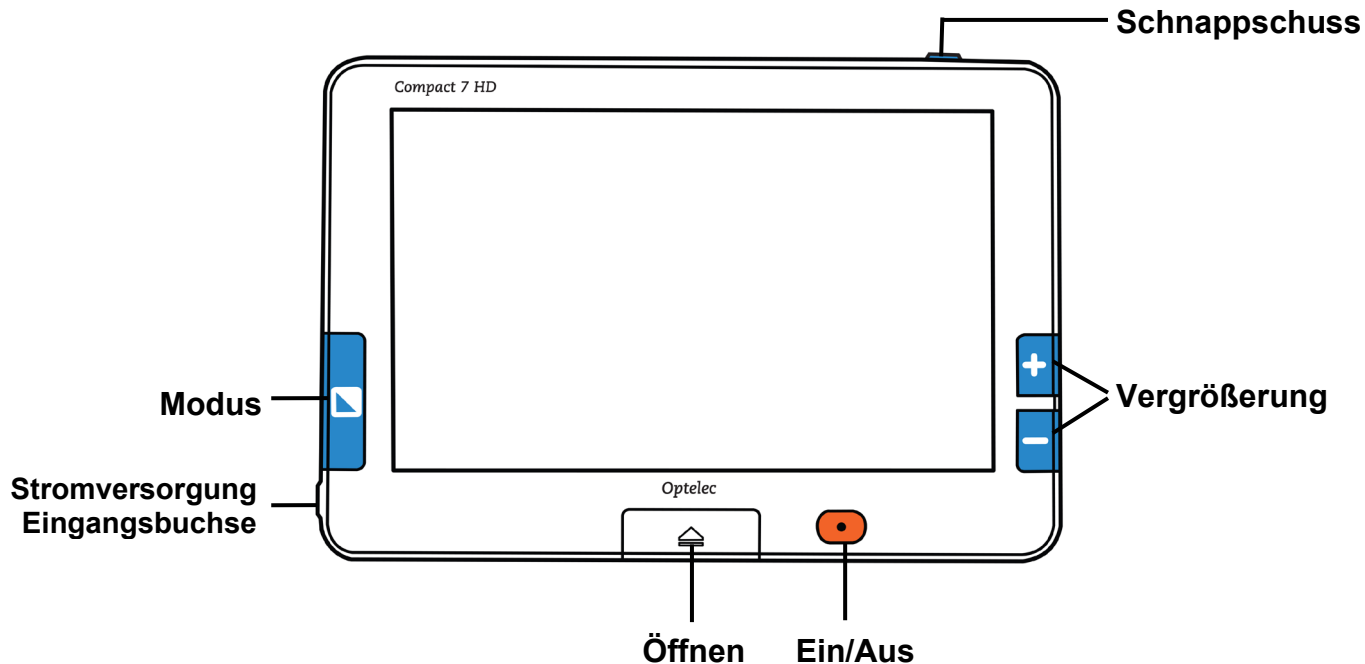

Öffnen



Der Compact 7 HD öffnet sich durch Drücken der weißen Taste in der Mitte unter dem Bildschirm.

Modus-Taste



Drücken Sie die Modus-Taste an der linken Seite des Bildschirms um den Darstellungsmodus zu wählen. Durch Drücken dieser Taste für 3 Sekunden schaltet sich die Beleuchtung aus.

Vergrößerung



Drücken Sie die + oder - Taste auf der rechten Seite des Bildschirms für eine Sekunde zum Vergrößern oder Verkleinern. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + und - erreichen und verlassen Sie das Compact 7 HD Einstellmenü.

Schnappschuss-Taste



Die Schnappschuss-Taste befindet sich oberhalb des Bildschirms auf der rechten Seite. Betätigen Sie diese, um vorübergehend ein Bild oder einen Text aus der Distanz aufzunehmen und anschließend aus der Nähe vergrößert zu betrachten.


Ein/Aus Taste



Durch Drücken der kleinen, ovalen, orangefarbenen Taste auf der rechten Seite des Gerätes für eine Sekunde schalten Sie das Gerät ein oder aus.

Stromversorgung Eingangsbuchse

Der Stromversorgungsanschluss befindet sich auf der linken Seite an der unteren Ecke des Compact 7 HD. Verbinden Sie das Netzteilkabel mit der Buchse und laden Sie damit den Akku des Gerätes auf. Sie dürfen nur ausschließlich das für das Gerät vorgesehene Netzteil benutzen!

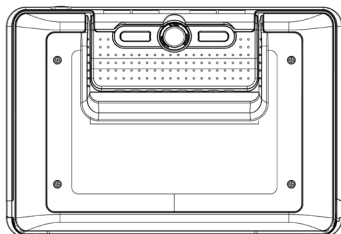

Die Kamera des Compact 7 HD ist auf der Rückseite des Gerätes angeordnet. Links und rechts neben der Kamera befindet sich die Objektbeleuchtung, die bei geschlossenem Compact 7 HD genutzt wird.

Compact 7 HD ein- und ausschalten

Bevor Sie den Compact 7 HD das erste Mal einschalten, muss das Gerät geladen werden. Nach dem Aufladen drücken Sie die orangefarbene, ovale Ein/Aus-Taste rechts neben der silbernen Öffnen-Taste für eine Sekunde. Das Gerät startet in dem zuletzt gewählten Modus. Durch nochmaliges Drücken der orangefarbenen Taste für eine Sekunde schalten Sie den Compact 7 HD wieder aus.

Wenn Sie den Compact 7 HD einschalten, dauert es ca. 3 Sekunden, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint.

Sie können das Gerät auch wie bereits beschrieben durch Aufstellen des Bildschirms einschalten (Standardeinstellung). Durch Schließen des Gerätes schaltet es sich automatisch aus. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für eine Sekunde oder verwenden Sie die "Automatisch-Schließen"-Funktion. Diese Standardeinstellung können Sie im Compact 7 HD Menü aktivieren oder deaktivieren. Im [Kapitel 4](#) dieses Handbuchs finden Sie weitere Informationen über diese Einstellungen.

Einstellen der Vergrößerung

Um die Vergrößerungseinstellung Ihres Gerätes zu ändern, drücken Sie einfach die + oder – Taste auf der rechten Seite des Bildschirms. Drücken Sie die + Taste zum Vergrößern oder die – Taste zum Verkleinern. Wenn Sie das Gerät mit aufgestelltem Bildschirm zum Lesen verwenden, beginnt der Compact 7 HD automatisch mit der 2.5fachen Vergrößerung. Sie haben die Möglichkeit, die Vergrößerung von 2.5fach bis 30fach einzustellen. Der Compact 7 HD ist mit einer Autofokus-Kamera ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen, das geschlossene Gerät für mehr Übersicht auch in den Händen haltend zu benutzen. Beachten Sie bitte, dass dadurch der minimale und maximale Vergrößerungsbereich eingeschränkt wird.

Auswahl des Darstellungsmodus

Drücken Sie die Modus-Taste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie können nun einen der nachfolgend beschriebenen Darstellungsmodi wählen:

Foto-Modus: Darstellung mit Echtfarben der Texte und Fotos

Negativ-Modus: Lesen mit hohem Kontrast – Weiß/Schwarz

Positiv-Modus: Lesen mit hohem Kontrast – Schwarz/Weiß

Hoher Kontrast **Lesefarben-Kombination 1**

Hoher Kontrast **Lesefarben-Kombination 2**

Durch Drücken der Modus-Taste für 3 Sekunden wird die Objektbeleuchtung im Wechsel ein- oder ausgeschaltet. Beim Wechsel des Darstellungsmodus wird die Objektbeleuchtung automatisch wieder eingeschaltet.

Schnappschuss-Funktion

Die Schnappschuss-Funktion ermöglicht Ihnen, einen Text oder ein Bild vorübergehend zu speichern.

- Halten oder legen Sie den Compact 7 HD auf den gewünschten Text oder das Bild welches Sie erfassen möchten.
- Drücken Sie die Schnappschusstaste auf der oberen rechten Seite des Gerätes für die Aufnahme.

- Halten Sie den Compact 7 HD nun näher an Ihre Augen um den Text oder die Vorlage direkt anzuschauen.
- Drücken Sie die Modus-Taste um den Darstellungsmodus zu ändern.
- Verwenden Sie die Vergrößerungstasten auf der rechten Seite des Bildschirms um die Vergrößerung auf Ihrem Bildschirm zu ändern.
- Während Sie das Bild betrachten drücken und halten Sie die Schnappschuss-taste zwei Sekunden lang um das Bild zu speichern und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren. Ein kurzer Signalton und eine Displayanzeige bestätigt die Bildspeicherung. Es können maximal 75 Bilder im Compact 7 HD gespeichert werden. Ein Bild mehr ersetzt das älteste gespeicherte Bild.

ODER

- Drücken Sie die Schnappschuss-taste erneut um in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren. Sie können nun erneut einen Schnappschuss ausführen.

Hinweis! Wenn Sie die Schnappschuss-Taste vor Ertönen der zwei Signaltöne loslassen, speichert der Compact 7 HD kein Bild.

3. Aufladen des Akkus

Aufladen des Compact 7 HD

Mit im Lieferumfang des Compact 7 HD sind ein Netzteil und vier Netzteiladapter unterschiedlicher Länder (EU, US, UK und AU).

Zum Aufladen des Compact 7 HD, verbinden Sie das Netzteilkabel mit der 12VDC Eingangsbuchse auf der linken Seite des Gerätes. Stecken Sie die andere Seite des Netzteils in die Steckdose. Die orange LED-Anzeige neben der 12VDC Eingangsbuchse leuchtet während des Ladevorgangs kontinuierlich. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die LED-Anzeige grün. Bei einem Ladeproblem blinkt die LED-Anzeige. Ziehen Sie das Netzteilkabel aus dem Compact 7 HD heraus und versuchen Sie das Aufladen durch erneutes Einstecken des Kabels noch einmal.

Das Aufladen des Compact 7 HD Akku dauert ca. 3,5 Stunden. Ein vollgeladener Compact 7 HD kann durchschnittlich 5 Stunden in Betrieb genommen werden, abhängig von den Energie-Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen nur das Netzteil, das mit dem Compact 7 HD geliefert wurde, verwendet wird!

Standby und automatisches Ausschalten

Der Compact 7 HD geht automatisch in den Standby-Modus, wenn innerhalb von zwei Minuten keine Taste gedrückt oder eine Bildveränderung erkannt wurde. Durch Drücken einer beliebigen Taste verlässt das Gerät wieder den Standby-Modus. Nach vier Minuten im Standby-Modus schaltet sich der Compact 7 HD automatisch aus. Drücken Sie die orange Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite des Gerätes, um den Compact 7 HD wieder einzuschalten. Die Standby-Zeit und die Ausschaltzeit können Sie im Compact 7 HD Menü ändern oder deaktivieren. Nähere Informationen zur Änderung der Einstellungen finden Sie im nächsten Kapitel.









Akkuwarnung



Wenn die Kapazität des Akkus unter 5% ist, erscheint auf dem Bildschirm jede Minute das Symbol "Akkuwarnung" für 2 Sekunden und ein Signalton ertönt. Sie sollten nun so schnell wie möglich das Gerät laden. Ist der Akku leer, so schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Lässt sich Ihr Gerät nicht einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass es geladen ist.

4. Das Compact 7 HD Menü

Anzeige Akku-Status und Firmwareversion	
Anzeigen oder löschen von gespeicherten Bildern.	
Einstellen der Helligkeit	
Einstellen der Energieoptionen	
Signaltöne Ein- oder Ausschalten	
Aktivieren oder Deaktivieren der Objektbeleuchtung	
Ändern der 4 Lesefarben Darstellungsmodi	
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	

Das Menü aktivieren



Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die + und – Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.



Navigieren im Menü



Drücken Sie die + oder – Taste zum Navigieren zwischen den Menüpunkten. Mit der Modus-Taste auf der linken Seite des Bildschirms aktivieren oder bestätigen



Sie den Menüpunkt. Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie die + oder – Taste.



Verlassen des Menüs



Um das Menü wieder zu verlassen, drücken Sie die + und – Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.



Menü: Information

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen den Akkustatus und die aktuelle Firmwareversion Ihres Gerätes an. In diesem Menüpunkt sind Änderungen nicht möglich.

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die + und – Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.
- Die erste Option in diesem Menü ist **“Information“**.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Modus-Taste oder die + und – Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.

Menü: Images → Bilder

Dieser Menüpunkt enthält drei Untermenüs:

- View → Anzeige: Zum Anzeigen von gespeicherten Bildern
- Delete → Löschen: Um Bilder zu löschen
- Delete all → Alles löschen: Um alle Bilder zu löschen

Untermenü Image → Anzeige:

Zum Anzeigen der gespeicherten Bilder:

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die **+** und **-** Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste nach unten. Wählen Sie den Menüpunkt **Images** und bestätigen Sie diesen mit dem Betätigen der Modus-Taste.
- Wählen Sie das Menü **View** mit der **+** oder **-** Taste. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie das gewünschte Bild mit der **+** Taste zum nächsten oder mit der **-** Taste zum vorherigen Bild.
- Drücken Sie die Modus-Taste um in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

**Untermenü Delete → Löschen**

Zum Löschen der gespeicherten Bilder:

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die **+** und **-**Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste nach unten. Wählen Sie den Menüpunkt **Images** und bestätigen Sie diesen mit dem Betätigen der Modus-Taste.
- Wählen Sie das Menü **Delete** mit der **+** oder **-** Taste. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.



- Wählen Sie das zu löschende Bild mit der + Taste zum nächsten oder mit der – Taste zum vorherigen Bild.
- Drücken Sie die – Taste um das Bild zu löschen.
- Drücken Sie die + Taste um abubrechen.
- Drücken Sie die Modus-Taste um in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Untermenü Delete all → Alles löschen

Um alle Bilder zu löschen:

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die + und –Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.
- Mit der + Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der – Taste nach unten. Wählen Sie den Menüpunkt **Images** und bestätigen Sie diesen mit dem Betätigen der Modus-Taste.
- Wählen Sie das Menü **Delete all** mit der + oder – Taste. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Drücken Sie die – Taste um alle Bilder zu löschen.
- Drücken Sie die + Taste um abubrechen.
- Drücken Sie die Modus-Taste um in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.



Menü: Brightness → Helligkeit

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Helligkeit auf Ihrem Bildschirm einstellen.

- Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die + und – Taste gleichzeitig für zwei Sekunden.
- Mit der + Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der – Taste bewegen Sie sich nach unten. Wählen Sie im Menü die Option "**Brightness**" und bestätigen Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Mit + Taste das erhöhen Sie die Helligkeit, mit der – Taste verringern Sie die Helligkeit. Sie haben 5 Stufen zur Auswahl. Die Standardeinstellung ist die Stufe 4.
-
- Drücken Sie die Modus-Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen und um das Menü zu verlassen.

Menü: Power → Ein-und Ausschalten

Dieser Menüpunkt hat vier Untermenüs:

**Standby**


Einstellen der Zeit, bis der Compact 7 HD in den Standby-Modus schaltet um Energie zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, und das Gerät verlässt den Standby-Modus. Die Standardeinstellung der Standby-Zeit beträgt 2 Minuten.

**Ausschalten**

Einstellen der Zeit, bis sich der Compact 7 HD automatisch ausschaltet. Die Standardeinstellung der automatischen Ausschaltzeit beträgt 4 Minuten. Diese 4 Minuten werden nach der Standard Standby-Zeit von 2 Minuten aktiviert. Das Gerät schaltet sich dadurch nach insgesamt 6 Minuten automatisch aus.

**Öffnen**

Aktivieren oder deaktivieren der automatischen Einschaltung des Compact 7 HD mittels Aufstellen des Bildschirms. In der Standardeinstellung wird der Compact 7 HD mit Aufstellen des Bildschirms eingeschaltet.

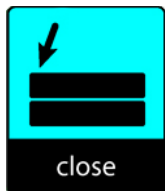**Schließen**

Aktivieren oder deaktivieren der automatischen Ausschaltung des Compact 7 HD mittels Schließen des Bildschirms. In der Standardeinstellung wird der Compact 7 HD mit dem Schließen des Bildschirms ausgeschaltet.

Untermenü **STANDBY**

Die Standardeinstellung der Standby-Zeit beträgt 2 Minuten. So stellen Sie die Standby-Zeit des Compact 7 HD ein:

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-**-Taste für zwei Sekunden.
- Wählen Sie den Menüpunkt "**Power**". Mit der **+** oder **-** Taste bewegen Sie sich durch die Optionen. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie das Menü "**Standby**" mit "**+**" oder "**-**". Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät in den Standby-Modus schalten soll. Mit der **+** Taste erhöhen und mit der **-** Taste verringern Sie die Zeit. Mit "**DISABLED**" schaltet das Gerät nicht automatisch in den Standby-Modus.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Untermenü **AUSSCHALTEN**

So aktivieren Sie die AUSSCHALT-ZEIT:

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-**-Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben, mit der **-** Taste nach unten. Wählen Sie im Menü die Option "**Power**" und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.

- Wählen Sie: **“POWER OFF“**. Mit der **+** oder **–** Taste wählen Sie die Optionen. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie die Zeit, nach der sich das Gerät automatisch ausschalten soll. Mit der **+** Taste erhöhen und mit der **–** Taste verringern Sie die Zeit. Wählen Sie **“DISABLED“**, und das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Untermenü ÖFFNEN

Automatisches Einschalten des Compact 7 HD durch Öffnen:

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **–** Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **–** Taste nach unten. Wählen Sie im Menü die Option **“Power“** und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Mit der **+** oder **–** Taste bewegen Sie sich durch die Optionen. Wählen Sie die Option **“Open“**. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie mit der **+** oder **–** Taste **“POWER ON“** und das Gerät schaltet sich automatisch durch Öffnen bzw. Aufstellen des Bildschirms ein. Wählen Sie **“No Action“**, und das Gerät schaltet sich nicht automatisch ein.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Untermenü **SCHLIESSEN**

So aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Ausschalten des Compact 7 HD mit Schließen des Gerätes bzw. des Bildschirms:

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-** Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste bewegen Sie sich nach unten. Wählen Sie im Menü die Option **“Power“**, und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Mit der **+** oder **-** Taste bewegen Sie sich durch die Optionen. Wählen Sie die Option **“Close“**. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie mit der **+** oder **-** Taste **“POWER OFF“**, und das Gerät schaltet sich automatisch durch das Schließen aus. Wählen Sie **“No Action“**, und das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Menü: **Beep → Signalton**



In diesem Menüpunkt können Sie den Signalton aktivieren oder deaktivieren. In der Standardeinstellung ist der Signalton aktiviert.

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-** Taste für zwei Sekunden.

- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste bewegen Sie sich nach unten. Wählen Sie im Menü die Option "**Sound**", und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Um den Signalton einzuschalten, wählen Sie mit der **+** oder **-** Taste "**ON**". Wählen Sie "**OFF**", um den Signalton auszuschalten.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Menü: Light → Objektbeleuchtung



In diesem Menüpunkt können Sie die Objektbeleuchtung für das Lesen aus der Distanz aktivieren oder deaktivieren. Die Objektbeleuchtung befindet sich rechts und links neben der Kamera. In der Standardeinstellung ist die Objektbeleuchtung aktiviert.

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-** Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste bewegen Sie sich nach unten. Wählen Sie im Menü die Option "**Light**", und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Um die Objektbeleuchtung einzuschalten, wählen Sie mit der **+** oder **-** Taste "**ON**". Wählen Sie "**OFF**", um die Objektbeleuchtung auszuschalten.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Menü: Color → Farbe

Der Compact 7 HD verfügt über vier kontrastverstärkte Lesefarbenmodi. Für jeden sind verschiedene Vorder- und Hintergrundfarben wählbar. Drei dieser Modi können deaktiviert werden, wenn nur eine Lesefarbe benötigt wird.

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-** Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste nach unten. Wählen Sie im Menü die Option **“Color“**, und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste nach unten. Wählen Sie im Menü die Lesefarbe 1 bis 4. Durch Drücken der Modus-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Um eine neue Lesefarbenkombination für die Vorder- und Hintergrundfarbe zu wählen, drücken Sie die **+** Taste, um sich nach oben und die **-** Taste, um sich nach unten zu bewegen. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Farbkombination aus.
- Die Lesefarbenkombinationen 2, 3 und 4 können durch die Auswahl **“DISABLED“** deaktiviert werden.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Menü: Reset → Zurücksetzen

Der Compact 7 HD kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Aktivieren Sie das Menü durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **-** Taste für zwei Sekunden.
- Mit der **+** Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs nach oben und mit der **-** Taste bewegen Sie sich nach unten. Wählen Sie im Menü die Option "**Reset**", und aktivieren Sie diesen Menüpunkt durch Drücken der Modus-Taste.
- Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie "**Yes**" mit **+** oder **-** Taste. Mit der Menüauswahl "**No**" bleiben alle vorgenommenen Einstellungen erhalten.
- Drücken Sie die Modus-Taste um zu bestätigen und in den bewegten Darstellungsmodus zurückzukehren.

Optelec Offices Worldwide | Optelec kantoren wereldwijd | Optelec dans le monde | Sedi Optelec nel mondo | Optelec en el mundo | Optelec Weltweit**Optelec Europe**

Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3444
www.optelec.com

Optelec Canada

1812 Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (450) 677-1171
www.optelec.com

Optelec Limited

Unit C, Plot 5,
Merlin Way Quarry Hill
Ind. Estate, Ilkeston,
Derbyshire, DE7 4RA,
United Kingdom
T: +44 1923 23 13 13
www.optelec.co.uk

Optelec U.S.

17757 US Highway 19 North, Suite 560
Clearwater, FL 33764
U.S.A.
T: +1 (800) 444-4443
www.optelec.com

Optelec Nederland BV

Pesetrastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3555
www.optelec.nl

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Belgium
T: +32 (0)50 35 75 55
www.optelec.be

Optelec GmbH

Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany
T: +49 669 196 170
www.optelec.de

RFD-06013

Rev: A

Version 1.0

© August 2021, Optelec the Netherlands

All rights reserved

